



Green Lion

ميزان الجسم الذكي لايت

SKU: GNSBSCLLTEBK

Model No:GWS-11

٢	التركيب
٤	المواصفات
٥	مقدمة التطبيق
٥	التحذيرات
٦	ملاحظات
٧	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

الخطوة ١

تحقق من المواصفات المطلوبة للهاتف أو الجهاز اللوحي

قبل تثبيت تطبيق OKOK Healthcare، يُرجى التحقق مما إذا كان الهاتف أو الجهاز اللوحي يفي بالمتطلبات التالية:

iPhone:

iPhone ٦, iPhone ٥s, iPhone ٥c, iPhone ٥, iPhone ٤s, iPhone ٤, iPad Air, iPad Air ٢, iPad ٣, iPad ٥, iPad Mini, iPad Mini ٢, iPad Mini ٣, iPod Touch ٦.

iOS ٧.٠ فما فوق
٤.٠ بلوتوث فما فوق

Samsung:

Galaxy Note ٤, Galaxy S٣, Galaxy S٤, Galaxy S٥, Galaxy Grand ٢, Galaxy Note ٢, Galaxy Note ٣.

Xiaomi:

Xiaomi ١٢, Xiaomi ١٣, Xiaomi Note, Xiaomi ١٤, Xiaomi ١s ٤G, Hongmi Xiaomi Tablet, Hongmi Note, Plus.

Huawei:

Honor ٦, Honor ٦ Plus, Ascend P٧, Ascend P٨, Ascend G٧, Mate ٧.

أندرويد وما فوق
للأجهزة المحددة
مع بلوتوث ٤.٠ وما
فوق

الخطوة ٢

ركّب البطاريات

١. افتح غطاء البطارية


٢. ركّب البطاريات بالاتجاه الصحيح

٣. أغلق الغطاء

إذا كان الميزان لديك يعمل عبر USB، يرجى شحنه قبل أول استخدام، وتأكد من عدم شحنه لأكثر من ساعتين.

في هذه الأثناء، يرجى استخدام كابل شحن أندرويد وشاحن بتيار ثابت 5 فولت لشحنه.

إذا ظهرت إشارة "Lo"، يُرجى التوقف عن استخدامه فورًا وشحنه.

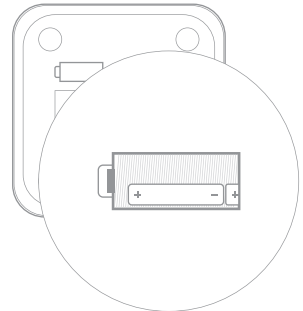

الخطوة ٣


تثبيت التطبيق

١. قم بتشغيل البلوتوث
٢. يجب أن يكون الهاتف أو الجهاز اللوحي متصلاً بالإنترنت (WiFi أو 3G أو 4G) دع جهازك يقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتطبيق "OKOK Healthcare"، ثم قم بتثبيت التطبيق.
- أو ابحث عن "OKOK international form" في متجر التطبيقات أو Google Play لتثبيته.

الخطوة ٤:


اقتران الأجهزة، التسجيل، وإدخال معلومات المستخدم.

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| اكمل المعلومات الشخصية. | سجل كمستخدم. | افتح التطبيق، وابدأ عملية |
| (الشاشة: اختر الجنس | (الشاشة: شاشة تسجيل | الوزن والاقتران. |
| والتفاصيل الأخرى) | الدخول تحتوي على زر "انضم | (الشاشة: يُرجى الوقوف على |
| | إلينا" و"تسجيل الدخول" | الميزان للبدء) |

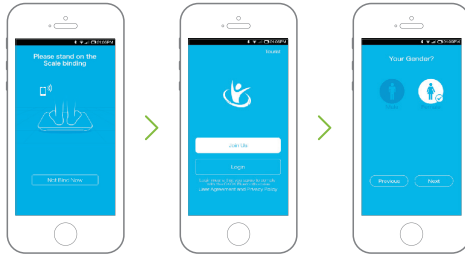

الخطوة ٥:

الوزن

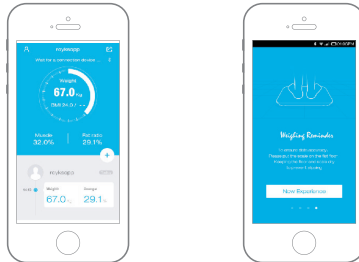


الخطوة ٦ عرض نتيجة الاختبار

ادخل إلى واجهة "اتجاه الوزن".
(الشاشة: عرض الوزن
وتفاصيل الاتجاه)



عرض تقرير الاختبار.
(الشاشة: عرض تقرير اختبار مفصل
يحتوي على الوزن، مؤشر كتلة الجسم
(BMI)، وبيانات صحية أخرى)

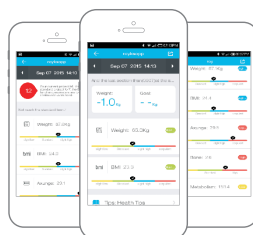

المواصفات

المادة	٦ ملم زجاج مقوى
البطارية	٣ فولت ٢*AAA (غير مشمول)
السعة	١٨٠-٥ كجم
أقسام القياس	٥٠ جرام
الوحدات	كجم/رطل /ستون
العرض	شاشة LCD بخمس خانات
البلوتوث اصدار	الاصدار ٥
درجة حرارة التشغيل	٥-٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	١٠- الى ٦٠ درجة مئوية
الإيقاف التلقائي	٢٠-٣٠ ثانية
وزن المنتج	١,١٥ كجم
أبعاد المنتج	٦٣,٠x٣٠,٠x٦٣ ملم

مقدمة التطبيق

١. الوزن الفوري

افتح تطبيق OKOK، وسيتم تذكيرك بتشغيل البلوتوث (11 - GWS). بعد تشغيل البلوتوث، سيتم الاقتران تلقائيًا. عند بدء المستخدم عملية الوزن، سيتم مزامنة بيانات الوزن مع التطبيق. إذا تم فصل الاتصال بالبلوتوث، فسيتم حفظ بيانات الوزن في ذاكرة الميزان، ثم تُزامن تلقائيًا عند إعادة الاتصال بالبلوتوث.

٢. إدخال بيانات الوزن يدويًا في التطبيق

يمكن للمستخدم إدخال بيانات الوزن يدويًا في التطبيق لتتبع الوزن.

٣. الوزن الحالي

تعرض واجهة الوزن الحالي معلومات الوزن الخاصة بالمستخدم وأفراد العائلة، وتولد تقريرًا وتقدم نصائح صحية استنادًا إلى القياسات. يشمل ذلك واجهة الوزن الحالي، قائمة الوزن، تقرير التاريخ، والإشعارات.

٤. اتجاه الوزن

يشمل تقرير أسبوعي، شهري، وفصلي، يُظهر تغيّرات الوزن عبر الرسوم البيانية. **ملاحظة:** لميزان قياس الدهون، هناك ٨ بيانات: الوزن، دهون الجسم، الدهون الحشوية، العضلات، العظام، معدل الأيض الأساسي (BMR)، العمر، ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

التحذيرات

١. يُرجى إبقاء الميزان بعيدًا عن الأرضيات الرطبة. لا تستخدم الميزان إذا كان الزجاج مبللًا لتجنب الانزلاق.

٢. يُرجى الوقوف في منتصف الميزان لتفادي الانقلاب.

٣. منصة الميزان مصنوعة من الزجاج، لذلك يُرجى تجنب الأجسام الحادة أو القاسية التي قد تخدش السطح. القوة الزائدة أو الصدمات المفاجئة أو السقوط غير المتوقع قد تكسر الزجاج وتؤدي إلى إصابة المستخدم.

٤. الميزان الذي يعمل بالبلوتوث غير مقاوم للماء. حافظ على جفاف البيئة المحيطة ولا تغمره في الماء.

٥. استخدم قطعة قماش ناعمة مع سوائل تنظيف معتدلة لتنظيف السطح. تجنب المذيبات العضوية أو المواد الكيميائية.

٦. عندما تكون البطاريات في حالة طاقة منخفضة، يُرجى إزالتها لتجنب تسرب السوائل التي قد تتسبب في تآكل الميزان.

ملاحظات

١. يُرجى الوقوف على الميزان في الاتجاه الصحيح.
٢. يُرجى الوقوف على الميزان لمدة لا تقل عن ١٠ ثوانٍ إذا كنت تقيس دهون الجسم.
٣. يُرجى التأكد من صحة بيانات الجنس والطول والوزن.



لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

يأتي هذا المنتج من **Green Lion** مع ضمان لمدة ١٢ شهرًا عند شرائه من موقعنا الإلكتروني أو من المتجر الرسمي أو من البائعين المعتمدين.

لتمديد الضمان، يرجى زيارة <https://www.greenlion.net/warranty> وملء النموذج مع تفاصيل المنتج الخاص بك. تأكد من رفع صورة واضحة للمنتج.

بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تفيد بتمديد ضمان منتجك.

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)