

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**  
**فرشاة أسنان كهربائية W-SONIC**


SKU: PDLFST905

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	منظر تخطيطي
٣	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	دليل الشحن
٤	دليل مؤشر البطارية
٤	دليل فرشاة الأسنان الكهربائية
٥	احتياطات السلامة
٧	المواد الخطرة في المنتج
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

صُممت فرشاة أسناننا الكهربائية لتوفير نهج علمي في مجال صحة الفم، يجمع بين أحدث التقنيات وحلول العناية الفعالة. تحظى هذه الفرشاة بتقدير وثقة عدد كبير من المستهلكين لأدائها المتفوق، حيث توفر تنظيفًا أعمق وأكثر شمولًا مقارنةً بالتنظيف التقليدي. وهي مصممة لتعزيز صحة اللثة، وتقليل تراكم البلاك، وتحسين نظافة الفم بشكل عام. مع أوضاع تنظيف متعددة وميزات متقدمة، صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات الأسنان المختلفة، مما يضمن تجربة مخصصة. لضمان الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي للمنتج، نوصي بشدة بقراءة التعليمات المفصلة للاستخدام والصيانة الصحيحة. سيساعدك هذا على تحقيق أقصى استفادة من فرشاة أسنانك الكهربائية، مما يضمن أن يكون روتين العناية بالفم الخاص بك فعالًا وفعالًا قدر الإمكان.

## منظر تخطيطي

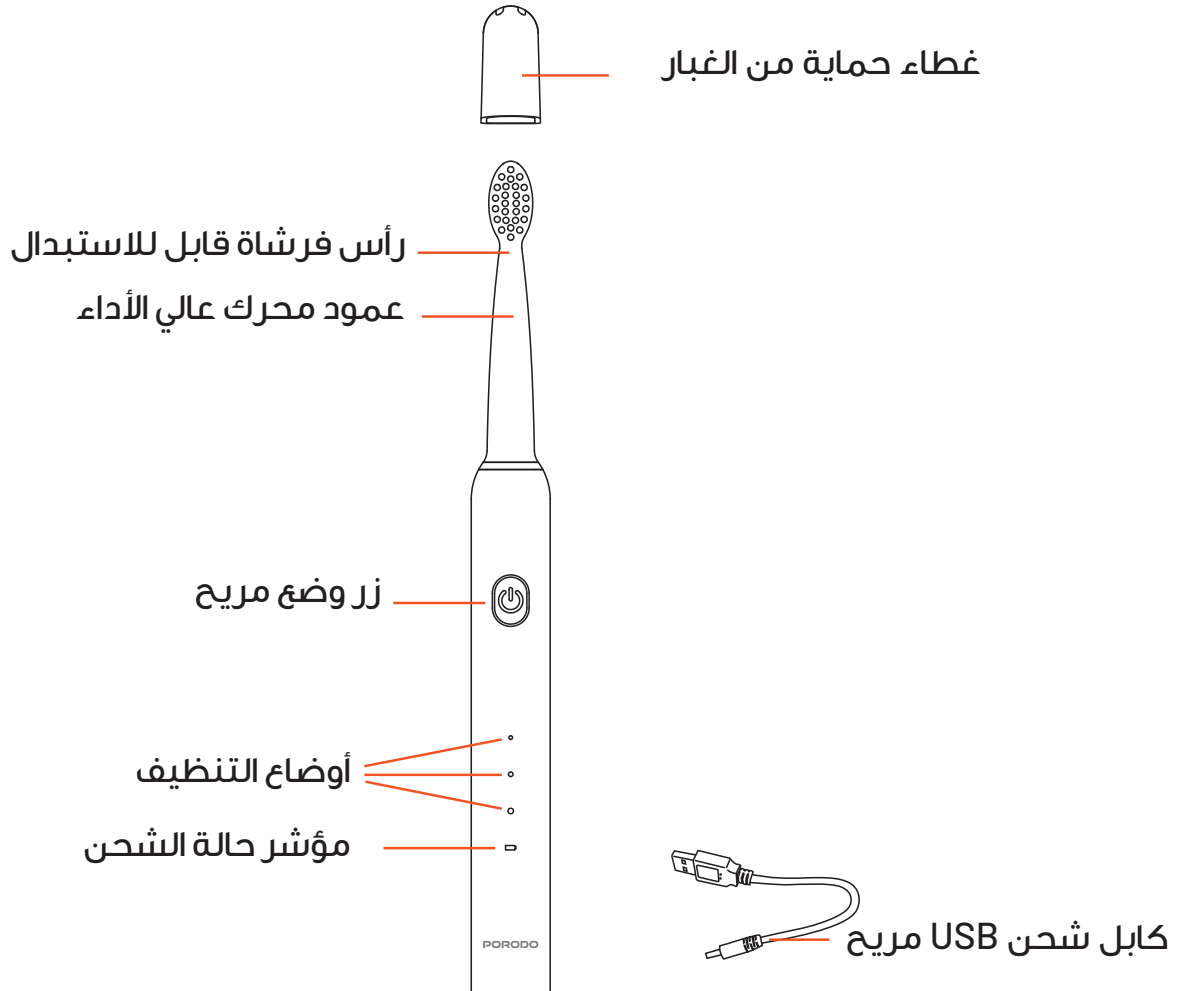

طاقة الإدخال	٥ فولت/١ أمبير
سعة البطارية	٥٠٠ ملي أمبير/ساعة
عمر البطارية	حتى ١٠ يوم
مدة الشحن	٣ ساعات
مستوى الضوضاء	<٥٥ ديسيبل
مقاومته للماء	IPX7
نوع منفذ الشحن	النوع-C
تردد الاهتزاز	١٩٠٠٠ ضربة/دقيقة
أبعاد المنتج	٢٢,٧ × ٢,١ سم
الوزن الصافي	٥١ غرام
معرف الطراز	LFS٩٠٥

## محتويات العبوة

١	فرشاة أسنان كهربائية قابلة لإعادة الشحن
٢	رؤوس فرشاة بديلة
١	دليل المستخدم
١	كابل شحن USB (من النوع C)

## دليل الشحن

١. قبل استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، تأكد من أن جهد مصدر الطاقة ومقبس الطاقة يعملان بشكل صحيح وضمن نطاق التشغيل الطبيعي. تأكد من توافق الجهد مع الجهاز لتجنب أي مخاطر كهربائية.
٢. قبل توصيل فرشاة الأسنان الكهربائية بمصدر الطاقة، تأكد من أن كابل USB جاف تمامًا. تأكد من خلو قابس الشحن من أي بقع ماء أو رطوبة أو تلف مادي. لا تقم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة إلا إذا كانت جميع مكوناته في حالة آمنة وسليمة.
٣. عند استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية لأول مرة، قم بتشغيلها للتحقق من عملها الأولي. إذا كان مستوى البطارية منخفضًا أو في حالة عدم وجود طاقة، اشحن بالكامل فرشاة أسنانك قبل الاستخدام الأول. هذا يضمن أداءً مثاليًا وعمرًا أطول للجهاز.

الوصف	١. حالة المؤشر أثناء الاستخدام
١. حالة البطارية	١.١ المؤشر مضاء
١.١ البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن	١.٢ المؤشر الأحمر مضاء
١.٢ البطارية ضعيفة جدًا (قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح)	١.٣ المؤشر غير مضاء
٢. حالة الشحن	٢. حالة المؤشر أثناء الشحن
٢.١ جاري الشحن	٢.١ المؤشر الأحمر مضاء
٢.٢ اكتمل الشحن	٢.٢ يتحول المؤشر من الأحمر إلى الأخضر


### ملاحظات:

١. راقب دائمًا مؤشر البطارية أثناء الاستخدام للتأكد من أن فرشاة الأسنان تحتوي على طاقة كافية للتشغيل الفعال.
٢. اشحن فرشاة الأسنان عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا للحفاظ على الأداء الأمثل.
٣. في حال عدم استخدام فرشاة الأسنان لفترة طويلة، يُنصح بشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام التالي. هذا يضمن معايرة البطارية بشكل صحيح ويساعد في الحفاظ على سلامتها.
٤. لضمان سلامة عملية الشحن وإطالة عمر المنتج، يُرجى اتباع تعليمات الشحن المرفقة. تُساهم عادات الشحن الصحيحة في إطالة عمر فرشاة الأسنان.

## دليل فرشاة الأسنان الكهربائية

١. عند انخفاض مستوى الطاقة ووميض مؤشر LED باللون الأحمر، يُرجى شحن فرشاة أسنانك. راجع تعليمات الشحن لمعرفة كيفية شحنها بشكل صحيح.
٢. ثبت رأس الفرشاة بالمقبض كما هو موضح في الرسم التخطيطي. يجب أن تكون هناك مسافة طفيفة بين رأس الفرشاة والمقبض، وهذا أمر طبيعي تمامًا.
٣. ضع كمية قليلة من معجون الأسنان على الشعيرات. تأكد من استخدام كمية مناسبة لا تُسبب رغوة زائدة.
٤. ضع رأس الفرشاة في فمك، مع التأكد من أن الشعيرات بزاوية ٤٥ درجة على اللثة. شغل فرشاة الأسنان باختيار وضع التنظيف المُفضّل لديك.

٥. حرّك فرشاة الأسنان برفق لأعلى ولأسفل، دون الضغط عليها بشدة أو فرك. اترك فرشاة الأسنان تقوم بالعمل وتجنب الحركات العنيفة للحصول على أفضل النتائج.
٦. بعد إطفاء فرشاة الأسنان، أخرجها من فمك لمنع تناثر رغوة معجون الأسنان. تأكد من إطفاء فرشاة الأسنان قبل إخراجها.
٧. بعد تنظيف أسنانك، اشطف رأس الفرشاة جيدًا بالماء لإزالة أي بقايا معجون أسنان.
٨. ضع فرشاة أسنانك في مكان جاف وجيد التهوية لضمان النظافة الصحية ومنع تراكم الرطوبة.

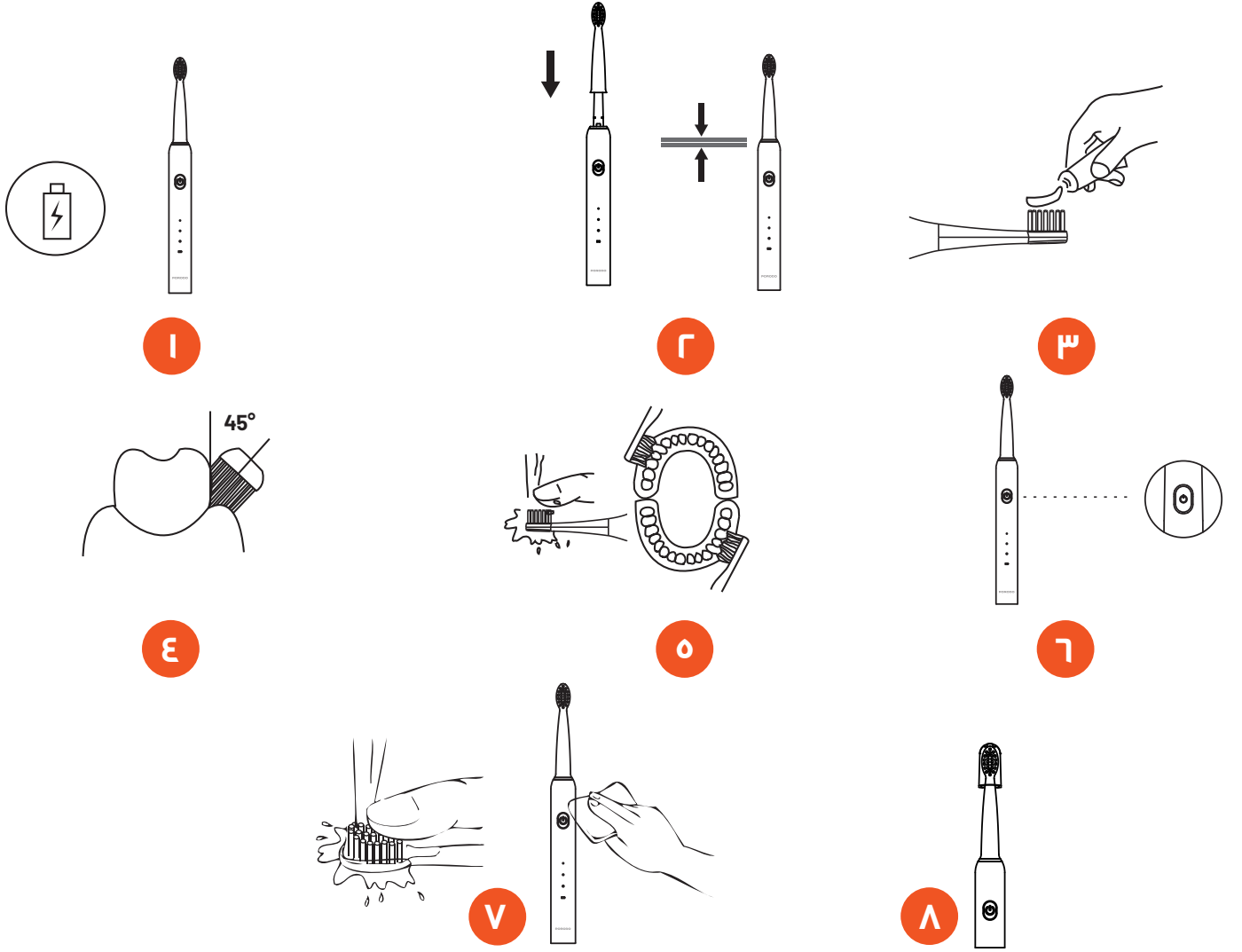

## احتياطات السلامة

١. استخدم رؤوس فرشاة الأسنان الموصى بها من قبل الشركة المصنعة فقط.
٢. لا تعرّض المنتج أبدًا للنار أو الحرارة الزائدة أو درجات الحرارة المرتفعة. لا تشحن المنتج أو تستخدمه في مثل هذه الظروف.

٣. لصحة فم مثالية، نظّف أسنانك بفرشاة أسنانك الكهربائية مرتين يوميًا على الأقل. تأكد من استبدال رأس الفرشاة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر للحفاظ على فعالية عملية التنظيف وضمان تنظيف شامل. كما يُساعد الاستبدال المنتظم لرأس الفرشاة على منع تراكم البكتيريا، مما يضمن تجربة تنظيف أسنان صحية وفعالة.
٤. تحتوي فرشاة الأسنان على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. تعامل معها بحرص واتبع إرشادات السلامة.
٥. أبقِ الشاحن بعيدًا عن أي مصادر للمياه. لا تضعه أو تخزنه فوق أو بالقرب من أي وعاء يحتوي على ماء، مثل حوض الاستحمام أو مغسلة أو حمام سباحة. لا تغمر الشاحن في الماء أو أي سائل آخر.
٦. استخدم دائمًا طراز الشاحن الأصلي للشحن لتجنب المخاطر المحتملة.
٧. أدر رأس الفرشاة لأسفل دائمًا عند تنظيفها لمنع دخول الماء إلى المقبض.
٨. بعد كل استخدام، نظّف الشعيرات ورأس الفرشاة، واتركها تجف بشكل طبيعي.
٩. تجنب شد الشعيرات، فقد يؤدي ذلك إلى تشوهها.
١٠. جفف مقبض فرشاة الأسنان بقطعة قماش جافة. لا تنقع فرشاة الأسنان في الماء لفترات طويلة. تجنب استخدام الماء أو سوائل التنظيف الحمضية التي تزيد درجة حرارتها عن ٤٠ درجة مئوية لتنظيف فرشاة الأسنان.



المواد الخطرة						المكونات والأجزاء
ثنائيات البروبيل إيثرات ثنائي الفينيل	ثنائيات البربروليوم البيسفينولية	الكروم السداسي	الزئبق	الكاديوم	الرصاص	
○	○	○	○	○	○	رأس الفرشاة والغطاء
○	○	○	○	○	X	لوحة الدوائر المطبوعة (PCBA)
○	○	○	○	○	X	البطارية
○	○	○	○	○	○	أجزاء أخرى

يتوافق هذا النموذج مع لوائح SJ/T11364-2014.

(o) يشير إلى أن محتوى المواد الخطرة في جميع المواد المتجانسة للأجزاء أقل من الحد المسموح به في GB/T 26572.

(x) يشير إلى أن محتوى المواد الخطرة في مادة واحدة على الأقل من المواد المتجانسة للأجزاء يتجاوز متطلبات الحد المسموح به في GB/T 26572.

المواد الخطرة المدرجة في الجدول موجودة في فرشاة الأسنان الكهربائية، ولكنها لن تضر بصحتك أو البيئة عند استخدامها على النحو المقصود. مع ذلك، تم حذف المعلومات المتعلقة بهذه المواد لمساعدة المستهلكين وخبراء إعادة التدوير على التخلص من المنتج بشكل صحيح عند عدم الحاجة إليه. هذا يضمن التخلص الآمن من المنتج بطريقة صديقة للبيئة.

## التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات. اتبع الخطوات التالية للتخلص السليم:

١. تأكد من تفريغ البطارية تمامًا، بحيث لا يمكن تشغيل فرشاة الأسنان. هذا يُساعد على منع المخاطر الكهربائية المحتملة أثناء التخلص.

٢. استخدم مفك براغي لفك الغطاء السفلي لفرشاة الأسنان، مع كشف المكونات الداخلية.

٣. اضغط برفق على عمود المحرك، ثم أزل الأجزاء الداخلية للجهاز بعناية.



٤. استخدم الأدوات المناسبة لفصل جميع أسلاك التوصيل، مع التأكد من فصل البطارية تمامًا. تخلص من البطارية والأسلاك بشكل منفصل لأنها مواد خطرة.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)