

porodo



Porodo

مساج القدمين قابل للطي

SKU: PD-LFFMG-GY

الميزات.....	٢
تعليمات السلامة.....	٣
سلامة بيئة التشغيل.....	٤
تحذير.....	٤
ملاحظات مهمة.....	٥
إرشادات الاستخدام.....	٧
مكونات المنتج.....	٧
صيانة المنتج.....	٨
استكشاف الأعطال.....	٩
المواصفات.....	٩
الضمان.....	٩
اتصل بنا.....	٩

شكرًا لاختيار مساج القدمين القابل للطي من Porodo LifeStyle. نوصي بشدة بقراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا الجهاز. من الضروري الانتباه إلى التدابير الأمنية المفصلة في الدليل لضمان التشغيل الصحيح واستخدام هذا الجهاز. يوفر الدليل تعليمات آمنة وفعالة. للرجوع إليها في المستقبل ، يرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

## الميزات

١. تقنية تدليك بالأكياس الهوائية لتغطية كاملة بزاوية ٣٦٠ درجة.
٢. تقنية الضغط والتدليك شياتسو مقترنة بتقنية الاهتزاز المتقدمة عالية التردد للقدمين.
٣. ضغط محمى بدرجة حرارة ٤٥ درجة باستخدام عناصر الألياف الكربونية لتوفير دفء ثابت وآمن.
٤. تحكم متغير في شدة الكتلة بثلاث سرعات مختلفة، يقدم أربع برامج تدليك مميزة.
٥. غطاء قماش قابل للفصل والغسل في الغسالة لسهولة الصيانة.

## تعليمات السلامة

١. لضمان الاستخدام الآمن والصحيح لهذا المنتج، من الضروري أن تستعرض دليل التعليمات بدقة قبل التشغيل.
٢. ينبغي على الأفراد، بما في ذلك القاصرين، الذين يعانون من إعاقات أو حالات صحية نفسية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والفهم الكافي، التمتع بالامتناع عن استخدام هذا المنتج ما لم يتم توجيههم أو إشرافهم من قبل مربى أو مشرف.
٣. هذا المنتج ليس مخصصًا لاستخدام اللعبة؛ ينصح باليقظة الوالدية لمنع الأطفال من معاملته كلعبة.
٤. يحتوي هذا المنتج على عنصر تسخين. يرجى الانتباه إلى أن سطحه يمكن أن يصبح شديد الحرارة. ينبغي على الأشخاص الحساسين للحرارة ممارسة الحذر الشديد.
٥. في حالة وجود أي أضرار مرئية أو ارتداء على سلك الطاقة، من الضروري الاتصال بالشركة المصنعة أو خدمة إصلاح محترفة للحصول على استبدال.
٦. لتجنب الأضرار المحتملة، يجب الابتعاد عن الأدوات الحادة. في حالة ملاحظة أي أضرار على غطاء القماش أو المنتج، يجب التوقف عن الاستخدام فورًا وإرجاعه إلى الموزع أو مركز صيانة للخدمة أو الاستبدال.

٧. قم دائماً بفصل هذا الجهاز عن مصدر الطاقة بعد الاستخدام وقبل بدء أي إجراءات تنظيف.
٨. تجنب تغطية الجهاز أثناء الاستخدام لمنع السخونة الزائدة التي قد تؤدي إلى خلل أو تلف في الجهاز.
٩. في حالة الشعور بأي شعور غير مريح غير عادي أثناء استخدام المساج، يجب التوقف عن الاستخدام فوراً.
١٠. في حالة حدوث أي عطل، اتصل على الفور بمركز الخدمة للفحص والإصلاح الضروري.
١١. امتنع عن استخدام أجزاء أو مكونات لم يتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة لدينا.
١٢. لا تدخل أي أجسام في فتحات هذا المنتج.
١٣. للحيلولة دون خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تشغل هذا الجهاز بيدين رطبة أو مبللة.
١٤. تأكد من أن لوحة التحكم تبقى جافة ولا تتعرض لأي سوائل.
١٥. لفصل الجهاز بأمان، أوقف جميع وظائف الجهاز أولاً ثم قم بفصل القابس من المقبس الكهربائي.
١٦. هذا المنتج ليس مصمماً للتشخيص الذاتي أو كبديل للعلاج الطبي. للحالات الطبية، استشر متخصص صحي مؤهل.

## سلامة بيئة التشغيل

١. تجنب تشغيل هذا المنتج في بيئات غنية بالرطوبة مثل الحمامات أو المناطق القريبة من الماء لتجنب الأعطال التي قد تؤدي إلى إصابات شخصية.
٢. امتنع عن استخدام هذا المنتج في درجات حرارة تتجاوز ٤٠ درجة مئوية، وكذلك بالقرب من مدافئ كهربائية أو مواقد.
٣. لا تستخدم الجهاز في ظروف يكون فيها الحرارة أقل من ٥ درجات مئوية، لتجنب تكثف الزيت الذي قد يؤدي إلى تلف كبير وتقليل عمر الوحدة.
٤. لا يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في الهواء الطلق أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يمكن أن تتسبب هذه الظروف في تلف الطلاء الخارجي.
٥. إذا تم نقل المساج من مكان بارد إلى مكان دافئ، قد يتكثف الرطوبة على المكونات المعدنية الداخلية، مما يؤدي إلى اضطراب الوظيفة أو التلف. يُوصى بترك المساج ليبرد في غرفة في درجة حرارة عادية لمدة ساعة قبل التشغيل.



١. ينبغي على الأفراد الذين يتلقون حاليًا علاجًا طبيًا أو يعانون من أمراض عامة أن يطلبوا النصيحة الطبية قبل استخدام هذا المنتج.
٢. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من تشخيص ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، تصلب الشرايين الدماغية، أو تجلط الدم في المخ بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية قبل الاستخدام.
٣. يُوصى بالتشاور مع الطبيب للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالأورام الخبيثة.
٤. يجب على النساء الحوامل أو اللواتي يعانين من الحيض مناقشة استخدام هذا المنتج مع طبيبهن.
٥. ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام طلب المشورة الطبية قبل استخدام هذا الجهاز.
٦. يجب على الأشخاص الذين يحملون جهاز تنظيم ضربات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية المزروعة استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل الاستخدام.
٧. ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من الأمراض الحادة استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج.

## ملاحظات مهمة

١. تجنب النوم أثناء تشغيل هذا الجهاز.
٢. امتنع عن استخدام هذا الجهاز إذا كنت تحت تأثير الكحول أو إذا كنت لا تتمتع بصحة جيدة.
٣. قم بتقييد استخدام المساج لمدة لا تتجاوز ٣٠ دقيقة في كل مرة وامتنع عن تسخين قدميك لأكثر من ساعتين في جلسة واحدة.
٤. لا تستخدم الجهاز إذا كان غطاء القماش يظهر علامات الاهتراء.
٥. للحصول على أفضل النتائج ولتجنب الآثار السلبية، لا تستخدم هذا الجهاز في غضون ساعة قبل تناول الطعام أو بعد تناول الطعام بساعة.
٦. إذا تم نقل المساج من بيئة باردة إلى بيئة دافئة، قد يتكون تكثيف على المكونات الداخلية، مما قد يؤثر على العمل أو يتسبب في تلف المحرك. لتجنب ذلك، من المفضل أن تترك المساج يتكيف مع درجة حرارة الغرفة العادية لمدة ساعة قبل تشغيله.

## ١. أزرار التشغيل

### زر التشغيل:



قم بتشغيل المساج عن طريق الضغط على زر التشغيل على لوحة التحكم مرة واحدة. سيبدأ الجهاز في العمل تلقائيًا.

### زر التسخين:



قم بتفعيل أو تعطيل وظيفة التسخين عن طريق الضغط على زر التسخين.

### زر الشدة:



حدد الموجة الهوائية المطلوبة للمساج عن طريق الضغط على زر الشدة. ستتنقل الإشارة الضوئية بين اللون الأزرق، والأزرق-الأحمر، والأحمر للإشارة إلى مستويات الشدة المختلفة (ضعيفة، متوسطة، أو قوية). لإلغاء تفعيل هذه الميزة، اضغط واستمر في الضغط على زر الشدة لمدة ثانية واحدة.

### زر لياقة القدم:



قم بتشغيل أو إيقاف وظيفة مساج القدم عن طريق الضغط على زر لياقة القدم. الضغط والاحتفاظ بالضغط على الزر لمدة ثانية يحول الجهاز إلى وضع مساج هوائي ناعم.

### زر الاهتزاز:



استخدم زر الاهتزاز لاختيار شدة الاهتزاز المفضلة للمساج الخاص بك. ستعرض الإشارة الضوئية وميضًا تسلسليًا من الأزرق، والأحمر، والأزرق-الأحمر للدلالة على مستويات الاهتزاز المختلفة (ضعيفة، متوسطة، أو قوية). الضغط والاحتفاظ بالضغط على زر الاهتزاز لمدة ثانية يعطل هذه الميزة.

### زر مساج الساق:




قم بتشغيل مساج الساق عن طريق الضغط على زر مساج الساق، الذي يقوم بتفعيل أو إيقاف وظيفة مساج الساق. الضغط والاحتفاظ بالضغط على هذا الزر لمدة ثانية يوقف المساج ويغير الوضع إلى وضع مساج هوائي ناعم.

**ملاحظة:** هذه الوظيفة غير نشطة عندما يتم إغلاق الغطاء المنقول.


## ٢. تعليمات الاستخدام

١. ضع المساج على سطح نظيف ومستوي، مع التأكد من ثبات غطاء القدم.
٢. قم بتوصيل كابل الطاقة بمقبس كهربائي بجهد ٢٢٠ فولت - ٦٠/٥٠ هرتز. سيتم إضاءة زر التشغيل، مما يشير إلى وضع الجهاز في وضع الاستعداد. يمكنك بعد ذلك الجلوس بشكل مريح خلف المساج وإدخال قدميك في غطاء القدم.
- ملاحظة:** لا تشغل المساج أثناء الوقوف.
٣. يمكن فتح أو غلق الغطاء حسب تفضيلك. عندما يكون الغطاء مغلقًا، يمكنك تدليك قدميك، وعندما يكون مفتوحًا، يمكن تدليك القدمين والساقين معًا.
٤. لا يمكن الوصول إلى لوحة التشغيل على الشاشة العلوية عند إغلاق الغطاء، وعلى العكس، لا يمكن استخدام اللوحة على الشاشة السفلية عندما يكون الغطاء مفتوحًا.
٥. لضبط غطاء القلب أثناء استخدام المساج، اضغط أولاً على زر التشغيل لإيقاف التشغيل. يمكنك بعد ذلك فتح أو غلق الغطاء.
٦. لإعادة تشغيل المساج، اضغط مرة أخرى على زر التشغيل أو انتظر حتى ينتهي المؤقت المحدد مسبقًا، بعد ذلك سيعود المساج إلى وضع الاستعداد مع تنشيط مؤشر الطاقة.

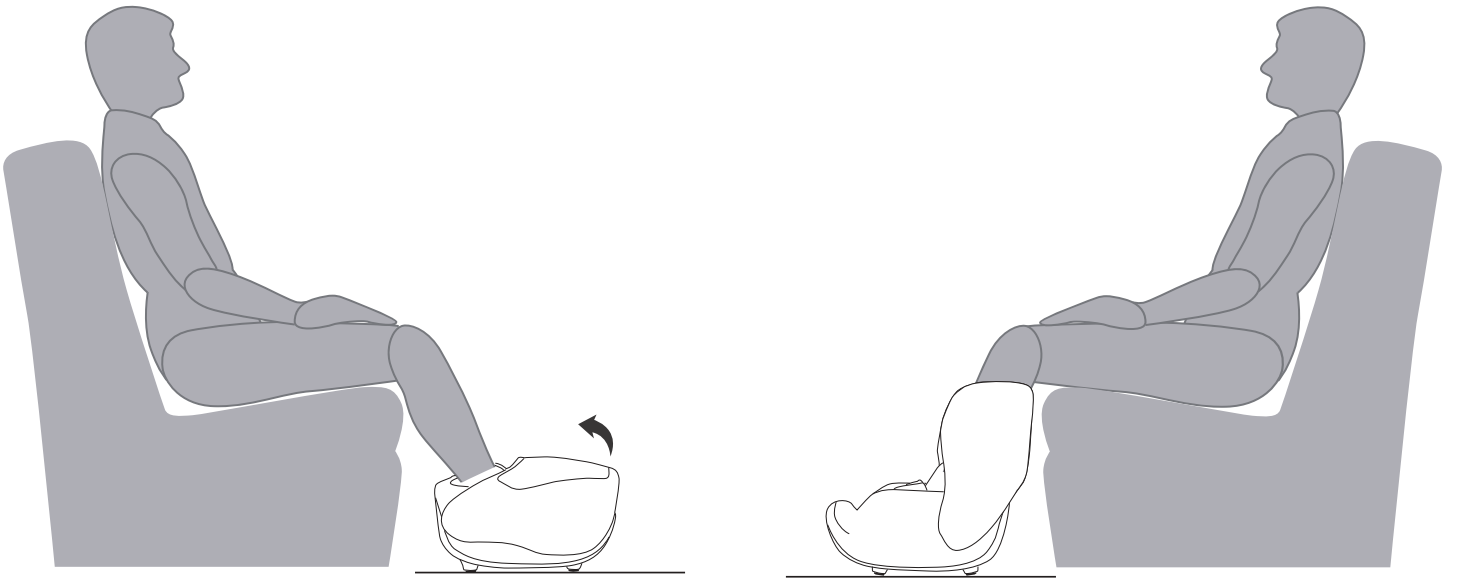



لوحة التحكم باللمس

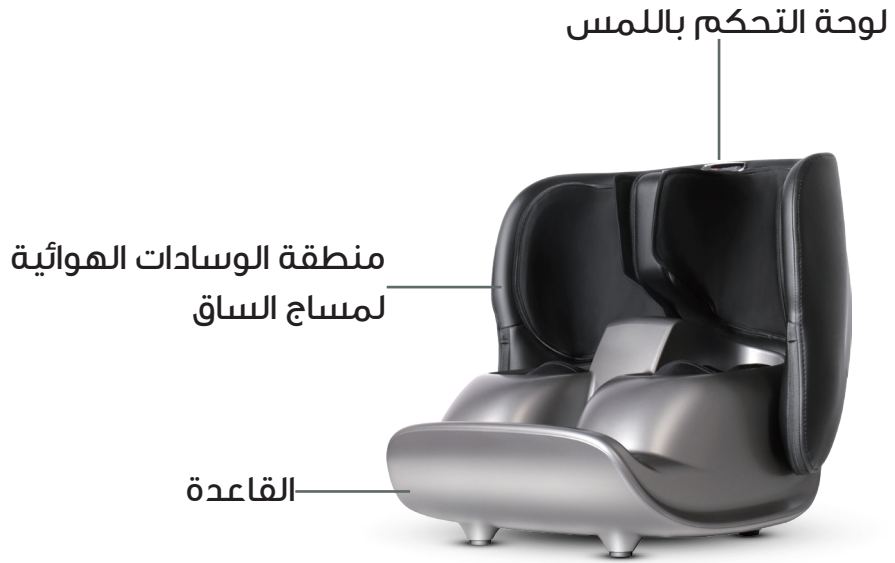

لوحة التحكم باللمس

## صيانة المنتج

### A. التخزين

١. عند عدم التشغيل، قم بتخزين المنتج في عبوته الأصلية وضع الصندوق في مكان جاف ومهوى وبارد.
٢. تجنب الانحناء أو لف كبل الطاقة.
٣. من المهم عدم استخدام كبل الطاقة كوسيلة لتعليق أو تعليق المساج.
٤. لتجنب تشويه سطح الجهاز، ابقه بعيدًا عن أي أدوات حادة.

٥. تجنب وضع الجهاز في مناطق معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية لفترات طويلة.

## B. التنظيف

١. قبل التنظيف، تأكد من فصل الطاقة وإزالة القابس.
٢. تجنب استخدام المنظفات التآكلية مثل البنزين أو المذيبات على هذا المنتج.

## C. الصيانة

١. حافظ على نظافة الجهاز وقم بتخزينه بعيدًا عن المناطق ذات الرطوبة العالية.
٢. عند عدم استخدامه لفترات طويلة، افكر في استخدام غطاء ضد الغبار لحماية المنتج من تراكم الغبار.



هذا الجهاز مجهز بميزة الحماية من الحرارة الزائدة المدمجة. إذا تجاوزت درجة الحرارة الحد الآمن، سيتوقف الجهاز تلقائيًا عن العمل. قبل الاستخدام، قم بفصل الجهاز واتركه ليبرد بشكل طبيعي.

## استكشاف الأعطال

يرجى قراءة الإرشادات والحلول التالية إذا واجه الجهاز مشكلة. إذا استمرت المشكلة، يرجى زيارة مركز الخدمة أو فني موثوق لإجراء فحص شامل وإصلاح.

المشكلة	الاسباب المحتملة	الحلول
الجهاز لا يعمل.	١. الجهاز غير متصل بمصدر طاقة. ٢. لا يتم الضغط على زر الطاقة.	١. تأكد من توصيل مصدر الطاقة بشكل صحيح أو التحقق من توصيله. ٢. ابدأ بالضغط على زر الطاقة.
توقف التشغيل فجأة.	١. انقطاع التيار الكهربائي. ٢. كان المدلك يعمل لأكثر من ٥ دقائق. ٣. درجة حرارة الجهاز مرتفعة وتم تمكين وضع الحماية من الحرارة. ٤. تعرضت كرة التدليك لضغط عالٍ وعُلقت.	١. تأكد من توصيل الجهاز بمصدر الطاقة. ٢. أعد البدء بالضغط على زر الطاقة. ٣. أعد تشغيل المنتج بمجرد أن يبرد. ٤. قم بتخفيف الضغط على الجهاز عن طريق تخفيف التوتر في قدميك.

المنتج	مساج القدمين قابل للطي
SKU	PD-LFFMG-GY
الوزن الصافي	١١,٥ كجم
الفولطية المقدرة	٢٤ فولت ٣ أمبير
الطاقة المقدرة	٥٥ واط
مدة العملية	٣٠ دقيقة

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**