

porodo



Porodo

LifeStyle جهاز تدليك الرقبة والظهر

SKU: PD-LSNBMS-DKGY

المميزات	٢
احتياطات السلامة	٢
عرض تخطيطي	٤
تعليمات الاستخدام	٥
جهاز التحكم عن بعد	٥
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٧
صيانة المنتج	٧
المواصفات	٨
الضمان	٩
اتصل بنا	٩

نحن نقدر قرارك باختيار منتجنا الذي يلبي متطلبات الرعاية الصحية الخاصة بك. يخضع كل عرض من عروضنا لاختبارات صارمة للتأكد من أنها آمنة ويمكن الاعتماد عليها للاستخدام الشخصي. للحصول على فهم شامل للاستخدام السليم وتشغيل المنتج، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم بدقة.

المميزات

١. تتميز بـ ٨ وسادة هوائية مرنة لتخفيف الضغط المستهدف والمحدد.
٢. يوفر تغطية تدليك شاملة للرقبة والكتفين والخصر والظهر والساقين، مما يوفر تجربة تدليك لطيفة لكامل الجسم.
٣. يشتمل على ضغط حراري بمستويين، مما يوفر تخفيف التوتر بتأثير مزدوج لكل من منطقة الرقبة والخصر.
٤. يأتي مع ارتفاع رقبة قابل للتعديل لتلبية تفضيلات الراحة الفردية.
٥. يوفر ثلاثة مستويات كثافة وستة أوضاع ذكية لتدليك قابل للتخصيص، مع أدوات تحكم يدوية ذكية.
٦. مصممة بمواد ناعمة قابلة للطي لسهولة التخزين، مما يجعلها أداة استرخاء موفرة للمساحة.
٧. كرسي التدليك هذا مناسب بشكل مثالي للاستخدام في المنزل أو في المكتب.

احتياطات السلامة

١. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية استشارة الطبيب قبل استخدام المنتج: أولئك الذين يستخدمون جهازاً إلكترونياً طبياً مزروعاً في الجسم، مثل جهاز تنظيم ضربات القلب.
- المصابون بأمراض القلب.
- أولئك الذين يعانون من إصابة أو مرض في العمود الفقري.
- أولئك الذين يعانون من هشاشة أو مشاكل في العظام، خاصة فيما يتعلق بالعمود الفقري، أو في أعقاب الجراحة مباشرة.
- أولئك الذين هم في مرحلة التعافي بعد العملية الجراحية.
- الأفراد الحوامل، أو الذين هم في فترة ما بعد الولادة، أو أثناء فترة الحيض.
- أولئك الذين يكافحون الأورام الخبيثة.
- أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بهشاشة العظام.

• أولئك الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو تجلط الدم.
• أولئك الذين يعانون من التهابات الجلد أو الأمراض.
• أولئك الذين يخضعون للعلاج الطبي أو الذين يعانون من أي تشوهات جسدية سابقة أو حالية.
• أولئك الذين يعانون من تشوهات أو تشوهات في الأطراف أو العمود الفقري.
• أولئك الذين يعانون من مشاكل في العمود الفقري أو إصابات بسبب المرض أو الحوادث.
• من يعانون من اضطرابات حسية، أو اضطرابات الدورة الدموية الطرفية المتقدمة، أو مرض السكري.

٢. منع دخول الماء أو تناثره على سطح المنتج.

٣. لا يختلط الماء والكهرباء - تجنب تعريض المنتج لبيئات رطبة مثل الحمامات أو غرف الاستحمام أو بالقرب من حمامات السباحة.

٤. قبل التوصيل بمصدر الطاقة، تأكد من أن جهد المنتج يتطابق مع جهد مصدر الطاقة.

٥. لا تستخدم المنتج في حالة تلف القابس أو السلك أو المنتج نفسه.

٦. لتجنب حدوث صدمة كهربائية، امتنع عن فتح الغلاف الخارجي للمنتج.

٧. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد ذوي الإعاقة، أو الإعاقات الحسية، أو الإعاقات العقلية (بما في ذلك الأطفال) دون إشراف أو توجيه من الأفراد المسؤولين.

٨. لا تحاول إصلاح المنتجات أو الأسلاك التالفة بنفسك؛ اطلب المساعدة من المختص أو الفني لدينا لتجنب تعريض نفسك للخطر. وإلا فإن ضمان المنتج سيكون لاغياً.

٩. أبقِ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال وتأكد من عدم الخلط بينه وبين لعبة. الإشراف ضروري.

١٠. إذا سمعت أصواتاً غير عادية من المنتج، قم بإيقاف تشغيله وافصل الطاقة على الفور.

١١. لا تستخدم المنتج في حالة تلف الغطاء أو في حالة وجود مشكلة ميكانيكية أو إلكترونية. تواصل معنا للحصول على الدعم.

١٢. اتبع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا عند استخدام المنتج أو وضعه.

١٣. تجنب استخدام المنتج في بيئات ذات درجة حرارة عالية أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل السخانات أو المواقد.

١٤. لا تضعي كريم طبي أو تجميلي على المنتج أو جسمك قبل أو أثناء استخدامه.

١٥. عند التدليك حول الرقبة أو بالقرب منها، انتبه إلى الحركات الدوارة وتجنب الشدة المفرطة.

١٦. لا تقم بإتلاف سلك الطاقة أو ثنيه أو تمديده أو لفه أو ربطه حيث قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

١٧. تجنب استخدام المنتج مباشرة على الجلد العاري.

١٨. وقت الاستخدام الموصى به للأفراد هو ١٥ دقيقة في المرة الواحدة.

١٩. قم بإزالة جميع الملحقات من الجسم قبل استخدام المنتج.

٢٠. الامتناع عن استخدام المنتج أثناء النوم أو تحت تأثير الكحول أو أثناء الحمى.

٢١. انتظر لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل استخدام المنتج.

٢٢. إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب فوراً.

ملاحظة: يلتزم منتجنا بجميع المعايير المتعلقة بالمجالات الكهرومغناطيسية (EMF). عند التعامل معه بشكل صحيح واتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، يكون المنتج آمناً للاستخدام.

العرض التخطيطي



١. ضع المنتج على كرسي أو أريكة ذات مسند للظهر.

٢. أدخل القابس الرئيسي في مقبس الحائط.

٣. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (⏻) ثم اختر وضع التدليك المطلوب.

ملاحظة: تم ضبط المؤقت التلقائي على ١٥ دقيقة. بعد ذلك، يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

٤. تذكر دائمًا فصل قابس طاقة التيار المتردد بعد الاستخدام.

جهاز التحكم عن بعد

١. (⬆️ ⬆️) التدليك الموضعي على الرقبة (أعلى / أسفل):

A. لأعلى: اضغط مع الاستمرار على الزر العلوي (⬆️) لرفع آلية تدليك الرقبة إلى الارتفاع المفضل لديك. حرر الزر لإيقاف التعديل.

B. للأسفل: اضغط مع الاستمرار على الزر السفلي (⬇️) لخفض آلية تدليك الرقبة إلى المستوى المطلوب. حررها للتوقف.

٢. (⌚) التدليك بالعجن اليدوي على الرقبة:


قم بتنشيط تدليك العجن بحركة في اتجاه عقارب الساعة بالضغط على زر العجن (⌚) مرة واحدة، وهو ما تتم الإشارة إليه بضوء ثابت. اضغط مرة أخرى للتبديل إلى اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة، مع وميض الضوء للإشارة إلى التغيير. الضغطة الثالثة ستؤدي إلى إيقاف تدليك الرقبة، مع خروج الضوء ليشير إلى توقفه.

٣. (⌚) زر العجن التلقائي على الرقبة:

اضغط على زر العجن التلقائي (⌚) لبدء تدليك العجن التلقائي. سيتم تشغيل الضوء للإشارة إلى التنشيط. ستقوم الآلية بتغيير اتجاه الدوران كل دقيقة. لإيقاف التدليك، اضغط على الزر مرة أخرى، مما يطفئ الضوء.

٤. (👤 👤 👤) مساج شياتسو على الظهر (كامل / علوي / سفلي):

اختر من بين مناطق التدليك الثلاثة المعدة مسبقًا - كاملة أو علوية أو سفلية - عن طريق الضغط على أزرار شياتسو المقابلة (👤 👤 👤). اضغط على الزر المرتبط بالمنطقة التي اخترتها لبدء التدليك، مع إضاءة الضوء للإشارة إلى الاختيار. لإيقاف تشغيل إعداد التدليك النشط، اضغط على الزر الآخر، مما سيؤدي إلى إيقاف تشغيل الضوء.

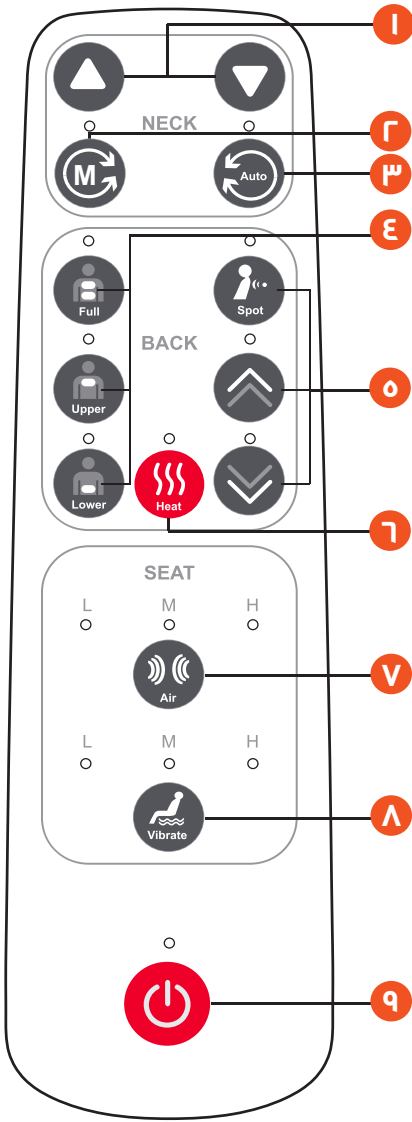

٥. () () () تدليك موضعي على الظهر (بقعة / أعلى / أسفل):

قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية التدليك الموضعي أثناء تدليك الظهر بتقنية شياتسو بالضغط على زر البقعة (). لضبط موضع آلية التدليك، استخدم الزر لأعلى / لأسفل ()؛ سيومض المؤشر المقابل ليعكس اتجاه الحركة.

٦. () العلاج الحراري على الظهر:

يصبح زر التسخين () قيد التشغيل عندما تكون وظيفة تدليك الظهر نشطة. اضغط عليه مرة واحدة لبدء العلاج الحراري، وهو ما يشير إليه تشغيل الضوء. ستؤدي الضغطة اللاحقة إلى إيقاف العلاج الحراري، مع إيقاف تشغيل ضوء المؤشر للإشارة إلى إلغاء تنشيطه.

٧. () التدليك الهوائي:

اختر من بين ثلاثة مستويات لكثافة التدليك بضغط الهواء – منخفض، أو متوسط، أو مرتفع – الهوائي (). الإعداد الافتراضي هو منخفض، ويشار إليه بمؤشر مضاء. اضغط مرة واحدة لزيادة الكثافة إلى متوسطة، ومرة أخرى لزيادة الكثافة. لإيقاف تشغيل التدليك الهوائي، اضغط على الزر مرة رابعة، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل ضوء المؤشر.

٨. () اهتزاز المقعد:

للاختيار من بين ثلاثة مستويات لشدة التدليك بالاهتزاز – منخفض أو متوسط أو مرتفع – اضغط على زر الاهتزاز (). الضغطة الأولية تضبط الوظيفة على كثافة منخفضة، ويشار إليها بضوء مضاء. اضغط مرة أخرى لرفع الكثافة إلى متوسطة، ومرة أخرى للوصول إلى عالية. لإيقاف الاهتزاز، اضغط على الزر مرة رابعة، مما سيؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل ضوء المؤشر.

٩. () زر التشغيل / الإيقاف:

قم بتنشيط زر التشغيل / الإيقاف () لوضع المنتج في وضع الاستعداد؛ تتم الإشارة إلى ذلك من خلال تشغيل ضوء المؤشر. اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل المنتج بالكامل، وهو ما سيتم الإشارة إليه من خلال إيقاف تشغيل الضوء.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يقدم هذا القسم نظرة عامة على المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها. إذا لم تحل المعلومات المقدمة هنا مشكلتك، فيرجى التواصل معنا على الفور للحصول على المساعدة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المنتج لا يعمل	المنتج غير متصل بشكل صحيح بمصدر الطاقة.	تأكد من أن جهد المنتج متوافق مع مصدر الكهرباء المحلي الخاص بك قبل إعادة التوصيل.
	أكمل المنتج جلسة المؤقت التلقائي التي مدتها ١٥ دقيقة ودخل في وضع الاستعداد بشكل افتراضي.	لبدء جلسة جديدة، أعد تنشيط المنتج باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف، ثم قم بتشغيل مفتاح الوظيفة ذي الصلة.
	تم استخدام المنتج لأكثر من ٣٠ دقيقة، مما أدى إلى تفعيل ميزة الحماية من الحرارة الزائدة المدمجة فيه.	افصل المنتج واتركه لمدة ٦٠ دقيقة حتى يبرد قبل استخدامه لاحقًا.
	تعرض المنتج لحمل يتجاوز قدرته التشغيلية.	قم بتقليل الحمل على المنتج قبل استئناف التشغيل.
	قد يتعرض المنتج للتآكل بسبب الاستخدام المتكرر.	اترك المنتج ليبرد قبل إعادة استخدامه.
هناك ضوضاء مسموعة تنبعث من المنتج	تصدر ضوضاء التشغيل من المكونات الميكانيكية داخل المنتج.	تعتبر ضوضاء التشغيل نموذجية أثناء الاستخدام ولا تشير إلى وجود خلل.

صيانة المنتج

A. التنظيف

١. تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو المنظفات الكاشطة أو السوائل المسببة للتآكل (مثل البنزين أو الأسيتون أو الكحول) لتنظيف المنتج.
٢. افصل القابس من مأخذ الطاقة.
٣. استخدم قطعة قماش جافة لمسح المنتج وجهاز التحكم عن بعد وسلك الطاقة.
٤. لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو منظف.

١. افصل القابس من مأخذ الطاقة.
٢. قم بتخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس.
٣. تجنب وضع الأشياء الثقيلة على المنتج.

المواصفات

اسم المنتج	جهاز تدليك الرقبة والظهر من Porodo LifeStyle
رمز التخزين التعريفي	PD-LSNBMS-DKGY
نوع	مدلك الرقبة والظهر
الجهد المقنن	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة	٦٠ واط
الموقت التلقائي	١٥ دقيقة
البعد (مطوية)	٧٨٥ (ارتفاع) × ٢٣٠ (عرض) × ٤٥٠ (طول) مم (±٥ مم)
البعد (غير مطوية)	٧٨٥ (ارتفاع) × ٤٨٠ (عرض) × ٤٥٠ (طول) مم (±٥ مم)
أبعاد الصندوق	٤٩٠ (ارتفاع) × ٢٣٥ (عرض) × ٨١٠ (طول) ملم
الوزن الصافي/الإجمالي	تقريباً. ٧,٦/٩,٥ كجم (±٠,٥ كجم)
شهادات السلامة	CE, GB٤٧٠.٦,١-٢٠٠٥, GB٤٧٠.٦,١-٢٠٠٨

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: **Porodo**