

porodo



Porodo LifeStyle

مسدس تدليك صغير بأربعة رؤوس

SKU: PD-LSMSGN

٢	الأهداف الرئيسية
٢	التحذيرات
٣	تخطيطيا
٣	المواصفات
٤	وظائف رأس التدليك
٤	استبدال رأس التدليك
٤	دليل العمليه
٥	إرشادات الشحن
٥	التعليمات
٦	إرشادات الصيانة
٦	الحماية البيئية
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

لتقليل مخاطر حدوث عطل أو صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق أو وفاة أو تلف المعدات، من المهم قراءة جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل بعناية.

الاهداف الرئيسية

تم تصميم هذا الجهاز في المقام الأول لتخفيف آلام العضلات، وتعزيز الدورة الدموية، وتخفيف تصلب عنق الرحم.

تحذيرات

المحظورات

1. يُحظر بشدة استخدام القُصْر لهذا المنتج لأنه ليس لعبة.
2. في حالة سقوط المنتج عن طريق الخطأ في الماء، يرجى ترتيب فحصه فوراً.
3. تجنب وضع المنتج بالقرب من مصدر حرارة أو تعريضه للنار.
4. الامتناع عن استخدام المنتج حول الرأس، الرقبة، القلب، والأعضاء التناسلية.
5. استخدم المنتج فقط على الأنسجة اللينة من الجسم؛ تجنب استخدامه على العظام.
6. استخدم الشواحن الأصلية فقط للشحن لتجنب خطر نشوب حريق.
7. يُحظر إسقاط المنتج عن قصد.
8. لا تقم بإزالة البراغي أو محاولة تفكيك المنتج.
9. يُحظر استخدام الجهاز كبديل للعلاج الطبي؛ يجب دائماً استشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز.

10. تجنب وضع الأصابع، الشعر، أو أي جزء من أجزاء الجسم بالقرب من العمود والجزء الخلفي من رأس التدليك لمنع حدوث قرص.

عند تشغيل الجهاز بدون رأس التدليك المثبت،
تجنب لمس هذه المنطقة.

عند تثبيت رأس التدليك وتشغيل الجهاز، تجنب
لمس هذه المنطقة.





المواصفات

اسم المنتج	مسدس تدليك صغير بأربعة رؤوس
رمز المنتج	PD-LSMSGN
نوع الواجهة	النوع C
مدخل الشحن	٥ واط = ٢ أمبير
ضربة التدليك	٦ ملم
سعة البطارية	١٥٠٠ مللي أمبير في ساعة
عدد التروس	٦
طريقة الزر	المس الزر
وزن الوحدة	~ ٤٣٣ جرامًا (برأس على شكل حرف T)
الحجم	١٤٩ × ١١٧ × ٥٤ مم
بيئة التشغيل	٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
المعيار التنفيذي	GB٤٧.٦.١-٢٠٠٨ و GB٤٧.٦.١-٢٠٠٥


وظائف رأس التدليك



رأس على شكل U: مصمم لتدليك العمود الفقري، مما يوفر تحفيزاً مكثفاً.	رأس نصف كروي: يُستخدم بشكل أساسي للعضلات في الساقين والأرداف.	رأس على شكل T: مثالي للاسترخاء في المجموعات العضلية الكبيرة، يقدم تحفيزاً قوياً.	رأس بشكل رصاصة: يستهدف المفاصل العميقة للاسترخاء الشامل.
---	--	---	---

استبدال رأس التدليك

١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
٢. أدخل رأس التدليك بعناية في أسطوانة مسدس التدليك.
٣. قم بمحاذاة موضع الخط الأحمر لرأس التدليك مع موضع الخط الأحمر المقابل على الجهاز، كما هو موضح في الشكل.

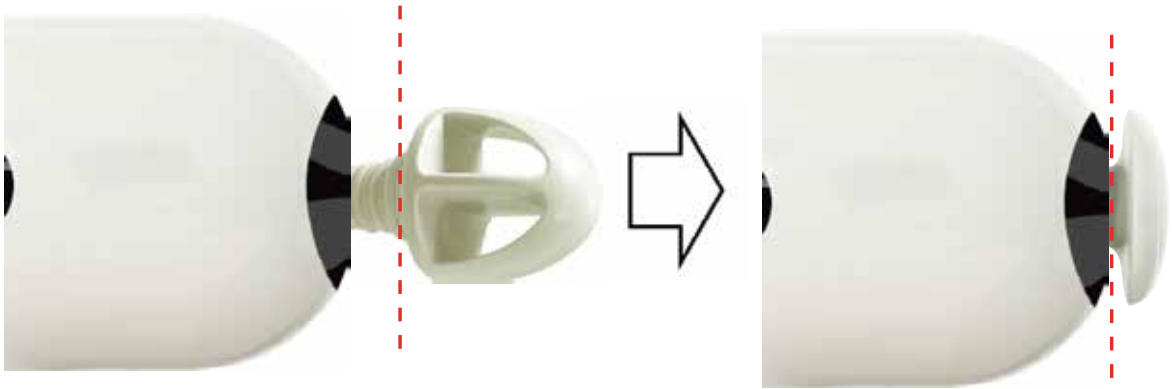

دليل العمليه

١. التشغيل وتبديل التروس: اضغط واستمر في الضغط على المفتاح اللمسي لمدة تزيد عن ثانية واحدة لتشغيل الجهاز. عند التشغيل، سيظهر العرض الرقمي رقم ٠. اضغط بشكل موزن للتبديل إلى التروس الأولى. كل مرة تضغط بشكل موزن، يزيد تدريجياً مستوى الاهتزاز بمستوى واحد، حتى

الوصول إلى الحد الأقصى للتروس والذي يبلغ ٦ تروس. سيشير الشاشة الرقمية إلى رقم التروس الحالية.

٢. إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط واستمر في الضغط على المفتاح اللمسي أثناء التشغيل لمدة ثانية واحدة.

٣. مؤشر البطارية: يشير الشاشة الرقمية إلى مستوى البطارية الحالي. إذا كان مستوى البطارية منخفضًا، سيتم مط الرمز الخاص بالبطارية خمس مرات ثم سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا لتنبيه بالشحن.

٤. وظيفة التوقيت: سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ١٠ دقائق من التشغيل المستمر.

٥. حماية الدوران المقفل: إذا تعرض الجهاز لعائق لأكثر من اثنتين، فسيدخل وضع الحماية. ستومض الشاشة الرقمية كتنبيه. بالضغط بشكل موز على المفتاح اللمسي خلال خمس ثوانٍ، سيتم إعادة تشغيل الجهاز. إذا لم يكن هناك تفاعل، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

إرشادات الشحن

- ١. قبل الاستخدام الأولي،** تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة بالكامل.
- ٢. قم بإيقاف تشغيل الجهاز** وقم بتوصيل كبل الشحن من النوع C برأس الشحن (بشكل مثالي ه فولت / ٢ أمبير). سيومض رمز البطارية، مشيرًا إلى بدء عملية الشحن.
- ٣. عندما يظل رمز البطارية ثابتًا،** فإن ذلك يعني اكتمال الشحن.
- ٤. تجنب تشغيل الجهاز** أثناء عملية الشحن؛ لا يمكن تشغيله خلال هذه العملية.

التعليمات

مشكلة: عدم تشغيل الجهاز

السبب المحتمل ١: درجة حرارة منخفضة

تعرض مطول لبندقية الفاسيا لدرجات حرارة تقل عن ٠ درجة مئوية قد يقلل من أداء البطارية، مما يتسبب في مشكلات في التشغيل. على الرغم من أن الجهاز قد يبدأ بشكل طبيعي، إلا أنه لا يعمل بشكل فعال في أي اتجاه.

السبب المحتمل ٢: نفاد طاقة البطارية

إذا تم ترك الجهاز دون شحن لفترة طويلة، فإن البطارية تدخل في حالة حماية منخفضة الطاقة، مما يجعل بندقية الفاسيا غير قابلة للتشغيل. الحل: التأكد من الوظائف الطبيعية

استكشاف الأخطاء التشغيلية وإصلاحها	
عدم الوظائف للمنتج	تأكد من كفاية مصدر الطاقة.
عدم تفعيل ضوء اللوحة	تأكد من كفاية مصدر الطاقة.
إصدار صوت من الجهاز الجديد	يعتبر هذا أمرًا طبيعيًا.
فشل في شحن البطارية	إذا كانت البطارية قديمة، فمن الضروري استبدالها.

إرشادات الصيانة

١. التخزين لفترة طويلة: عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يجب الحفاظ على البطارية بسعة كاملة، وإيقاف تشغيل الطاقة، وتخزينه في بيئة آمنة وجافة ومهواة وباردة.
٢. الشحن الدوري: قم بشحن المنتج كل ستة أشهر عند عدم الاستخدام لفترة طويلة.
٣. العناية اليومية: استخدم محلول محايد وقطعة قماش ناعمة للصيانة الدورية.
٤. تجنب الكيماويات: تجنب استخدام الزيوت أو المذيبات العضوية أو أي وكلاء تنظيف كيميائية أخرى. تجنب الشطف بالماء.
٥. إدارة الطاقة: قم دائمًا بإيقاف تشغيل الطاقة قبل استخدام المنتج أو تنظيفه.
٦. النقل الآمن: تأكد من تثبيت المنتج بشكل آمن أثناء النقل لمنع الدوران أو السقوط.

حماية البيئة

في نهاية العمر الافتراضي للمنتج، تخلص منه في صناديق إعادة التدوير المخصصة من قبل الحكومة لضمان إعادة التدوير بطريقة مسؤولة بيئيًا.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**