

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز تدليك يدوي دقيق مزود
بأربعة رؤوس قابلة للتبديل

SKU: PD-FMGUN


٢	المميزات
٢	نظرة عامة على المنتج
٢	أ. تعليمات الواجهة
٢	ب. رؤوس التدليك
٣	احتياطات السلامة
٣	الصيانة الآمنة
٤	تعليمات الاستخدام
٤	التشغيل
٤	مناطق التدليك
٥	التنظيف والصيانة
٥	محتويات العبوة
٥	المواصفات
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	التخزين والنقل
٦	التخلص الآمن من النفايات
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

١. مستويات شدة: يوفر الجهاز ٦ مستويات شدة قابلة للتعديل لتخصيص تجربة التدليك الخاصة بك وفقاً لتفضيلاتك.
٢. شحن من النوع C: يدعم الشحن من النوع C، مما يضمن تجديد الطاقة بشكل أسرع وأكثر موثوقية.
٣. بطارية ١٥٠٠ مللي أمبير في الساعة: مزود ببطارية ١٥٠٠ مللي أمبير في الساعة، توفر وقت استخدام ممتد لجلسات استرخاء مطولة.
٤. وقت عمل ٣ ساعات: مع وقت عمل يصل إلى ٣ ساعات، يمكنك الاستمتاع بتدليك طويل الأمد دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.
٥. إيقاف التشغيل التلقائي: يتضمن الجهاز ميزة إيقاف التشغيل التلقائي لتعزيز السلامة عن طريق إيقاف التشغيل تلقائياً بعد فترة معينة من الاستخدام.

نظرة عامة على المنتج

أ. تعليمات الواجهة

- مؤشر معدل الكثافة: يعرض مستويات الكثافة، حيث يشير ضوء واحد إلى أدنى مستوى وتشير ستة أضواء إلى أعلى مستوى.
- زر تبديل الطاقة والوضع: يستخدم لتبديل الطاقة والتبديل بين الأوضاع.
- موصل الطاقة: USB Type-C (٥ فولت) للشحن.

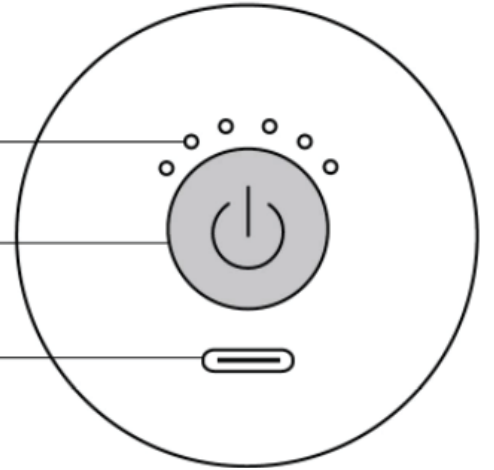

ب. رؤوس التدليك

الرأس المسطح مخصص لتدليك جميع أجزاء الجسم.



رأس الشوكة مخصص لليدين والرقبة ومنطقة العمود الفقري.



الرأس الرصاصي مخصص لنقاط الزناد ومجموعات العضلات الصغيرة.



رأس الكرة مخصص لتدليك المناطق الكبيرة.



١. استخدمه فقط على بشرة جافة ونظيفة.
٢. لا ينبغي أن تتجاوز مدة التدليك على كل منطقة من الجلد ٦٠ ثانية.
٣. لحماية جسمك من التعرض للكدمات المحتملة، كن يقظًا وافحص منطقة التدليك. عند أول علامة على الألم أو الانزعاج، توقف عن الاستخدام على الفور.
٤. أبعد الشعر أو المجوهرات أو الأصابع أو أجزاء أخرى من الجسم عن الجزء المهتز لتجنب الضغط.
٥. لا تستخدم الجهاز أثناء القيادة.
٦. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من القلب، أو على الرأس، أو على الخدين، أو في الفم، أو في المناطق التي تعاني من مشاكل أو حساسية الجلد، أو حيث يكون غطاء العظام رقيقًا جدًا، وفي المناطق التي توجد بها الأعضاء الداخلية.
٧. لا يناسب جهاز التدليك الأشخاص الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية، أو اضطرابات النزيف، أو الجروح المفتوحة، أو الأورام الخبيثة، أو هشاشة العظام، أو أمراض القلب، أو أولئك الذين لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب أو الأجهزة الطبية الإلكترونية، أو أثناء تناول مضادات التخثر.
٨. لا يُنصح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو النساء الحوامل أو الأفراد الذين يعانون من حالات بدنية خطيرة.

الصيانة الآمنة

١. لا ينبغي تخزين الجهاز في بيئات ذات رطوبة عالية، بما في ذلك الحمامات.
٢. لا تعرض الجهاز للماء.
٣. تجنب تخزين الجهاز في ظروف درجات الحرارة المرتفعة والغبار المتزايد.
٤. لا تسقط الجهاز أو تصطدم به.
٥. أدخل الرأس المرفقة فقط في الجهاز. لا تدخل أي أشياء أخرى.
٦. لا تفكك الجهاز أو تصلحه أو تعدل فيه بنفسك.
٧. لا تقم بإزالة أو إتلاف لوحة الاسم التي تحتوي على معلومات حول الجهاز ورقمه التسلسلي.
٨. تخلص من الجهاز وفقًا لمتطلبات التشريعات في البلد الذي يتم فيه البيع.

أ. قبل الاستخدام الأول

١. اقرأ دليل المستخدم بعناية.
٢. اشحن الجهاز بالكامل لمدة ٤ ساعات تقريبًا.

ب. الشحن

١. تعمل الوحدة ببطارية ليثيوم أيون داخلية قابلة لإعادة الشحن، يتم إعادة شحنها باستخدام كابل USB Type-C المرفق.
 - تحذير:** قبل الشحن، تأكد من أن الجهد الموضح على ملصق التصنيف يتوافق مع جهد مخرج مصدر الطاقة.
 ٢. قم بتوصيل مقبس التيار المستمر ه فولت بالوحدة بمصدر الطاقة باستخدام كابل USB Type-C.
 ٣. أثناء الشحن، ستومض مصابيح المؤشر أو تظل مضاءة باستمرار. يشير عدد المصابيح المضاءة باستمرار إلى مستوى الشحن. عند الشحن الكامل، ستظل جميع المصابيح مضاءة.
 ٤. يصل وقت تشغيل الجهاز المشحون بالكامل إلى ١٢٠ دقيقة.
- تحذير:** لا يمكن استخدام الوحدة أثناء الشحن.

التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
٢. اضغط على نفس الزر لزيادة مستوى الكثافة أو إعادته إلى مستوى الكثافة الأدنى.
٣. لتغيير الرأس، اسحبه للخارج وأدخل رأسًا جديدًا.

مناطق التدليك

يوصى باستخدام جهاز التدليك في المناطق التالية: عضلات الكتف؛ منطقة لوح الكتف؛ عضلات الساعد؛ عضلات الصدر؛ عضلات الألية؛ الأسطح الأمامية والخلفية للفخذ؛ عضلات أسفل الساق؛ باطن القدم.

تحذير:

١. لا ينبغي أن تتجاوز مدة التعرض المستمر لمنطقة واحدة ٦٠ ثانية. إجمالي وقت التدليك الموصى به هو ١٠-٢٠ دقيقة.
٢. بعد ١٥ دقيقة من الاستخدام المستمر، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. إذا كنت ترغب في الاستمرار، فقم بتشغيله مرة أخرى.

التنظيف والصيانة

١. قبل التنظيف، أوقف تشغيل الجهاز وافصل الرأس المثبت.
٢. امسح الجهاز بقطعة قماش مبللة قليلاً.

محتويات العبوة

١. مسدس تدليك بالقرع
٢. ٤ رؤوس
٣. كابل طاقة (USB Type-C)

المواصفات

اسم المنتج	جهاز تدليك يدوي دقيق من Porodo Lifestyle مزود بأربعة رؤوس قابلة للتبديل
SKU	PD-FMGUN
المدخل	٥ فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	١٥٠٠ مللي أمبير في الساعة
الطاقة المقدرة	١٥ واط
وقت العمل	حتى ١٢٠ دقيقة
وقت إعادة الشحن	ساعتان
مستويات الكثافة	٦
الوزن الصافي	٤٥٠ جرام
الأبعاد	١٢٢×٩٤×١٥١ مم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تأكد من شحن البطارية بالكامل. إذا لم يتم تشغيل الجهاز، فحاول استخدام شاحن أو كابل مختلف لاستبعاد مشكلات الشحن. إذا لاحظت أي سلوك غير عادي أو مشكلات في الأداء، فقد يكون ذلك بسبب عطل في البرنامج أو الجهاز. في مثل هذه الحالات، اتصل بمقدمي الخدمات المحترفين المعتمدين للحصول على المساعدة.

التخزين والنقل

يُسمح بنقل المنتجات المعبأة بجميع أنواع وسائل النقل في ظل الظروف المحددة في GOST 1510، وفي درجات حرارة لا تقل عن ١٠ - درجة مئوية، مع الحماية من التعرض المباشر للأمطار الجوية والتلف الميكانيكي. يجب تخزين المنتجات في ظل الظروف وفقاً لـ GOST 1510، في غياب الشوائب الحمضية والقلوية وغيرها من الشوائب العدوانية في الهواء. أثناء النقل والتخزين، يجب تكديس المنتجات المعبأة في أكوام أو حاويات أو رفوف. يجب تحديد عدد الصفوف في الأكوام بناءً على الأبعاد الكلية ووزن المنتجات المعبأة والمشار إليها في المواصفات الفنية للطراز المحدد.

التخلص الآمن من المنتج

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها. يرجى التعرف على النظام المحلي والتخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية بشكل صحيح لمنع العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة البشرية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**