

# PORODO



## Porodo

وسادة تدليك الرقبة  
مع كمادات ساخنة

SKU: PD-360ENM-GY

المميزات	٢
التخزين والنقل	٢
هيكل المنتج	٣
المواصفات	٣
محتويات العبوة	٤
تعليمات الاستخدام	٤
الشحن	٤
احتياطات السلامة	٥
تحذير	٦
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٦
اعتبارات التخلص من المنتج	٧
دليل إزالة البطارية	٧
الضمان	٨
اتصل بنا	٨

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## المميزات


١. مصمم ليتوافق مع الشكل الطبيعي لرقبتك، مما يوفر راحة مستهدفة وراحة محسنة أثناء الاستخدام.
٢. هيكل هذا المدلك القابل للتكيف يناسب أي حجم رقبة بشكل مريح، مما يوفر دعمًا مخصصًا للحصول على نتائج مثالية.
٣. خفيف الوزن ويعمل بالبطارية، يوفر هذا المدلك المرونة للاستمتاع بتدليك مريح للرقبة أينما ذهبت.
٤. يجمع بين الاهتزازات اللطيفة والحرارة المهدئة للاسترخاء العميق لأنسجة العضلات وتخفيف التوتر.
٥. يتميز بتصميم محيطي يتماشى تمامًا مع الرقبة للحصول على تدليك مريح وفعال.
٦. مصمم لتوفير دعم كبير من خلال تقليل إجهاد الرقبة وتخفيف نقاط الضغط.
٧. يتضمن حزام فيلكرو قابل للتعديل يضمن ملائمة آمنة ومريحة تناسب الاحتياجات الفردية.

## التخزين والنقل

١. قم بتخزين المنتج في درجة حرارة تتراوح بين ٢٠ - درجة مئوية و ٤٠ + درجة مئوية من أجل السلامة المثلى.
٢. حافظ على الضغط الجوي بين ٥٠ كيلو باسكال إلى ١٠٦ كيلو باسكال.
٣. حافظ على الرطوبة أقل من ٩٣٪ لمنع تلف الرطوبة.
٤. تأكد من أن منطقة التخزين جيدة التهوية، ومحمية من أشعة الشمس المباشرة، وخالية من الغازات المسببة للتآكل. إذا تم تخزين المنتج لأكثر من ثلاثة أشهر، فيجب فحصه وإعادة شحنه.
٥. يتضمن المنتج تدابير أساسية مضادة للاهتزاز وهو مناسب للنقل عن طريق الجو والسكك الحديدية والطرق والبحر. احمِ المنتج من المطر والثلج والانقلاب والصدمات لضمان سلامته أثناء النقل.



عرض توضيحي لطريقة الارتداء

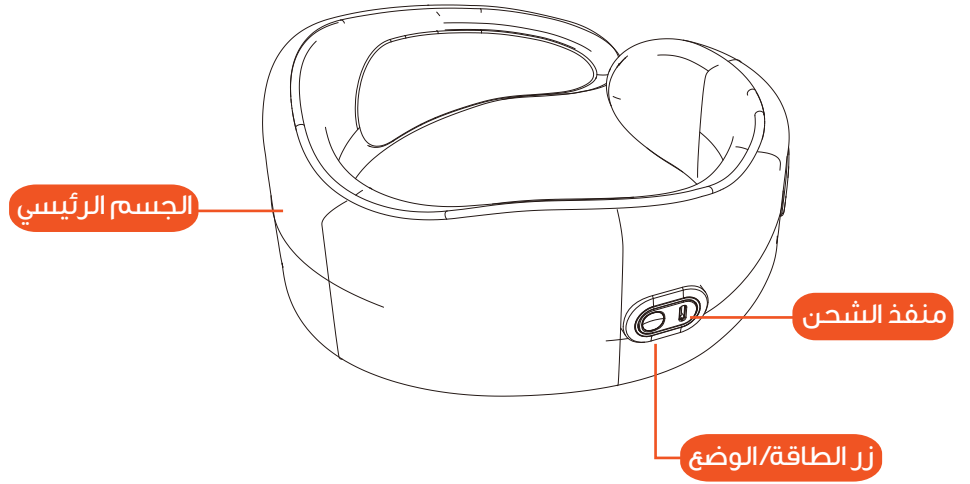

## المواصفات

المواد	٨٥% قطن + ١٥% سبانديكس
سعة البطارية	٨٥٠ مللي أمبير في الساعة
جهد الإدخال المقدر	٥ فولت
طاقة الإدخال المقدر	٣ وات
وقت إعادة الشحن	ساعتان
وقت العمل	١٢٠ دقيقة
وقت الجلسة	١٥ دقيقة
منفذ الشحن	النوع C
الوزن الصافي	١٢٢ جرام
أبعاد المنتج	٥٦×٩٠×٢٥ مم

## محتويات العبوة

١. جهاز تدليك الرقبة
٢. كابل شحن من النوع C

## تعليمات الاستخدام

١. **التشغيل:** اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ للتنشيط. سيضيء ضوء المؤشر الأزرق، مما يشير إلى تنشيط الوضع ١ (التسخين).
  ٢. **تغيير الأوضاع:** اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل للتبديل إلى الوضع ٢ (الاهتزاز والتسخين). سيتم تنشيط ضوء المؤشر الوردي. اضغط مرة أخرى للتبديل بين الوضعين.
  ٣. **إيقاف التشغيل:** لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ. سينطفئ ضوء المؤشر، مما يشير إلى إيقاف تشغيل الجهاز الآن.
- ملاحظة:** عند التشغيل، يعمل الجهاز لمدة ١٥ دقيقة قبل إيقاف تشغيله تلقائيًا. لاستئناف الاستخدام، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى.

### تحذير:

١. استخدم حسب الحاجة، ولكن حدد التشغيل المستمر بما لا يزيد عن ٣٠ دقيقة. يُنصح بالحفاظ على فاصل زمني مناسب بين الجلسات.
٢. قد يؤدي الاستخدام المطول إلى إزعاج جسدي أو إصابة جلدية.
٣. عند استخدام الجهاز لأول مرة، راقب رد فعل جسمك وأي تغيرات في الجلد عن كثب. توقف عن استخدام الجهاز إذا واجهت أي إزعاج أو ردود فعل غير طبيعية.
٤. الاحمرار أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف للغاية في منطقة التدليك وما حولها أمر طبيعي ويجب أن يختفي بشكل طبيعي خلال فترة قصيرة.

## الشحن

١. عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، سيصدر زر الطاقة إشارة حمراء وامضة.
٢. سيومض الضوء الأحمر أثناء الشحن. بمجرد الشحن الكامل، سيضيء الضوء الأزرق.
٣. يُرجى استخدام كابل الشحن الخاص من النوع C المضمن في عبوة المنتج.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تشغيل المنتج أثناء شحنه.

## احتياطات السلامة

١. قبل الاستخدام: راجع دليل التشغيل بعناية.

٢. ظروف التشغيل: تجنب استخدام هذا المنتج في البيئات الحارة أو القابلة للاشتعال أو الرطبة أو بالقرب من مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي.

٣. مدة الاستخدام: قم بالتشغيل حسب الحاجة ولكن لا تتجاوز ٣٠ دقيقة متواصلة. تأكد من وجود فترات زمنية كافية بين الجلسات لمنع آلام العضلات وعدم الراحة. راقب استجابة جسمك، خاصة أثناء الاستخدام الأولي.

٤. بعد الاستخدام: من الطبيعي أن تشعر باحمرار أو دفء في منطقة التدليك وسوف يقل بمرور الوقت. توقف عن الاستخدام واستشر مقدم الرعاية الصحية إذا حدث عدم راحة.

٥. حماية المحرك: لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك، تجنب تشغيل الجهاز بشكل مستمر لفترات طويلة.

٦. التفكيك: لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تغيير هذا المنتج دون إذن معتمد.

٧. مقاومة الماء: هذا المنتج ليس مقاومًا للماء. تأكد من بقاءه جافًا في جميع الأوقات.

٨. الاستخدام المقصود: تم تصميم هذا المنتج للرعاية الصحية المنزلية وليس مخصصًا للتطبيقات التشخيصية أو العلاجية أو التجارية. توخ الحذر إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المواد التي يتكون منها المنتج.

٩. الأطفال والحيوانات الأليفة: احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ و ١٢ عامًا استخدامه تحت إشراف شخص بالغ فقط. قم بإزالة أي أشياء قريبة قد تتداخل مع المنتج قبل الاستخدام.

١٠. إيقاف التشغيل والتخزين: قم دائمًا بإيقاف تشغيل المنتج وفصله عن التيار الكهربائي عند عدم استخدامه. قم بتخزين الجهاز في منطقة جافة وجيدة التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الحوامل استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج.

١. تجنب استخدام هذا المنتج إذا كنت تعاني من إصابات جلدية أو التهاب أو احتقان أو أمراض جلدية أو أي إزعاج في المنطقة المراد تدليكها.
٢. لا تستخدمه إذا كنت تعاني من إصابات عضلية أو نزيف نشط أو جروح لم تلتئم تمامًا في منطقة التدليك.
٣. امتنع عن استخدام هذا المنتج إذا كنت تعاني من هشاشة العظام أو الكسور أو أي مشاكل متعلقة بالعظام في المنطقة المصابة.
٤. لا تستخدم هذا المنتج إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو تاريخ من الأورام الخبيثة أو ضعف الوظائف الحركية أو الإعاقات الإدراكية والجسدية.
٥. لا ينبغي للنساء الحوامل تطبيق هذا المنتج على مناطق الخصر والبطن. هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن ١٢ عامًا.
٦. تجنب استخدامه إذا كان لديك حساسية عالية للحرارة أو أثناء الحيض.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يبدأ	عدم كفاية طاقة البطارية	الشحن الفوري
لا يتم الشحن بشكل صحيح	مشاكل الاتصال أو تلف البطارية	فحص مصدر الطاقة الخارجي أو كبل USB اتصل بمحترفي الخدمة المعتمدين لاستبدال البطارية
يفشل في التشغيل	حماية كتلة الزناد أو عطل الدائرة	اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوان لإعادة التشغيل. إذا لم يبدأ التشغيل بعد ذلك، فاتصل بمحترفي الخدمة المعتمدين

**ملاحظة:** إذا استمرت المشكلة، يرجى التوقف عن استخدام الجهاز والاتصال بأخصائي الخدمة المعتمدين. لا تحاول تفكيك أو إصلاح المنتج بنفسك.

## اعتبارات التخلص من المنتج

لمنع التلوث البيئي، يرجى الامتناع عن التخلص من هذا المنتج دون تمييز. التزم بلوائح حماية البيئة المحلية للتخلص من المنتج.

١. يجب إزالة البطارية من المنتج قبل التخلص منه.
٢. تأكد من إيقاف تشغيل المنتج قبل إزالة البطارية.
٣. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة، باتباع البروتوكولات البيئية المناسبة.

## تحذير:

لا ينبغي للموظفين غير المحترفين تفكيك المنتج بأنفسهم! لحماية البيئة، بمجرد اعتبار المنتج أو أجزائه غير صالحة للاستخدام، افصلها عن النفايات المنزلية العادية وانقلها إلى منشأة إعادة تدوير معتمدة. ستتولى هذه المنشأة فرز وتفكيك وإعادة تدوير وإعادة الاستخدام المحتملة وفقاً للوائح الوطنية.

## دليل إزالة البطارية

١. افصل مصدر الطاقة الخارجي وأزل غلاف المنتج.
٢. أخرج البطارية.
٣. خذ البطارية إلى محطة إعادة التدوير.
٤. التزم بلوائح حماية البيئة المحلية عند التخلص من البطارية لحماية البيئة.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**