

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

قناع الوجه للعلاج بالضوء الأحمر

SKU: PD-LFST099

٢	مقدمة عن التكنولوجيا
٢	محتويات العبوة
٣	مخطط وحدة التحكم
٣	تعليمات الاستخدام
٤	دليل مؤشر الضوء
٥	تحذيرات السلامة والمحظورات
٥	المواصفات
٦	مؤشر الضوء
٦	التخلص من الجهاز
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

شكرًا لك على شراء قناع تجديد البشرة Spectrum Skin Rejuvenation Mask. قبل استخدام القناع، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. انتبه بشكل خاص إلى تعليمات السلامة لضمان التشغيل السليم والآمن.

يوفر هذا الدليل للمستخدمين إرشادات الاستخدام الآمنة والفعالة. بعد القراءة، يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مقدمة عن التكنولوجيا

يستخدم هذا المنتج تكنولوجيا مواد توجيه الضوء المتقدمة وتكنولوجيا النانو لتوليد أطوال موجية مختلفة من ضوء LED الملون، بما في ذلك الضوء NIR والأحمر والأزرق والبرتقالي والبنفسجي والسماوي والأخضر والأبيض.

محتويات العبوة


١. قناع الوجه


٢. الأشرطة

٣. وحدة التحكم

٤. كابل USB


٥. واقي العين

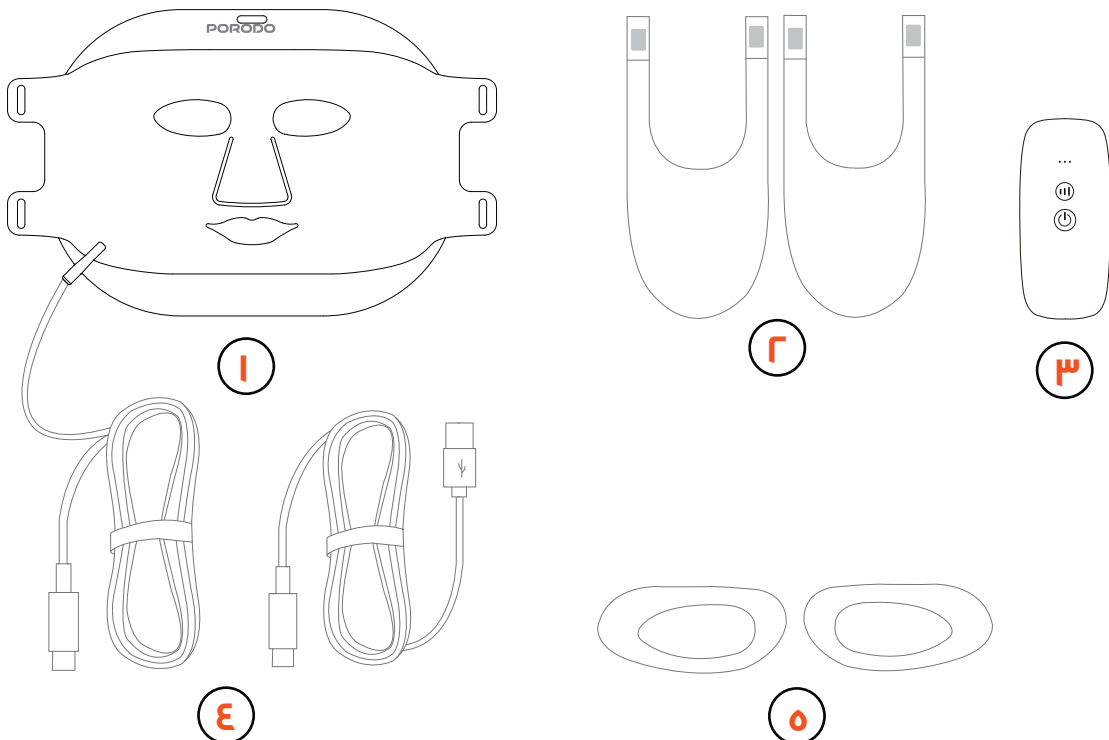

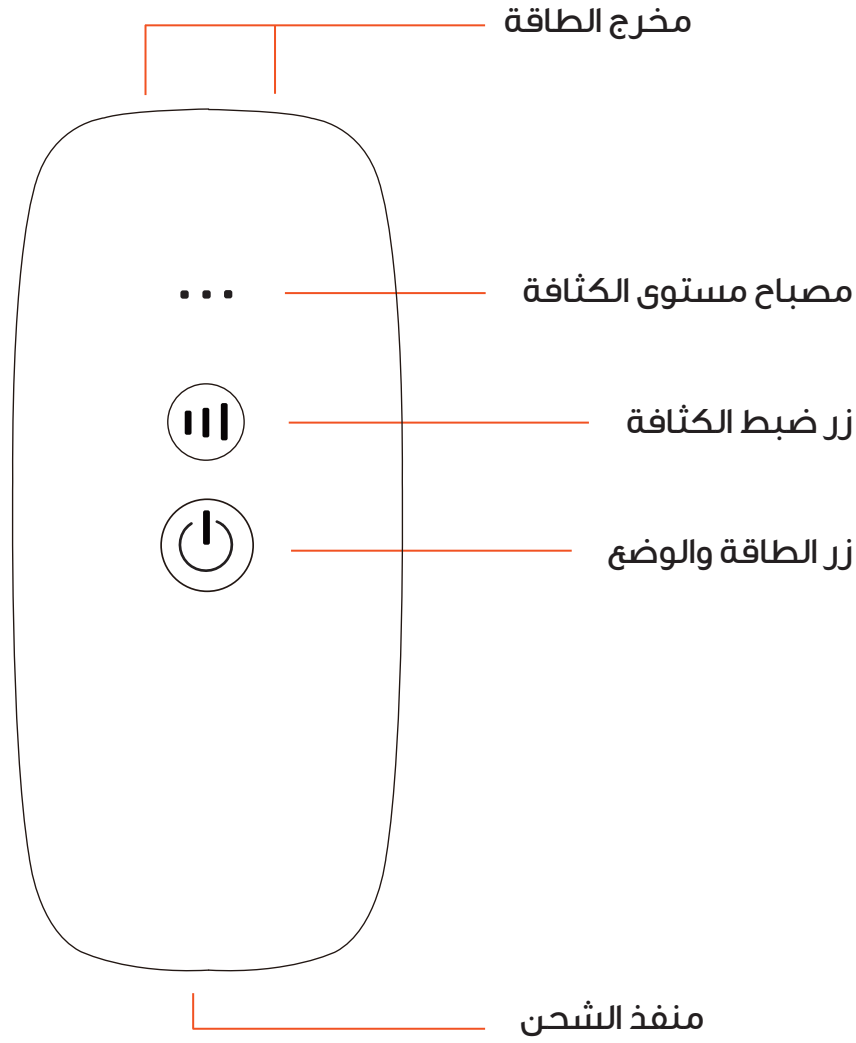

تعليمات الاستخدام



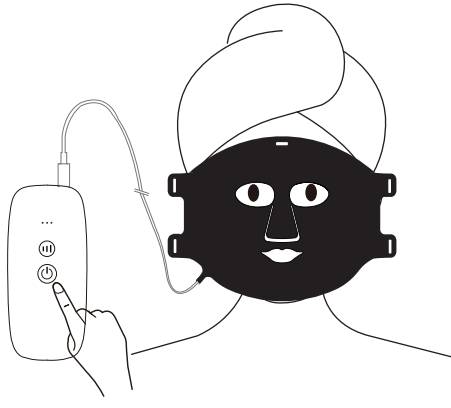

الخطوة ٣: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. سيعمل تلقائيًا لمدة ٢٠ دقيقة.



الخطوة ٤: بمجرد اكتمال الجلسة، قومي بإزالة القناع وضعي مرطبًا على بشرتك.

دليل مؤشر الضوء

تشغيل / إيقاف	اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.
الوضع التلقائي	افتراضيًا، يبدأ الجهاز في الوضع التلقائي. سيتنقل البرنامج تلقائيًا عبر الأصواء التالية: NIR + الضوء الأحمر لمدة ٣ دقائق، والضوء الأزرق لمدة ٣ دقائق، والضوء البرتقالي لمدة ٣ دقائق، والضوء البنفسجي لمدة ٣ دقائق، والضوء السماوي لمدة ٣ دقائق، والضوء الأخضر لمدة ٣ دقائق، والضوء الأبيض لمدة ٣ دقائق. ثم سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
الوضع اليدوي	في حالة العمل، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الوظيفة للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة. سيعمل الضوء المحدد لمدة ١٠ دقائق ثم ينطفئ تلقائيًا.
مستوى الكثافة	في حالة العمل، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الكثافة لضبط مستوى الكثافة. هناك ثلاثة مستويات من الكثافة للاختيار من بينها.
الشحن	عندما يومض المؤشر، يكون الجهاز في حالة طاقة منخفضة ويحتاج إلى الشحن. سيضيئ المؤشر باللون الأحمر أثناء الشحن، وعند الشحن الكامل، ستضاء جميع الأصواء الحمراء.
التشغيل	يوصى باستخدام قناع تجديد البشرة من ٣ إلى ٥ مرات في الأسبوع.

تحذيرات ومحظورات السلامة

١. لا يتمتع هذا المنتج بوظيفة مقاومة الحرائق. يرجى إبعاده عن النار أو السوائل المسببة للتآكل.
٢. لا تقم بتفكيك المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك.
٣. احتفظ بالمنتج في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
٤. هذا المنتج مقاوم للماء.
٥. تجنب الضغط الزائد لمنع التشوه أو العطل.

المواصفات

المواد	Food Grade Silicone, ABS
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير
الطاقة المقدرة	≥ 9.7 واط
جهد التشغيل	٣.٧ فولت
جهد الشحن	تيار مستمر ه فولت / ١ أمبير
واجهة الشحن	النوع-C
عدد مصابيح LED	٦٢ قطعة
مصابيح LED	٧ أطوال موجية (السماوي، والأرجواني، والأخضر، والأزرق، والأبيض، والأصفر، والأحمر)
حجم المنتج	٨٣×٢.٩×٥٠ مم
وزن المنتج	٢٧٥ جرام

الحالة	الحل
الجهاز لا يعمل.	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله. يحتاج الجهاز إلى الشحن.
جهد البطارية منخفض.	يحتاج الجهاز إلى الشحن.
قابس أو مقبس USB معيب.	أعد إدخال قابس / مقبس USB. أعد قابس / مقبس USB.
وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي نشطة.	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله. يحتاج الجهاز إلى الشحن.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**