

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
4 في RF، EMS، جهاز علاج
الضوء الاهتزازي للوجه

SKU: PD-LFST100

| | |
|------------------------|---|
| الميزات | ٢ |
| المواصفات | ٢ |
| حظر الاستخدام | ٢ |
| التحذيرات | ٣ |
| تعليمات السلامة المهمة | ٤ |
| منظر تخطيطي | ٥ |
| التخلص من المنتج | ٥ |
| الضمان | ٦ |
| اتصل بنا | ٦ |

١. تنشيط ترددات الراديو القوية: يحفز إنتاج الكولاجين ويعزز المرونة ويحسن الدورة الدموية للحصول على بشرة مشرقة.
٢. التحفيز الدقيق EMS: يحفز العضلات ويعزز تدفق الدم وينشط البشرة ويعزز مظهرها المشدود والثابت.
٣. التدليك بالاهتزاز: يخفف التوتر ويعزز الدورة الدموية ويترك البشرة تشعر بالانتعاش والاسترخاء والنشاط بشكل واضح.
٤. العلاج بالضوء LED: يقلل التجاعيد ويزيل حب الشباب ويصلح البشرة باستخدام أطوال موجية للضوء الأحمر والأزرق والأخضر للحصول على صحة مثالية للبشرة.

المواصفات

| | |
|---------------|----------------------------------|
| سعة البطارية | ١٤٥٠ مللي أمبير |
| الطاقة | ٦.٥ وات |
| الجهد | ٥ فولت/١ أمبير |
| واجهة الشحن | النوع C |
| الأوضاع | وضع RF، وضع EMS، وضع VR، وضع LED |
| تردد الاهتزاز | ٨٥٠±١٥٠ دورة في الدقيقة |
| حجم المنتج | ١٨٠×٤٤×٤٤ مم |
| وزن المنتج | ١١٨ جرام |

حظر الاستخدام

- لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قبل الأفراد التاليين (لأنه قد يسبب حوادث أو إصابات):
١. الأشخاص الذين لديهم أجهزة القلب والرئة الاصطناعية أو المعدات الطبية الداعمة

للحياة.

٢. الأشخاص الذين يستخدمون المعدات الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب.
٣. المرضى الذين يعانون من أمراض أحشائية أو اضطرابات في العصب الوجهي.
٤. الأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية أو أمراض حادة.
٥. الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم غير طبيعي أو أمراض معدية.
٦. الأفراد الذين يعانون من مرض السل أو اضطرابات الدم.
٧. النساء الحوامل أو النساء في فترة الحيض أو الأمهات المرضعات أو أولئك الذين يعانون من الحمى.
٨. أولئك الذين يخضعون لعلاج جنسي أو يعانون من حالات جلدية تأثرية.
٩. الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أولئك الذين يعانون من حساسية جلدية شديدة.
١٠. الأفراد الذين يتناولون الكحول أو يتناولون الأدوية المهدئة أو يعانون من التعب المفرط.
١١. المستخدمون طويلي الأمد للهرمونات الستيرويدية أو المرضى الذين يعانون من توسع الشعيرات الدموية الناجم عن خلل في وظائف الكبد.

تحذيرات

- لا ينبغي استخدام المناطق التالية (وإلا فقد تحدث حوادث أو إصابات):
١. الجروح، ومواقع الجراحة التجميلية، وكرات العين، والجفون العلوية.
 ٢. داخل الفم، ومنطقة العانة، والأغشية المخاطية، وما إلى ذلك.
 ٣. المناطق التي تعاني من حروق مفرطة، أو حكة جلدية، أو تورم، أو التهاب، أو ألم، أو اضطرابات إدراكية.
 ٤. المناطق التي تحتوي على معادن أو بلاستيك أو سيليكون، وما إلى ذلك، مغروسة تحت الجلد.
 ٥. في وضع LED، يمكن للضوء أن يضيء حول العينين. عند الاستخدام، أغمض عينيك وارقد قناع عين.
 ٦. لا تنظر مباشرة إلى ضوء LED.
 ٧. لا تبق في نفس المنطقة لفترة طويلة جدًا حيث يمكن أن يسبب ذلك حروقًا أو قدمة الصقيع.
 ٨. لا تشحن الجهاز أو تستخدمه في بيئة مشتعلة أو عالية الحرارة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انفجار أو تمزق البطارية الداخلية.
 ٩. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، حيث قد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث أو إصابات.
 ١٠. اتبع التعليمات الخاصة بالاستخدام الصحيح. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث إصابة

أو تعطل الجهاز.

١١. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر الطبيب قبل الاستخدام.

١٢. إذا شعرت بالألم أو انزعاج أو تفاعلات جلدية غير طبيعية بعد الاستخدام، فتوقف على الفور واستشر الطبيب.

١٣. يجب على المستخدمين الجدد تعديل الاستخدام بناءً على حالة بشرتهم. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف الجلد أو الانزعاج.

١٤. قم بإزالة أي خواتم أو قلادات أو إكسسوارات أخرى وتجنب ارتداء

تعليمات أمان مهمة

١. لا تستخدم الجهاز أثناء الاستحمام أو تغمره في الماء.

٢. إذا حدث أي خلل أثناء الشحن أو الاستخدام، فافصل قابس الطاقة فورًا من مقبس الشحن.

٣. استخدم فقط مصادر الطاقة بمواصفات تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت وتيار مستمر ه فولت أمبير. قد يؤدي استخدام مصادر طاقة أخرى إلى إتلاف الجهاز.


٤. لا تستخدم مقابس طاقة لا تتوافق مع جهد الشحن المطلوب من قبل الجهاز. فقد يؤدي استخدام المقابس الخاطئة إلى إتلاف الجهاز.

٥. لا تستخدم أسلاك طاقة أو مقابس أو مآخذ تالفة. فقد تتسبب هذه في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

٦. لا تشحن الجهاز أثناء الاستحمام أو في بيئة رطبة. فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي.

٧. لا تدخل أو تزيل قابس الشحن بأيدي مبللة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تعطل الجهاز أو حدوث ماس كهربائي.



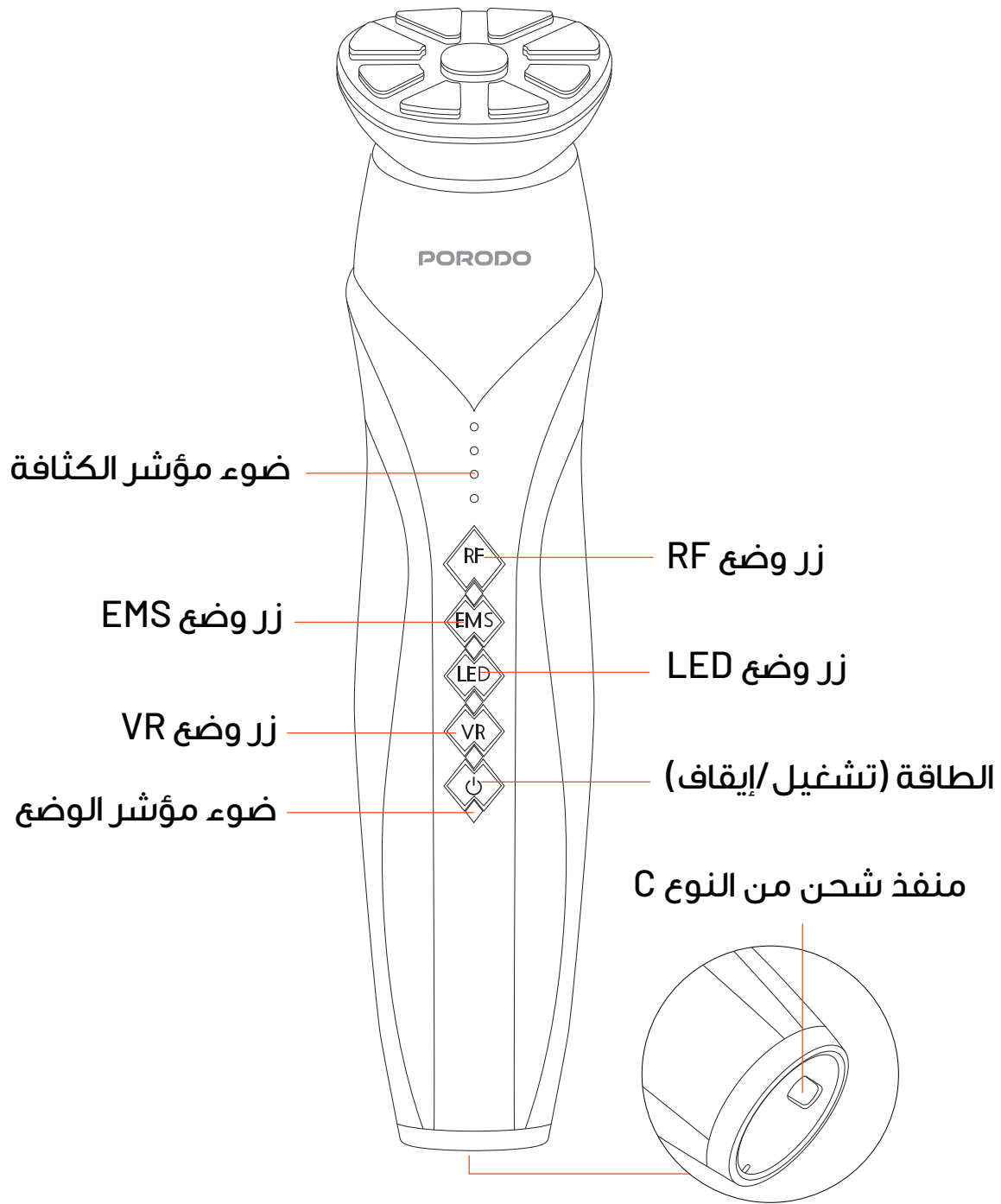

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**