


PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
مقشر للوجه بالموجات
فوق الصوتية

SKU: PD-LFST101-WH

٢	العرض التخطيطي
٢	نظرة عامة
٣	مميزات المنتج
٣	مواصفات
٣	أسلوب الشحن
٤	تعليمات للاستخدام
٦	الصيانة والتخزين
٧	الاحتياطات
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

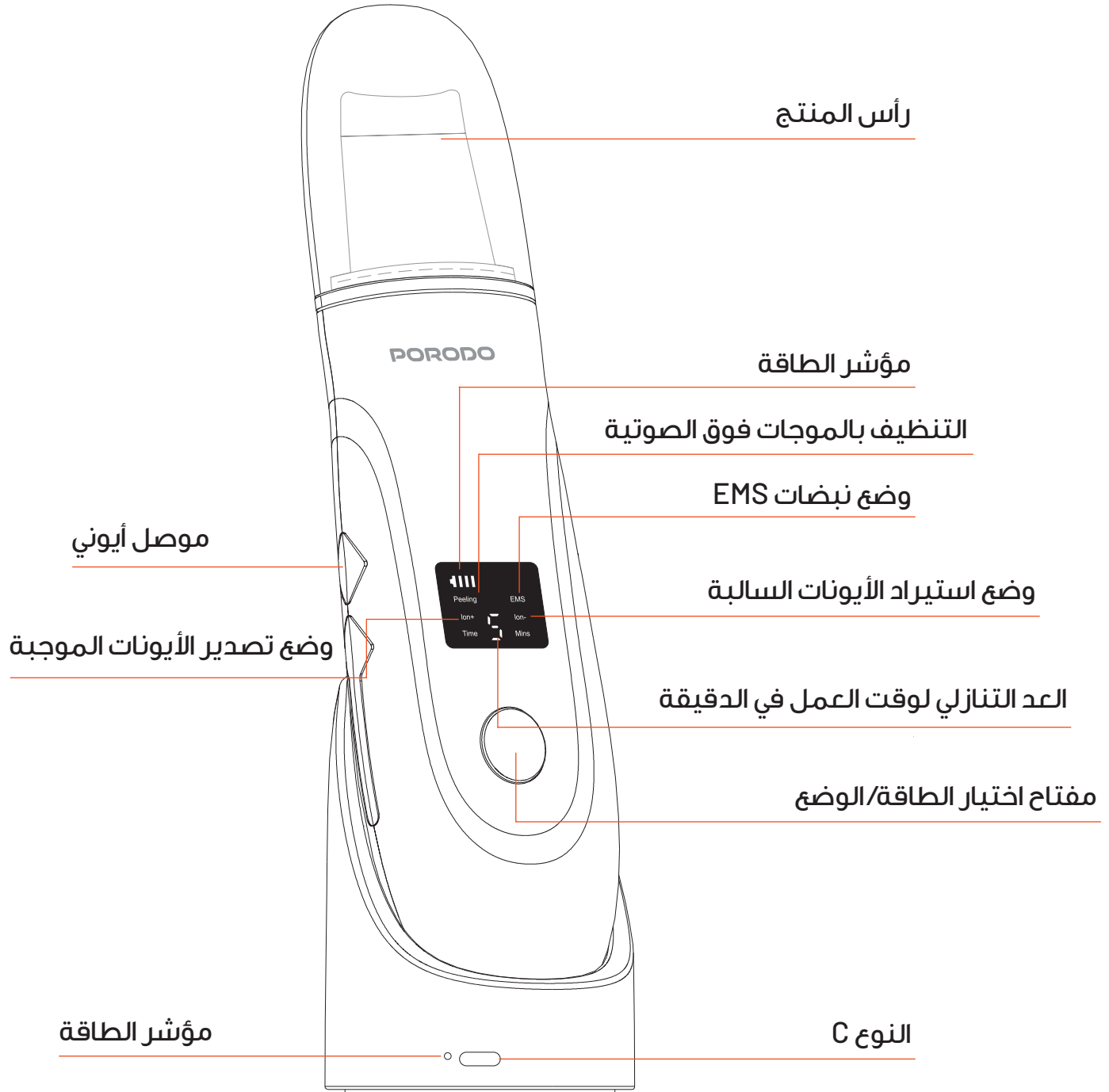

نظرة عامة

يتميز جهاز تقشير الوجه بالموجات فوق الصوتية من Porodo Lifestyle بتقنية متقدمة لتجديد شباب البشرة. تعرض شاشته الكبيرة LED حالة التشغيل وعمر البطارية ووقت الاستخدام بوضوح. لا يقوم الجهاز بتنظيف البشرة بعمق عن طريق إزالة الدهون والأوساخ فحسب، بل يساعد أيضًا في التخلص من الرؤوس السوداء وتنقية المسام. بالإضافة إلى

ذلك، تعمل وظيفة EMS على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية وشد البشرة، مما يمنحها مظهرًا مشدودًا.

مميزات المنتج

- ١. يوفر تنظيفًا عميقًا ويزيل خلايا الجلد المتقدمة في العمر.
- ٢. يكسر الصبغات ويقلل من البقع الداكنة.
- ٣. ينعم التجاعيد العميقة ويعزز مرونة الجلد.
- ٤. يحفز الدورة الدموية في الجلد ويدعم التمثيل الغذائي الليمفاوي.
- ٥. يعزز قدرة خلايا الجلد على التجدد والنفذية.
- ٦. يدلك البشرة ويغذيها وينظف المسام.
- ٧. لا يسبب ضررًا للبشرة ولا يسبب آثارًا جانبية.
- ٨. تصميم جذاب وسهل الاستخدام وسهل التشغيل وقابل للحمل.

مواصفات

سعة البطارية	٦٠٠ مللي أمبير
الطاقة المقدرة	١.٥ واط
جهد التشغيل	٣.٧ فولت
جهد الشحن	٥ فولت
واجهة الشحن	النوع-C
وقت الشحن	١٥٠ دقيقة
حجم المنتج	حجم الفرشاة ١٨×٩×١٧٢ مم، حجم القاعدة ٧٠×٤٤×٥٤ مم
وزن المنتج	وزن الفرشاة ٨٦ جرامًا، الوزن الأساسي ٢٦ جرامًا

أسلوب الشحن

- ملاحظة:** عندما يظهر مؤشر البطارية أقل من شريطين، يوصى بشحن الجهاز.
- ١. قم بتوصيل كابل الشحن USB بواجهة USB.

٢. للشحن، قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب أو محول USB أو واجهة USB لبنك الطاقة. أثناء عملية الشحن، سوف يومض رمز الطاقة على شاشة العرض.
٣. بمجرد شحن البطارية بالكامل، ستعرض الشاشة مؤشرًا ثابتًا مكونًا من ٤ أشرطة.

تعليمات للاستخدام

الخطوة ١: التنظيف باستخدام وضع التنظيف بالموجات فوق الصوتية
اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز وتنشيط وضع التنظيف بالموجات فوق الصوتية. سيضيئ الرمز (Peeling) على الشاشة بشكل ثابت للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للاستخدام.



ضعي مرطبًا على بشرتك للتأكد من ترطيبها.
ضعي مرطبًا على بشرتك للتأكد من ترطيبها.



اتبعي الإرشادات المقدمة
للتطبيق الصحيح.



استخدمي يديك لدفع الجهاز برفق
في حركة تصاعدية على بشرتك
للحصول على نتائج مثالية.

الخطوة ٢: التنظيف العميق باستخدام وضع التنظيف بالموجات فوق الصوتية
١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط وضع تصدير الأيونات الموجبة. بمجرد تشغيل الطاقة، ستعرض شاشة العرض أيقونة (Ion+) التي ستضيئ. استخدم كمادات ساخنة وسائل توجيه الرؤوس السوداء، ثم أمسك الشريط الموصل في يدك.

٢. ضع رأس المجرفة بزاوية ٤٥ درجة على الجلد. حرك رأس المجرفة برفق على طول محيط بشرتك، مع إزالة أي بقايا بعناية من السطح.



ضعي كمادات ساخنة مع سائل لإزالة
الرؤوس السوداء لتحسين عملية التنظيف.



حركي الجهاز برفق لأعلى باستخدام
اتبعي الخطوات الموضحة
للتطبيق الصحيح.



الخطوة ٣: مقدمة عن التغذية (وضع الأيونات السالبة)

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط وضع إدخال الأيونات السالبة. بعد تشغيل الجهاز، اضغط على الزر مرتين للتبديل بين الأوضاع. ستعرض شاشة العرض أيقونة (Ion-)، والتي ستضيئ.
٢. ضع التونر وضع الجزء الخلفي من رأس المجرفة بالقرب من بشرتك. حرك رأس المجرفة ببطء على طول محيط وجهك، مما يسمح لمنتجات العناية بالبشرة بالتغلغل في الجلد لامتصاص وتغذية أفضل.



استخدمي مستخلصات أو قناع للوجه
كجزء من روتين العناية بالبشرة.



اتبعي التعليمات المحددة المقدمة
للحصول على أفضل النتائج.



حركي الجهاز برفق لأعلى بيدك
للسماح بامتصاص أفضل
لمنتجات العناية بالبشرة.

الخطوة ٤: التدليك المهدئ (وضع نبضات EMS)

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ للتبديل إلى وضع نبضات EMS. بعد تشغيل الجهاز، اضغط على الزر ثلاث مرات أخرى لتنشيط هذا الوضع. ستعرض شاشة العرض أيقونة (EMS)، والتي ستضيئ.
٢. ضع كريم الوجه وضع الجزء الخلفي من رأس المجرفة بالقرب من بشرتك. حرك رأس المجرفة ببطء على طول محيط وجهك، مما يحسن امتصاص منتجات العناية بالبشرة.



استخدمي كريم الوجه المفضل لديك
كجزء من روتين العناية بالبشرة.



تأكدي من اتباع التعليمات المحددة
المقدمة للتطبيق الأمثل.



حركي الجهاز برفق في حركة
تصاعدية على طول خطوط وجهك
لتعزيز تأثيرات الرفع والشد.

الصيانة والتخزين

١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.

٢. امسح البقع من كل من الرأس والوحدة الرئيسية بمناديل مبللة أو كحول. لا تستخدم
المخففات أو المذيبات أو أي مواد كيميائية تآكلية أخرى لتنظيف المنتج.

٣. بعد التنظيف، قم بتخزين الجهاز في مكان جاف للحفاظ عليه. تجنب وضعه في مناطق
مبللة مثل الحمامات أو الأماكن التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

الاحتياطات

١. لا تستخدمه بالقرب من الصدغين أو العينين أو تفاحة آدم أو على أي جروح.

٢. حرك الجهاز من جانب إلى آخر وتجنب البقاء في نفس المكان لفترة طويلة لتجنب تهيج
الجلد أو الحروق.

٣. لا يُنصح باستخدام هذا الجهاز للأطفال أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من
فقدان السمع أو الأشخاص الذين لديهم منظمات معدل ضربات القلب أو الاضطرابات
العقلية. تجنب استخدام الجهاز إذا أجريت جراحة تجميل للوجه أو أي إجراءات جراحية مدمجة.

٤. قد يصدر الجهاز صوت صرير خفيف أثناء الاستخدام بسبب تردده. هذا أمر طبيعي ولا
ينبغي أن يؤثر على الاستخدام.

٥. إذا ارتفعت درجة حرارة جسم الجهاز أثناء الشحن، فافصل الطاقة على الفور.

٦. إذا ارتفعت درجة حرارة جهاز التجميل على شكل المجرفة، فتوقف عن استخدامه على الفور.
٧. يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ١٥٠ دقيقة (تأكد من أن الشحنة الأولى تزيد عن ٥ ساعات).
٨. يمكن استخدام الجهاز لمدة تصل إلى ٦٠ دقيقة بعد الشحن الكامل. يوصى بالشحن المنتظم.
٩. الوقت المثالي للاستخدام هو ١٠-٥ دقائق لكل جلسة. للحصول على أفضل النتائج، استخدم الجهاز لمدة ٢ إلى ٣ دقائق في الأسبوع، حتى ٨ إلى ١٢ مرة في الشهر.
١٠. حافظ على يديك جافة أثناء استخدام الجهاز لتجنب الشعور بالتيار الكهربائي الصغير. هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على الاستخدام.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**