

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**

**جهاز تدليك العين مع خاصية  
التنصت الذكي**

SKU: PD-LFST105

٢	الخطر
٢	التحذير
٣	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	نظرة عامة على المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٥	تعليمات البلوتوث والتدفئة
٦	طريقة الارتداء
٦	تعليمات الشحن
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	الصيانة والتخزين
٩	محتويات المواد
١٠	التخلص من المنتج
١٠	تحذير سلامة البطارية
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ بعناية واتبع تعليمات التشغيل الواردة في دليل المستخدم. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي عواقب ناجمة عن الاستخدام غير السليم أو عدم الالتزام بالتعليمات.

١. لا تستخدم هذا المنتج بعد وضع المكياج، حيث قد يتسبب في إتلاف مكياجك ويتسبب في تأثر الجلد ببقايا مستحضرات التجميل. في حالة حدوث تلوث، نظف الجلد بالماء.
٢. قم بتشغيل هذا الجهاز في نطاق درجة حرارة يتراوح من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية و قم بتخزينه في نطاق درجة حرارة تتراوح من ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية. قد تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تعطل الجهاز.


١. لا تستخدم هذا المنتج أثناء القيادة، حيث قد يعيق رؤيتك ويسبب حوادث.
٢. احفظه بعيدًا عن الماء والنار لتجنب التلف أو المخاطر.
٣. تجنب استخدام المنتج في الأماكن ذات الحرارة العالية أو الرطوبة أو الإشارات الإلكترونية القوية.
٤. لا تفتح الجهاز أو تفككه. إذا لم يعمل، فاتصل بخدمة العملاء.
٥. لا تقم أبدًا بتوصيل الشاحن أو فصله بأيدي مبللة لتجنب الصدمات الكهربائية.
٦. غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو أولئك الذين خضعوا لجراحة العيون.
٧. لا تستخدمه إذا كنت تعاني من حالات في العين مثل الجلوكوما أو إعتام عدسة العين أو مرض العين الحمراء.
٨. تجنب استخدامه إذا كنت تعاني من حمى شديدة أو سرطان أو سكتة دماغية أو هشاشة العظام.
٩. قبل الاستخدام، قم بإزالة العدسات اللاصقة أو مشابك الشعر أو أي شيء حول عينيك لتجنب الانزعاج.
١٠. هذا جهاز تدليك للعناية الشخصية وليس علاجًا طبيًا.
١١. إذا كانت بشرتك حساسة أو تعاني من الحساسية، استشر الطبيب قبل الاستخدام.
١٢. توقف عن الاستخدام فورًا إذا شعرت بأي انزعاج.
١٣. استخدم هذا المنتج للتدليك فقط، كما هو موضح في الدليل.
١٤. يحتوي المنتج على سطح تسخين، لذا كن حذرًا إذا كنت حساسًا للحرارة.

١٥. مصنوع من هلام السيليكا. لا تستخدمه إذا كنت تعاني من حساسية السيليكا.
١٦. يحتوي على بطارية ليثيوم. لا تفتحه أو تعدل عليه أو ترميه في النار.
١٧. عند التخلص من هذا المنتج، اتبع قواعد النفايات المحلية لحماية البيئة.


## المواصفات

الطاقة المقدرة	٦ واط
سعة البطارية	٣,٧ فولت ١٢٠٠ مللي أمبير في الساعة
منفذ الشحن	النوع C
جهد الشحن	٥ فولت ٢ أمبير
وقت العمل	٣ ساعات
دورة العمل	١٥ دقيقة (إيقاف التشغيل التلقائي)
الوزن	٢١٠ جرام
حجم المنتج	١٩٠×٧٢×٧١ مم


## محتويات العبوة

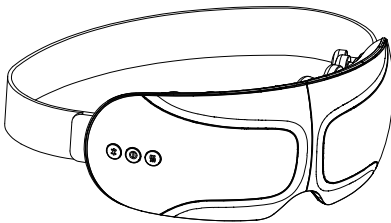


جهاز تدليك العين

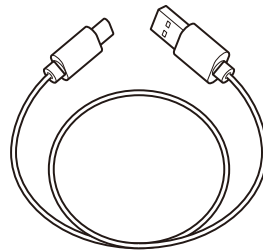

كابل شحن من النوع C

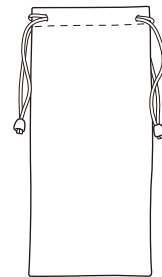

جراب

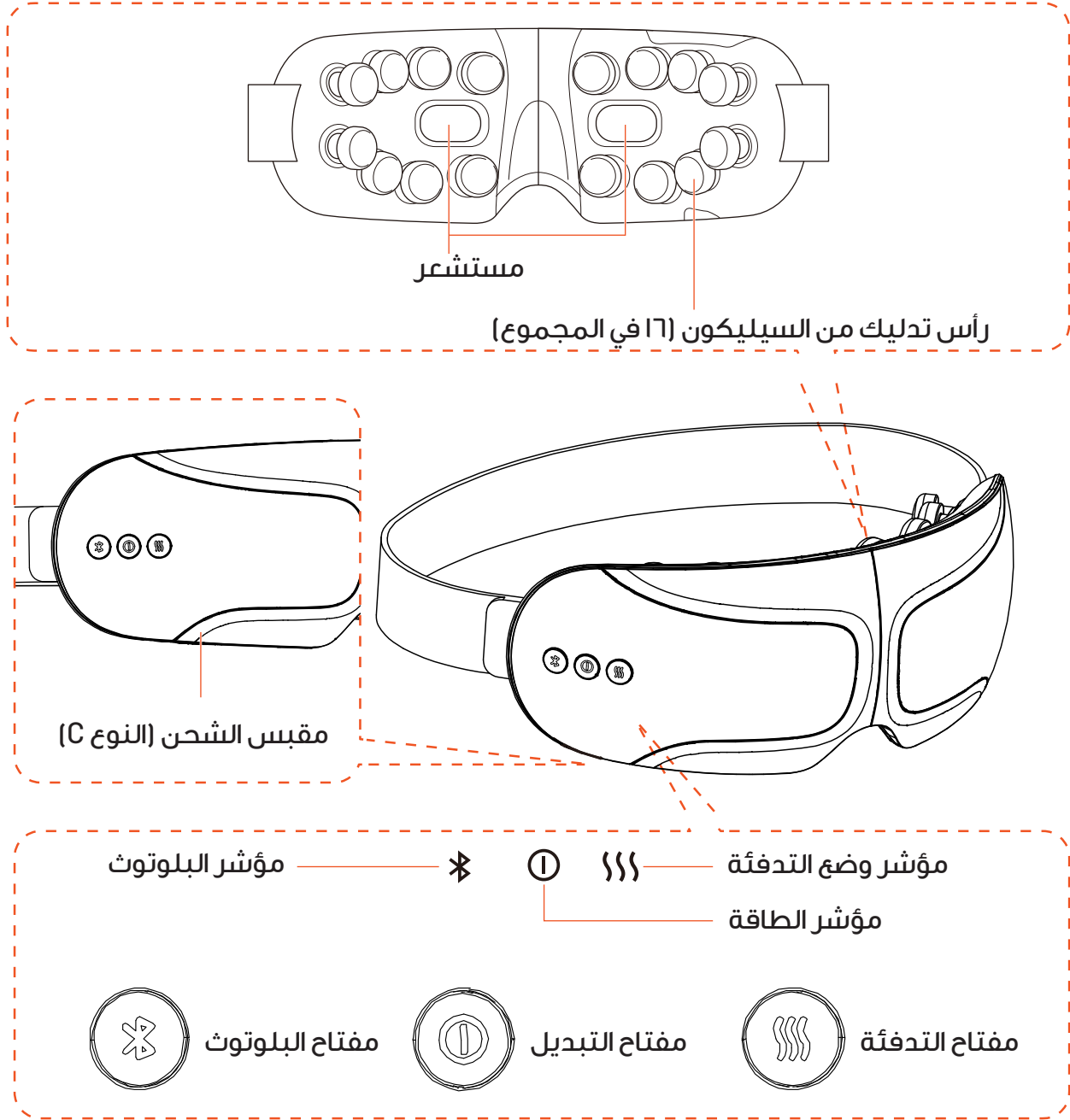

## تعليمات الاستخدام


١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح (⏻) لتشغيل الجهاز. سيظل المؤشر الموجود أعلى المفتاح مضاءً بمجرد تنشيط الجهاز.
٢. اضغط لفترة قصيرة على مفتاح (⏻) للتبديل بين أوضاع التدليك. الوضع الافتراضي هو وضع الاسترخاء، مع تمكين وظيفة العلاج بالحرارة للعين.
٣. يوفر جهاز تدليك العين خمسة أوضاع تدليك مميزة: وضع الاسترخاء، ووضع تجميل العين، ووضع السكون، والوضع الشامل، ووضع التسخين.

- الوضع ١:** وضع الاسترخاء - يتميز بالاهتزاز والموسيقى والعلاج بالحرارة للعين. يعلن موجه صوتي عن تنشيط وضع الاسترخاء.
- الوضع ٢:** وضع تجميل العين - يتضمن الاهتزاز والموسيقى والعلاج بالحرارة للعين. يعلن موجه صوتي عن تنشيط وضع تجميل العين.
- الوضع ٣:** وضع السكون - يوفر الاهتزاز والموسيقى والعلاج بالحرارة للعين. يعلن موجه صوتي عن تنشيط وضع السكون.
- الوضع ٤:** الوضع المتكامل - يتضمن الاهتزاز والموسيقى والعلاج بالحرارة للعين. يعلن موجه صوتي عن تنشيط الوضع المتكامل.
- الوضع ٥:** وضع التسخين - يعمل بالعلاج الساخن فقط، بدون اهتزاز أو موسيقى. يصدر صوت تنبيه لتفعيل وضع التسخين.

## تعليمات البلوتوث والتدفئة

اضغط لفترة قصيرة على مفتاح ( ✖ ) لتشغيل الموسيقى أو إيقاف تشغيلها.  
اضغط لفترة قصيرة على مفتاح ( >>> ) لتنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة التسخين.  
**ملاحظة:** لا يمكن استخدام مفتاح ( >>> ) في وضع التسخين.

اضغط لفترة طويلة على مفتاح ( ✖ ) لتمكين وضع البلوتوث. اسم البلوتوث الخاص بالجهاز هو "3DEYEMAGIC TAPPING". بمجرد تمكين البلوتوث، يمكن اكتشافه على الهاتف المحمول.

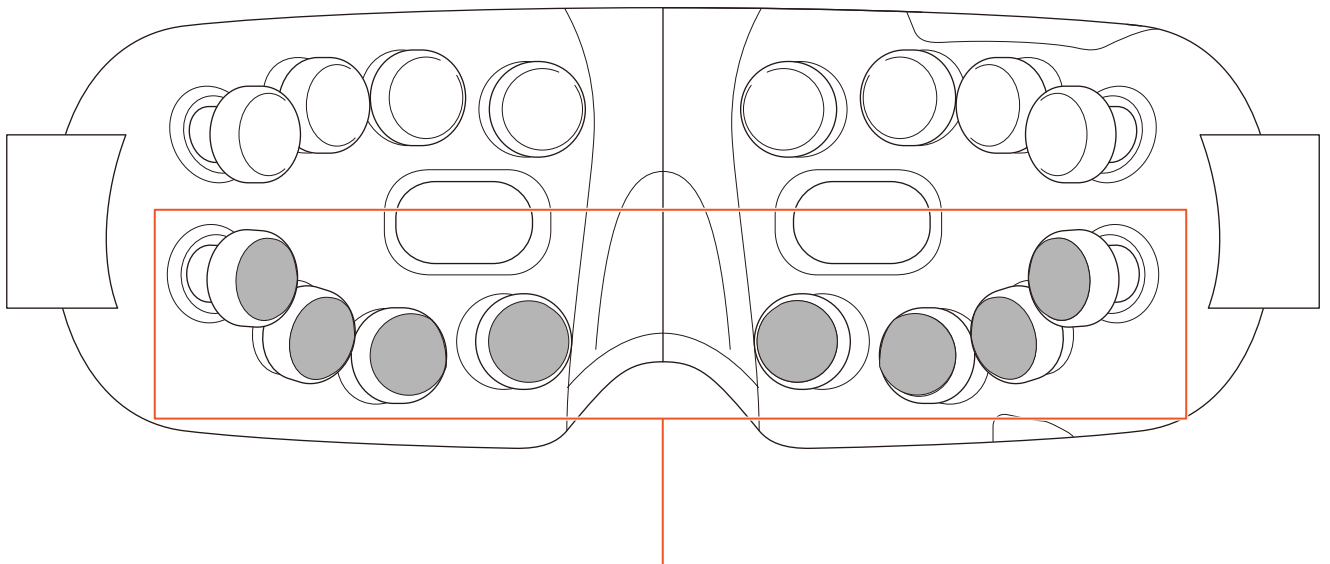


### ملاحظة

١. وقت التشغيل الافتراضي هو ١٥ دقيقة.
٢. لتمديد وقت الاستخدام، أعد تشغيل الجهاز بعد إيقاف تشغيله.

## طريقة الارتداء

قبل الاستخدام، قم بمحاذاة رأس التدليك مع عينيك واضبط الحزام المطاطي على وضع مريح قبل تشغيل الجهاز. يتم توضيح طريقة ضبط الحزام المطاطي.

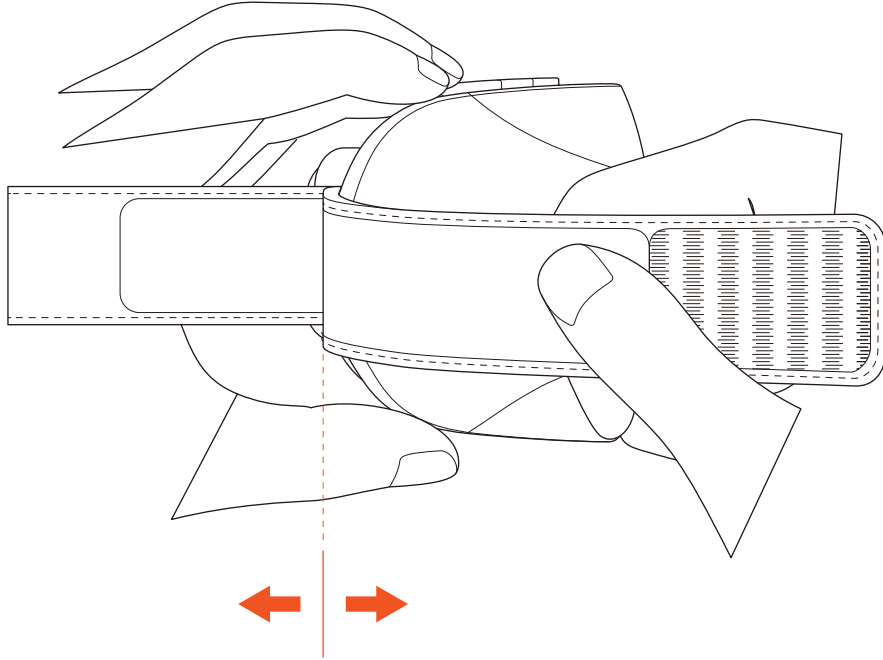


## تعليمات الشحن

إذا كنت تستخدم الجهاز لأول مرة أو بعد فترة طويلة من عدم النشاط، فاتبع الخطوات التالية لشحنه:

١. قم بتوصيل كابل USB المرفق بمقبس الشحن الموجود في الجانب الأيسر السفلي من الجهاز.
٢. قم بتوصيل كابل USB بمحول طاقة وتوصيله بمصدر طاقة.
٣. بمجرد بدء الشحن، سيومض مؤشر الضوء الأحمر الموجود أعلى مفتاح الطاقة.
٤. عند الشحن الكامل، يتحول المؤشر إلى اللون الأزرق الثابت وينطفئ تلقائيًا بعد ٣ دقائق إضافية. افصل الجهاز بعد شحنه بالكامل.

### ملاحظة:

١. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن.
٢. سيومض المؤشر الأزرق عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. قم بشحن الجهاز على الفور عند حدوث ذلك.

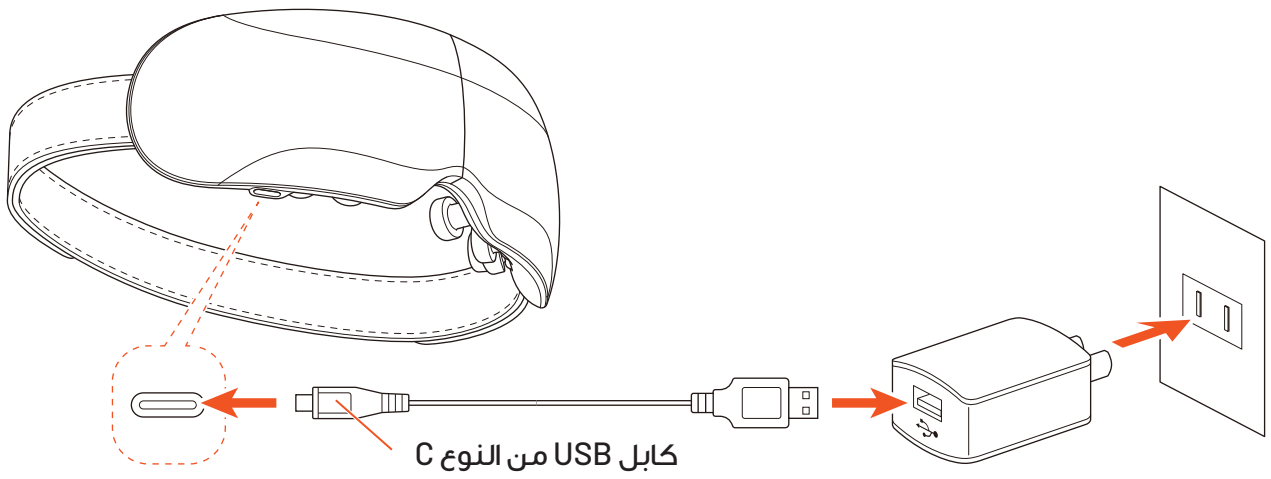

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السبب المحتمل والحل	
<p>١. تأكد من أن الجهاز مزود بطاقة كافية قبل التشغيل.</p> <p>٢. تأكد من الضغط على زر الطاقة والاستمرار في الضغط عليه لمدة ثانية واحدة على الأقل لبدء تشغيل الجهاز بشكل صحيح.</p>	لا يبدأ الجهاز بعد الضغط على زر الطاقة.
<p>١. إذا لم يبدأ تشغيل الجهاز في درجات حرارة عالية للغاية، فقم بشحنه في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين ١٠ درجات مئوية و ٤٠ درجة مئوية.</p> <p>٢. تأكد من توصيل كابل USB ومحول الطاقة بشكل صحيح.</p> <p>٣. عند استخدام الجهاز لأول مرة أو بعد فترات طويلة من عدم النشاط، قم بشحنه بالكامل قبل الاستخدام.</p> <p>٤. لا يمكن شحن الجهاز أثناء تشغيله. قم بإيقاف تشغيله قبل الشحن.</p>	لا يمكن الشحن أو عمر البطارية قصير.
<p>١. يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة من الاستخدام، وهو أمر طبيعي. أعد تشغيله إذا لزم الأمر الاستمرار في الاستخدام.</p> <p>٢. إذا كان جهاز تدليك العين في حالة طاقة منخفضة، فقم بشحنه قبل الاستخدام.</p>	يتوقف الجهاز بشكل غير متوقع أثناء الاستخدام.
<p>١. تأكد من أن المسافة بين الجهاز وجهاز البلوتوث أقل من متر واحد.</p> <p>٢. تأكد من تمكين وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك.</p> <p>٣. للحصول على إعدادات البلوتوث الإضافية، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.</p>	مشاكل اقتران البلوتوث.
<p>١. قم بزيادة مستوى صوت جهاز البلوتوث.</p> <p>٢. تأكد من عدم وجود أي عوائق بين الجهاز وجهاز البلوتوث، واحرص على إبقاء الجهازين قريبين من بعضهما البعض.</p>	لا يوجد صوت بعد إنشاء اتصال بلوتوث.



١. اخفض مستوى صوت جهاز البلوتوث إذا لزم الأمر.	صوت مشبوه أو ضوضاء أو انقطاع اتصال بلوتوث.
٢. تجنب أفران الميكروويف وأجهزة التوجيه اللاسلكية وأجهزة التلفاز وأجهزة الراديو والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي قد تتداخل مع إشارة البلوتوث.	
٣. أوقف تشغيل إعدادات المعادل على جهاز البلوتوث.	
٤. تأكد من أن الجهاز قريب من جهاز البلوتوث للحصول على اتصال مستقر.	
٥. تأكد من أن الجهاز وجهاز البلوتوث مشحونان بالكامل.	

**ملاحظة:** إذا استمرت المشكلة بعد اتباع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فأوقف تشغيل الجهاز واتصل بمركز الخدمة للحصول على مزيد من المساعدة.

## الصيانة والتخزين

### أ. طريقة الصيانة

١. افصل دائمًا كبل الطاقة أو السلك قبل إجراء الصيانة.
٢. لا تستخدم المنظفات أو المخففات أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى للتنظيف.
٣. عندما يتسخ الجهاز، امسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة أو منشفة. لا تغسله بالماء الجاري أو السوائل الأخرى.
٤. بعد كل استخدام، نظف رأس التدليك. إذا كان متسخًا بشكل خاص، استخدم قطعة قماش ناعمة مغموسة في كمية صغيرة من المنظف المعتمد طبياً لمسحه أو تطهيره.
٥. لا تفكك المنتج أو تصلحه أو تعدله دون إذن لتجنب الحوادث أو الأعطال.

### ب. طريقة التخزين

١. افصل مصدر الطاقة قبل تخزين الجهاز.
٢. احفظ المنتج بعيدًا عن المناطق الرطبة وأشعة الشمس المباشرة.
٣. إذا لم يكن قيد الاستخدام لفترة طويلة، فقم بشحن الجهاز بالكامل، ووضعه في كيس تخزين، وتخزينه في منطقة جافة وجيدة التهوية.
٤. قم بتخزين الجهاز في مكان لا يستطيع الأطفال والحيوانات الأليفة الوصول إليه.
٥. لا تقم بطي الجهاز للتخزين، حيث أن الطي لفترة طويلة قد يسبب التجاعيد أو التلف.
٦. تجنب وضع الجهاز على القماش أو المنتجات الورقية أو الأثاث الخشبي الذي قد يبهت لونه أو يتلف.

مادة خطرة						اسم القطعة
ثنائي الفينيل متعدد البروم إيثر PBDE	مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم PBB	الكروم السداسي التكافؤ Cr(VI)	الكاديوم Cd	الزئبق Hg	الرصاص Pb	
○	○	○	○	○	X	الأجهزة
○	○	○	○	○	○	الأجزاء البلاستيكية
○	○	○	○	○	X	لوحة الدائرة
○	○	○	○	○	X	حزمة البطارية
○	○	○	○	○	X	الملحق

0: محتوى المواد الضارة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من الحد المحدد في 26572 GB/T.

X: محتوى المواد الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المكون يتجاوز الحد المحدد في 26572 GB/T.



1. يحتوي هذا المنتج الإلكتروني على عناصر خطرة معينة ولكن يمكن استخدامه بأمان خلال فترة الحماية البيئية التي تبلغ 10 سنوات من تاريخ التصنيع.

2. خلال هذه الفترة، يرجى استخدام المنتج وفقًا لدليل المستخدم لضمان التشغيل السليم والأمان.

3. لا تغطي فترة الحماية البيئية الأجزاء المعرضة للخطر مثل البطاريات، والتي قد تتطلب الاستبدال بمرور الوقت.

### ملاحظة:

1. لا تحتوي المكونات والمواد المتجانسة الأخرى غير المدرجة في الجدول أعلاه على مواد ضارة.
2. تتوافق جميع المكونات والمواد المتجانسة التي تحتوي على مواد خطرة في الجدول أعلاه مع لوائح RoHS في الصين، والتي تقيد استخدام المواد الضارة. لا تتردد في استخدامها بأمان.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

### تحذير سلامة البطارية ⚠

١. قبل إزالة البطارية، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
٢. لا تقم بقصر دائرة البطارية لتجنب أخطار الاحتراق أو الحريق.
٣. لا تعرض البطارية أبدًا للحريق لتجنب الانفجارات المحتملة أو إطلاق المواد السامة.
٤. إجراء إزالة البطارية:
  - ٤.١ استخدم أداة لفتح غلاف الجهاز.
  - ٤.٢ فك البراغي التي تثبت لوحة الدائرة.
  - ٤.٣ استخدم المقص لقص أسلاك الطرف الموجب والسالب للبطارية واحدًا تلو الآخر. تأكد من عدم تلامس الأطراف لتجنب حدوث ماس كهربائي.
  - ٤.٤ قم بإزالة البطارية بعناية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**