

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**

**إزالة الشعر بتقنية IPL**


SKU: PD-LFST113

٢	محتويات الحزمة
٢	منظر تخطيطي
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	مبدأ تشغيل جهاز IPL
٤	المواصفات
٥	تعليمات الاستخدام
٦	لون البشرة والشعر المناسب
٦	أجزاء الجسم المناسبة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	الأسئلة الشائعة
١٠	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١١	اتصل بنا




في النهاية. بعد استخدام الجهاز لمدة ٨ أسابيع تقريبًا، يمكن تحقيق النتائج المرجوة.

يساعد تفعيل وضع التبريد بالثلج على تخفيف الحرق والتهيج أثناء التشغيل، مما يوفر تجربة خالية من الألم. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة سرعة الوميض مما يسمح لك بتحرير يدك للحصول على علاج أكثر كفاءة.

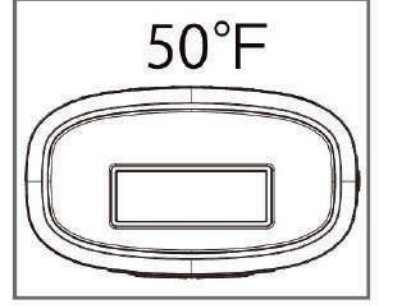

جهاز إزالة الشعر متعدد الوظائف هو منتج تجميلي مبتكر مصمم لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه بشكل فعال وآمن، وتنعيم البشرة، وتقليل علامات حب الشباب. إنه يستخدم تقنية إشعاع الضوء النبضي الذكي جنبًا إلى جنب مع تقنية بصرية متقدمة للعناية بالجمال مما يجعله أحد أكثر المنتجات احترافية وعملية في هذا المجال.

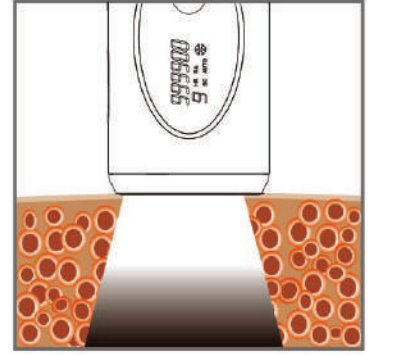


يرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام. الهدف الأساسي لجهاز إزالة الشعر هو ضمان راحة المستخدم وسلامته. يرجى قراءة جميع تعليمات التشغيل واحتياطات السلامة والتحذيرات بعناية قبل الاستخدام.


## مبدأ عمل جهاز IPL

باستخدام تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، يتم تطبيق نبضات خفيفة من الضوء على الجلد ويتم امتصاصها بواسطة جذور الشعر. كلما كانت البشرة أفتح والشعر أغمق كلما تم امتصاص نبضات الضوء بشكل أفضل. تحفز هذه النبضات الضوئية بصيلات الشعر على الدخول في مرحلة الراحة، مما يتسبب في تساقط الشعر بشكل طبيعي ومنع نمو المزيد من الشعر.


**ملاحظة:** استخدم الجهاز لمدة 8 أسابيع لإكمال العلاج.

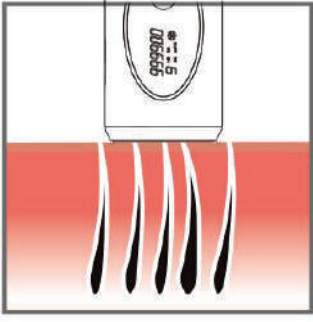

البداية (من ١ إلى ٤ أسابيع):  
عالج مرتين في الأسبوع خلال  
الأسابيع الأولى إلى الأربعة  
أسابيع الأولى.

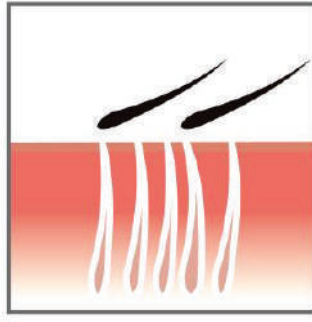

فيما بينهما (من ٥ إلى ٨ أسابيع):  
استمر في العلاجات الأسبوعية من  
الأسابيع ٥ إلى ٨.

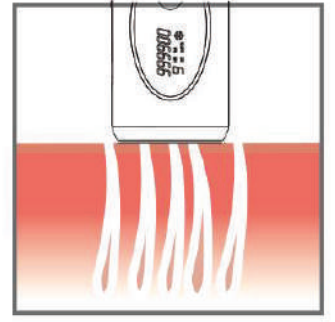


الصيانة (بعد ٨ أسابيع): استمر  
في استخدام IPL بناءً على احتياجاتك  
باستخدام الجهاز كل شهر إلى  
شهرين.

## المواصفات

الجهود المقدرة	١٠٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠٠/٦٠ هرتز
قابس الطاقة	قابس ثلاثي السنون من المملكة المتحدة
الطاقة المقدرة	٣٦ وات
مستوى الضوضاء	٦٥ ديسيبل
مساحة خرج الضوء	٣ سنتيمتر مربع
مصدر الضوء	ضوء نبضي IPL
مستوى الطاقة	٩ مستويات قابلة للتعديل
نطاق موجة خرج الضوء	٦٠٠ إلى ١٢٠٠ نانومتر
درجة حرارة العمل	٥ إلى ٢٨ درجة مئوية
وقت خرج الضوء	١ إلى ٣ ثوانٍ
الوزن الصافي للمنتج	٢٤٥ جرامًا
حجم المنتج	١٧٠×٦٨×٣٨ مم




١. اخلق الشعر قبل كل علاج للحصول على نتائج أفضل.

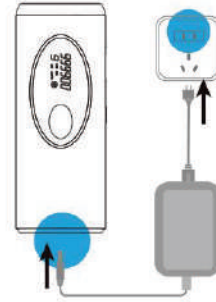


٢. قم بتوصيل مصدر الطاقة بالجهاز.




٣. ارتدِ نظارات واقية لحماية عينيك. ملاحظة: لا تنظر مباشرة إلى الفلاش.

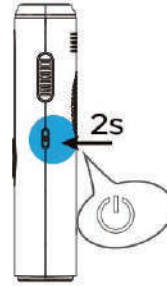

٤. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز. سيضيء مؤشر الطاقة وسيبدأ الجهاز في العمل على المستوى ١.

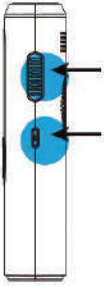


٥. اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف لضبط مستوى الطاقة من ١ إلى ٩.

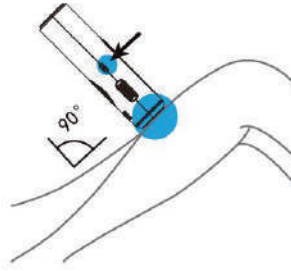

٦. أمسك الجهاز عمودياً بالقرب من الجلد، مع التأكد من الضغط عليه على الجلد. بعد اكتشاف الجلد، يتغير العرض على الشاشة وسيشير عدد الشعر المستمر إلى أن الجهاز جاهز للاستخدام.




٧. اضغط على زر الفلاش لإطلاق الفلاش. للتبديل بين الوضع التلقائي والوضع اليدوي، اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ. اضغط مرتين على زر الفلاش للتبديل إلى وضع HR/RA/SC.

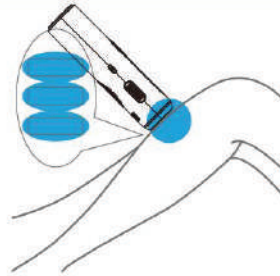

٨. عند استخدام جهاز إزالة الشعر قم بالتمرير إلى المنطقة التالية التي تحتاج إلى العلاج. قم بزيادة المستوى تدريجياً ضمن النطاق الموصى به، وتجنب وميض نفس المنطقة الجلدية عدة مرات.



٩. اضغط لفترة طويلة على زر "الطاقة" لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز. لا تفصل الجهاز أبدًا أثناء تشغيله لتجنب التلف المحتمل.

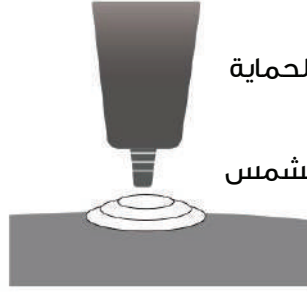

١٠. ضع مستحضر العناية بالبشرة لحماية بشرتك بعد العلاج. ملاحظة: تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ٢٤ ساعة بعد إزالة الشعر.

## لون البشرة والشعر المناسب

حدد مستوى الشدة المناسب لعلاجك. يرجى الرجوع إلى الجدول لتحديد مستوى الشدة الذي يناسب لون بشرتك ولون شعرك، وتأكد من أن المنتج مناسب لاحتياجاتك المحددة.


لون البشرة / لون الشعر						
						أبيض/رمادي
X	X	X	X	X	X	أشقر فاتح
X	X	X	X	X	X	أحمر
✓	✓	✓	✓	X	X	أشقر غامق/ بني فاتح
✓	✓	✓	✓	X	X	بني
✓	✓	✓	✓	X	X	بني غامق
✓	✓	✓	✓	X	X	أسود

## أجزاء الجسم المناسبة

**للنساء:** مثالي للاستخدام من الرأس إلى القدمين، بما في ذلك مناطق مثل الشفة العليا والذقن وتحت الإبطين والساقين والذراعين ومنطقة bikini.

**للرجال:** مثالي لعلاج شعر الصدر والظهر والذراعين والبطن والساقين.

**ملاحظة:** تعتمد أوقات إزالة الشعر الموصى بها المذكورة أعلاه على الأبحاث والاختبارات. قد تختلف أوقات إزالة الشعر الفردية من شخص لآخر.

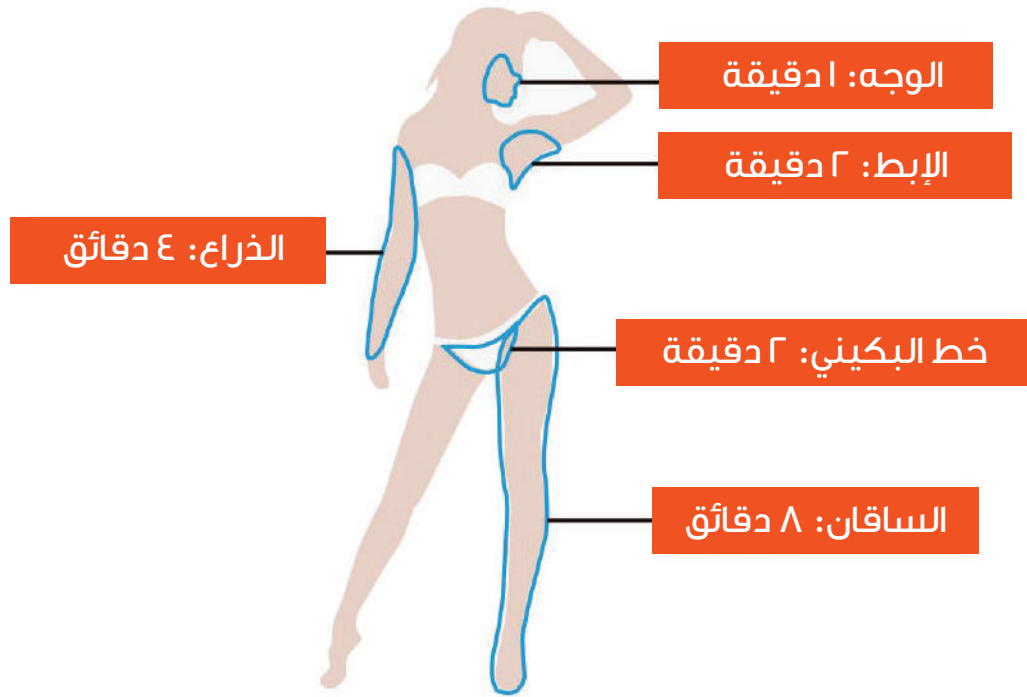

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يسخن المحول أو جهاز إزالة الشعر أثناء الاستخدام.	التشغيل العادي	لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
يتم تشغيل الجهاز، ولكن لا يمكن زيادة أو تقليل مستوى الكثافة.	يجب إعادة ضبط الجهاز.	لإعادة تشغيل جهاز إزالة الشعر، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطاقة ثم تشغيله مرة أخرى. إذا كنت لا تزال غير قادر على ضبط شدة الضوء يرجى الاتصال بالبائع.
بعد تشغيل الجهاز، لا يمكنه إصدار الضوء بشكل طبيعي عند وضعه على الجلد.	الجهاز غير موضوع عمودياً بزاوية ٩٠ درجة على الجلد.	بمجرد وضع الجهاز عمودياً بزاوية ٩٠ درجة على الجلد، ستومض الأرقام الموجودة على شاشة LED، مما يشير إلى أن الجهاز جاهز للاستخدام مع وضع الفلاش العادي.
بعد فترة طويلة من الاستخدام تتوقف الأرقام الموجودة على شاشة LED فجأة عن الوميض، ولكن مروحة التبريد تعمل بشكل طبيعي.	تم تنشيط نظام الحماية من الحرارة الزائدة مما أدى إلى تعليق الوظيفة مؤقتاً. تستمر المروحة في العمل لتبديد الحرارة.	لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور؛ اتركه يبرد لمدة دقيقة قبل الاستمرار في استخدامه. إذا كان لا يزال لا يومض بعد التبريد، فحاول إعادة تشغيله.



أعد تشغيل الجهاز. إذا لم يتم الوميض بعد إعادة التشغيل الثانية، فيرجى الاتصال بالبائع للحصول على دعم ما بعد البيع.	تم الكشف عن فشل في نظام المعدات.	تومض الأرقام الموجودة على شاشة LED، ولكن لا يتم إصدار أي فلاش عند الضغط على زر الفلاش.
إذا كان لا يزال هناك شعر في المنطقة التي تحتاج إلى إزالتها، فقد يحترق عند استخدام هذا المنتج، مما يتسبب في رائحة غير طبيعية. يرجى التأكد من إزالة الشعر قبل الاستخدام.	لم تقم بإزالة الشعر قبل الاستخدام.	الشعور بالألم لا يطاق عند استخدام هذا المنتج.
بالنسبة للاستخدام لأول مرة، يوصى بالبدء بأدنى إعداد للترس ثم زيادته تدريجيًا إلى مستوى مريح.	مستوى طاقة الضوء المحدد مرتفع للغاية.	
لا ينبغي استخدام هذا المنتج على المناطق الخاصة مثل المهبل أو الحلمات أو كيس الصفن.	هذه المنطقة غير مناسبة لاستخدام الجهاز.	
جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL هو الأنسب لدرجات البشرة الفاتحة والشعر البني إلى الداكن. غير مناسب للبشرة السوداء. غير مناسب للشعر الأشقر أو الأحمر أو الرمادي أو الأبيض.	هذا الجهاز غير متوافق مع لون شعرك أو لون بشرتك.	
لا يتطلب أي إجراء آخر.	الاحمرار البسيط هو رد فعل طبيعي غير ضار بجسم الإنسان وسيختفي قريبًا.	أصبحت المنطقة المطبقة عليها حمراء بعد استخدام مزيل الشعر.
قم بإجراء اختبار للجلد لتحديد ما إذا كان بإمكانك استخدام شدة ضوء أعلى.	شدة الضوء المحددة منخفضة للغاية.	لا توجد نتائج مرئية بعد الاستخدام.
تردد الاستخدام الموصى به: الأسابيع ٤-١: استخدميه مرتين في الأسبوع. الأسابيع ٨-٥: استخدميه مرة واحدة في الأسبوع. بعد ٨ أسابيع: استخدميه مرتين إلى مرة واحدة في الشهر.	للحصول على نتائج أفضل، اتبع التوصيات التجريبية التالية:	
احلق الشعر الموجود على سطح الجلد قبل كل علاج للحصول على نتائج أفضل.	لم يتم حلاقة الشعر قبل الاستخدام.	

إذا واجهت أي مشاكل، يرجى الاتصال بالبائع للحصول على المساعدة.	هذا المنتج لديه عيوب موجودة.	المنتج لا يعمل بشكل صحيح.
--	------------------------------	---------------------------

## الأسئلة الشائعة

أسئلة	إجابة
هل هذا المنتج آمن للاستخدام من قبل النساء الحوامل والأطفال؟	لم يتم اختبار جهاز إزالة الشعر هذا على النساء الحوامل أو القُصّر. لذلك، لا يُوصى باستخدامه للنساء الحوامل أو الأطفال.
هل يعمل جهاز إزالة الشعر بالليزر على الشعر الأشقر؟	كيفية عمل إزالة الشعر بتقنية IPL تُصدر أجهزة إزالة الشعر بتقنية IPL نبضات ضوئية تستهدف الميلانين في الشعر. يمتص الميلانين الضوء، مما يولد حرارة تمنع نمو الشعر مرة أخرى بمرور الوقت. بدون الميلانين، تكون هذه العملية غير فعالة. لذلك، فإن تقنية IPL غير مناسبة للشعر الأشقر أو الرمادي أو الأبيض.
هل أحتاج إلى حلاقة الشعر غير المرغوب فيه قبل كل علاج، أم فقط في المرة الأولى؟	يشتمل جهاز IPL هذا على ماكينة حلاقة. للحصول على أفضل النتائج، احلق الشعر غير المرغوب فيه قبل كل علاج، وليس فقط في المرة الأولى.
هل من الآمن استخدامه فوق الوشم؟	لا ينبغي استخدام تقنية إزالة الشعر IPL على الوشم.
كم مرة يجب أن أخضع للعلاج؟	جدول العلاج الموصى به: الأسابيع ٤-١: استخدم مرتين في الأسبوع. الأسابيع ٨-٥: استخدم مرة واحدة في الأسبوع. بعد ٨ أسابيع: استخدم مرتين إلى مرة واحدة في الشهر.

<p>إزالة الشعر بتقنية IPL لمنطقة البكيني: يمكن استخدام تقنية IPL لإزالة الشعر لمنطقة البكيني. تجنبى علاج منطقة الأعضاء التناسلية حيث لا ينصح بذلك. يعد علاج البكيني بالكامل خيارًا متاحًا، ولكن هذا لا يشمل إزالة الشعر البرازيلي بالكامل.</p>	<p>هل من الآمن استخدام هذا الجهاز للحصول على علاج برازيلي كامل، بما في ذلك منطقة البكيني بالكامل؟</p>
--	---

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**