



Green Lion

**فرشاة أسنان سونيك برو القابلة
للإعادة الشحن**

SKU: GNGTB14TBRR

Model No: GTB-14

٢	احتياطات السلامة
٢	تحذير
٣	ملاحظة
٤	عناصر
٥	شحن فرشاة الأسنان
٥	تعليمات الشحن
٥	التعليمات
٦	نمط التنظيف
٦	وصف الوظيفة
٧	تنظيف الجهاز ورأس الفرشاة
٧	مقاومة للماء
٧	التخلص من المنتجات
٨	المواصفات
٩	التخلص
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

احتياطات السلامة

لتقليل مخاطر الفشل، والصدمات الكهربائية، والإصابات، والكوارث، والوفاة، وفقدان المعدات أو الممتلكات، يجب مراعاة احتياطات السلامة التالية.

 تُستخدم هذه العلامة لتذكير المستخدم بخطوات التشغيل المحظورة.	 خطر خطر محتمل للإصابة الشديدة أو الوفاة.
 تُستخدم هذه العلامة لتذكير المستخدم بخطوات التشغيل التي يجب اتباعها لتشغيل المنتج بأمان.	 تحذير خطر محتمل للإصابة الشديدة أو الوفاة.
	 ملاحظات خطر محتمل للإصابة البسيطة.

يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة. لا تضعه في النار للتسخين أو الشحن في درجات حرارة عالية، وإلا فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.

تحذير

في حال وجود أي خلل أو عطل، يُرجى التوقف عن الاستخدام فوراً وفصل قابس الطاقة. وإلا، فقد تُصاب بصدمة كهربائية أو إصابة.

«حالة عطل غير طبيعية»

تشوه أو ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو الشاحن بشكل غير طبيعي.

تصدر رائحة احتراق من الجهاز أو الشاحن.

تصدر أصواتاً غير طبيعية أثناء الاستخدام أو الشحن.

تأكد من أن جهد تشغيل الشاحن مُطابق لجهد المصنّف، ويجب إدخال قابس الطاقة بإحكام من جذوره.

والا، فقد يُسبب حريقاً أو صدمة كهربائية.

نظف قابس الطاقة بانتظام لمنع تراكم الغبار.

والا، فقد تُسبب الرطوبة تلفاً في العزل، مما يؤدي إلى حريق.

يرجى فصل قابس الطاقة ومسحه بقطعة قماش جافة.

هذا المنتج غير مُناسب للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من لديهم خبرة ومعرفة محدودة (بما في ذلك الأطفال).

يجب على الأوصياء الإشراف على استخدام هذا المنتج وتوجيهه، وأن يكونوا مسؤولين عن سلامة المستخدمين.

يرجى منع الأطفال من التعامل مع هذا المنتج كلعبة.

والا، فقد يتسبب ذلك في وقوع حادث أو إصابة.

في حال تلف سلك الطاقة الخاص بالشاحن، يُعتبر الشاحن بأكمله مُخرَدًا ويجب استبداله.

والا، فقد يتسبب ذلك في وقوع حادث أو إصابة.

لا تُفكّك المنتج إلا عند التخلص منه.

والا، فقد يُسبب ذلك حريقًا أو صدمة كهربائية أو إصابة.

لا تُخزّنه في متناول الأطفال والرضع.

لا تدع الأطفال والرضع يستخدمونه.

والا، فقد تحدث حوادث أو إصابات نتيجة التركيب غير الدقيق للأجزاء المتحركة.

لا تستخدم شواحن غير تلك المُرفقة.

لا تستخدم الشاحن المُرفق لشحن منتجات أخرى.

والا، فقد يُسبب ذلك حروقًا أو حريقًا بسبب ماس كهربائي.

ملاحظة

إذا لم تستخدم هذا المنتج لفترة طويلة، يُرجى فصل قابس الطاقة من مقبس الكهرباء المنزلي. والا، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب كهربائي بسبب ضعف أداء العزل، مما قد يسبب صدمة كهربائية أو حريقًا.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة الشديدة، أو تاريخ مرضي في الأسنان، أو يُشتبه في إصابتهم بأمراض الفم، استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

والا، فقد تتضرر الأسنان أو اللثة.

لا تستخدم فرشاة الأسنان هذه مع الأسنان التي تحتوي على الكثير من عوامل الاحتكاك، مثل معجون الأسنان لإزالة بقع التبغ أو معجون الأسنان المبيض.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية فموية منخفضة عدم استخدام فرشاة الأسنان هذه. لا تضغط رأس الفرشاة على الأسنان أو اللثة، أو تنظف أي جزء منها لفترة طويلة. لا تجعل الجهاز أو الأجزاء البلاستيكية من رأس الفرشاة تلامس الأسنان.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في تلف الأسنان أو اللثة. لا تشارك رأس الفرشاة مع أفراد عائلتك أو الآخرين، فقد يسبب ذلك عدوى أو التهابًا. لا تضع أشياء غريبة، مثل العملات المعدنية أو مشابك الورق، على الشاحن. وإلا، فقد تتراكم الترسبات الكلسية نتيجة ارتفاع درجة حرارة هذه المواد الكيميائية.

قبل التخلص من فرشاة الأسنان الكهربائية، يجب إزالة البطارية منها؛ وعند إزالتها، تأكد من أنها في وضع إيقاف التشغيل؛ ويجب التخلص من البطارية بشكل آمن.

عناصر



شحن فرشاة الأسنان

إذا توقفت فرشاة الأسنان عن العمل أثناء الاستخدام الأول (سواءً كانت حديثة الشراء أو لم تُستخدم لمدة ٣ أشهر أو أكثر)، أو إذا أضاء مؤشر الشحن الأحمر عند الاستخدام، يُرجى شحن الجهاز.

تتراوح درجة الحرارة المحيطة المناسبة للشحن بين ٥ هـ و ٣٥ درجة مئوية. عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، لا يمكن شحن البطارية بشكل طبيعي أو لا يمكن شحنها على الإطلاق.

أثناء الاستخدام والشحن، قد يسخن المنتج، وهذا أمر طبيعي.

تعليمات الشحن

الشحن عبر USB: يُوصل قابس Type-C الخاص بكابل الشحن بفرشاة الأسنان، ويُوصل طرف USB بمصدر طاقة هـ فولت (مثل بنك الطاقة، أو منفذ USB في الكمبيوتر، إلخ).

مدة الشحن: من ساعة إلى ٦ ساعات

حالة الشحن: يومض مؤشر الشحن.

اكتمل الشحن: يضيء المؤشر عند اكتمال الشحن.

تذكير بانخفاض الجهد: يومض المؤشر عند الاستخدام.

التعليمات

١. يُرجى إدخال رأس الفرشاة بإحكام في عمود رأس الفرشاة. قد يؤدي تركيب أو إزالة رأس الفرشاة بشكل مائل أو ملتوي إلى تلف رأس الفرشاة أو الجهاز.


تحت تأثير قوة خارجية، يتحرك عمود رأس الفرشاة، وهو أمر طبيعي أثناء التشغيل. توجد فجوة صغيرة بين رأس فرشاة الأسنان والجهاز، وهو أمر طبيعي.

٢. ضع فرشاة الأسنان في فمك.

٣. قبل الفتح، وإذا لزم الأمر، ضع معجون الأسنان فقط على رأس الفرشاة لمنع تناثر المعجون. اضغط على زر الترس لاختيار الوضع.

في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الترس، يتم تبديل الوضع مرة واحدة. عند الضغط على رأس الفرشاة بقوة شديدة على الأسنان، قد يزداد الصوت، ولكن هذا ليس عيبًا. يُرجى وضع رأس الفرشاة برفق على الأسنان.

٤. يرجى فصل مصدر الطاقة بعد تنظيف أسنانك. عند إزالة رأس الفرشاة من فمك، يُرجى إغلاق مصدر الطاقة لتجنب تآثر رغوة معجون الأسنان.

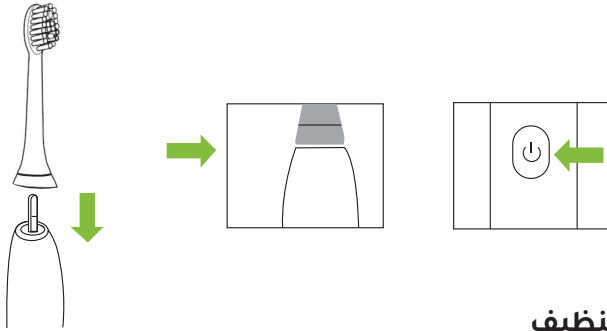


نمط التنظيف

وضع التنظيف: الوضع القياسي للتنظيف اليومي والرضاعة.
وضع البياض: وضع البياض الساطع للتنظيف العميق.
وضع الراحة: وضع اهتزاز منخفض التردد لتدليك الأسنان.

وصف الوظيفة

وضع التشغيل
الاهتزاز الصوتي: أعلى تردد اهتزاز هو ٥٣٤٠٠ اهتزاز في الدقيقة.
وظيفة التوقيت
في ٤ مناطق من الفم، توقف مؤقتًا لمدة ٣٠ ثانية في كل مرة، ثم توقف مؤقتًا لمدة ٥٠ ثانية في المنتصف.
وظيفة الإيقاف التلقائي
بعد دقيقتين من التشغيل في كل مرة، سيتوقف الجهاز تلقائيًا.

نظف الجهاز ورأس الفرشاة

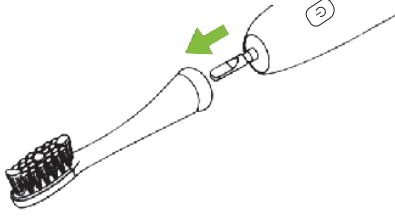

يُمنع الأطفال من القيام بأعمال التنظيف والصيانة.

يرجى فصل التيار الكهربائي وإزالة رأس الفرشاة قبل غسلها بالماء.


رأس الفرشاة

اشطف رأس الفرشاة بالماء الجاري.

رَجهَا للتخلص من الماء بعد التنظيف.

لا تُزل شعيرات رأس الفرشاة.

لا تغسلها بماء أعلى من ٨٠ درجة مئوية.

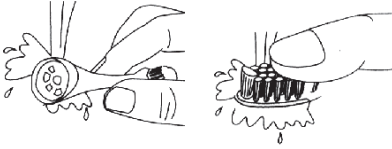

مقاومة للماء

تتميز هذه الآلة بخاصية مقاومة للماء، وهي غير موصلة للكهرباء.

يمكن استخدامها بأمان في الحمام.

التخلص من المنتجات

تأتي طاقة المنتج من بطاريات ليثيوم قابلة لإعادة التدوير. يُرجى إرساله إلى موقع إعادة التدوير أو التخلص القانوني المحلي، أو التخلص منه وفقاً للوائح حماية البيئة المحلية.

رقم الموديل	GTB-14
المادة	ABS
مادة الشعيرات	نايلون
البطارية	١٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
الطاقة	٢ واط
الجهد	٥ فولت
الاهتزاز	٣٤٠٠ نبضة في الدقيقة
التذبذب	٥٠ درجة مئوية
مقاوم للماء	IPX7
منفذ الشحن	USB-C
مدة الشحن	من ٢ إلى ٦ ساعات
مدة العمل	١٢٠ يومًا
رؤوس الفرشاة	٣ قطع
وزن المنتج	١٢٠ غرام
أبعاد المنتج	٩٢*٣٢*٢١ مم

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)