

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز تدليك الوجه والرقبة بالضوء
لتجديد البشرة

SKU: PDHY48WH

| | |
|---|--------------------------------------|
| ٢ | نظرة عامة على المنتج |
| ٢ | المواصفات |
| ٣ | مميزات المنتج |
| ٣ | تصميم المنتج |
| ٤ | دليل الصيانة |
| ٤ | احتياطات السلامة |
| ٥ | بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) |
| ٦ | التخلص من المنتج |
| ٦ | الضمان |
| ٦ | تواصل معنا |


جهاز تدليك الوجه والرقبة بالضوء من بورودو لايف ستايل هو جهاز تجديد شباب البشرة، مصمم لتعزيز روتين العناية بالبشرة بميزات متعددة. يوفر الجهاز تنظيفًا عميقًا بالأيونات لتنظيف شامل، واهتزازًا لشد البشرة وتقويتها، وعلاجًا بالتدليك الدافئ لتجربة مهدئة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم جهاز التدليك العلاج بالضوء بثلاثة أوضاع: البنفسجي والأزرق والأحمر، كل منها يستهدف مشاكل مختلفة للبشرة، مثل التهديئة والتلطيف، وتحسين لون البشرة، وتقليل الخطوط الدقيقة. مع أربعة مستويات سرعة قابلة للتعديل، يُعد هذا الجهاز سهل الاستخدام الأداة المثالية لكل من يتطلع إلى تحسين صحة بشرته ومظهرها.

المواصفات

| الطاقة المُصنَّفة | ٥ واط |
|-------------------|------------------------------------|
| المدخلات | تيار مستمر ٥ فولت/ ١ أمبير |
| سعة البطارية | ٤٥٠ مللي أمبير/ساعة |
| واجهة الشحن | نوع C |
| الأوضاع | ٣ أوضاع إضاءة (أزرق، أحمر، بنفسجي) |
| مدة الشحن | ٣ ساعات |
| حجم المنتج | ٧٣ × ٩٢ × ١٠ مم |
| وزن المنتج | ٢٠٠ غرام |
| رقم الموديل | PDHY٤٨ |

١. التنظيف العميق بالأيونات: ينظف بعمق لإزالة الشوائب وإنعاش البشرة.
٢. اهتزاز لشد البشرة: يشدّ البشرة ويشدّها لمظهر أكثر نعومةً وشبابًا.
٣. العلاج بالتدليك الدافئ: يُقدّم تدليكًا مُهدئًا ومريحًا لتعزيز حيوية البشرة.
٤. سهل الاستخدام: تشغيل بسيط للعناية بالبشرة بشكل مريح.
٥. وضع الضوء الأرجواني: يُهدئ البشرة ويُنعّمها، ويُحسّن الدورة الدموية ويُقلّل الانتفاخات للحصول على بشرة متوازنة.
٦. وضع الضوء الأزرق: يُساعد على توازن البشرة الدهنية، ويُشدّ المسام، ويُعزّز إنتاج الكولاجين لتعزيز حيوية البشرة.
٧. وضع الضوء الأحمر: يُسرّع الدورة الدموية، ويُعزّز الكولاجين، ويُشدّ البشرة مع تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.
٨. قابل لإعادة الشحن: مدة شحن ٣ ساعات لاستخدام طويل الأمد.
٩. شحن من النوع C: شحن سريع وفَعَال مع واجهة Type-C حديثة.

تصميم المنتج

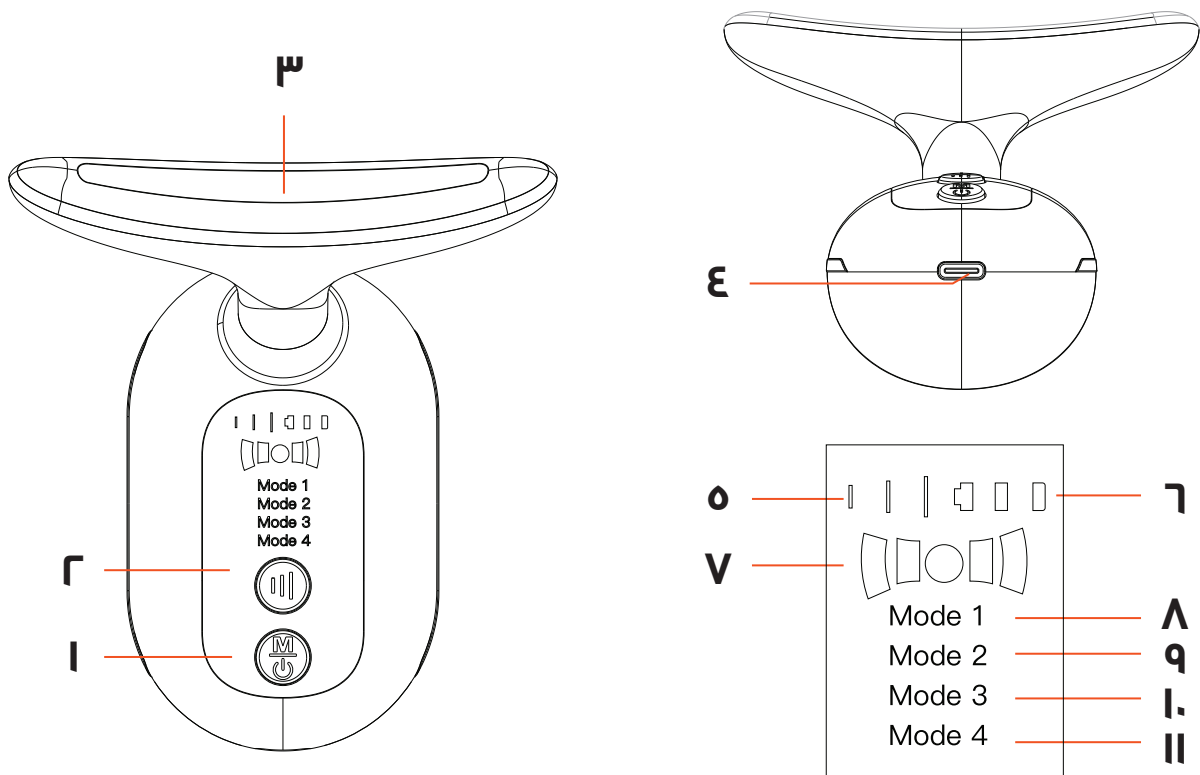

٦. شاشة عرض البطارية
٧. مؤشر العمل
٨. الوضع ١
٩. الوضع ٢
١٠. الوضع ٣
١١. الوضع ٤

١. زر التشغيل/الإيقاف: اضغط مطولاً للتشغيل/الإيقاف، اضغط لفترة قصيرة لتغيير الوضع.
٢. مفتاح الترس.
٣. ضوء ملون.
٤. منفذ شحن تيار مستمر.
٥. شاشة عرض الترس.

دليل الصيانة

١. خزن المنتج في بيئة جافة بدرجة حرارة الغرفة أو في علبة تخزين.
٢. تجنب الشحن الزائد للحفاظ على عمر البطارية.
٣. نظف المنتج بعد الشحن، وخزنه في علبته إذا لم يُستخدم لفترة طويلة.
٤. استخدم الكحول أو منظفًا مخففًا لمسح الجزء الخارجي من المنتج.
٥. قد يصبح الجهاز دافئًا قليلًا أثناء الاستخدام، وهذا أمر طبيعي.
٦. لا تشطف الجهاز بالماء مباشرةً.
٧. في حال عدم استخدامه لفترة طويلة، اشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر.

احتياطات السلامة

١. لا تستخدم هذا المنتج مع الأجهزة الطبية المزروعة، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، فقد يُسبب ذلك عطلاً في الجهاز أو يُشكل خطرًا.
٢. تجنب استخدام المنتج إذا كانت راحة يدك تعاني من أمراض جلدية مثل الجروح، أو الأكزيما، أو البثور، أو التقشير.
٣. لا تستخدم المنتج في المناطق عالية الرطوبة، مثل الحمامات.
٤. استخدم المنتج للغرض المخصص له فقط.
٥. لا تُفكك المنتج أو تُصلحه أو تُعدله دون إذن، فقد يُسبب ذلك عطلاً أو إصابة.
٦. أبقِ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن السادسة لتجنب الإصابات الشخصية.

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز. ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يُركّب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُحدد. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me