

PORODO



Porodo

جهاز تدليك قدم لاسلكي ساخن
علاج بالنقر والعجن

SKU: PDLFSTZMF026WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	عرض تخطيطي للمنتج
٥	محتويات العبوة
٥	تعليمات التشغيل
٦	مؤشر الشحن والضوء
٦	المحظورات
٦	احتياطات السلامة
٧	إشعارات مهمة
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

يوفر جهاز تدليك القدمين اللاسلكي المدفأ من بورودو تجربة استرخاء مريحة للأقدام المتعبة، حيث يجمع بين العلاج بالتريبت والعجن. صُمم الجهاز بتصميم مريح للقدم، ويوفر تجربة استخدام استثنائية مع ثلاثة أوضاع مخصصة ووظيفة تسخين لتعزيز الاسترخاء. يأتي جهاز تدليك القدمين هذا مزودًا بقوة ٢٤ واط، وببطارية بسعة ٢٥٠٠ مللي أمبير/ساعة، ومنفذ شحن USB-C لمزيد من الراحة. يعمل الجهاز بسرعات محرك قابلة للتعديل، تتراوح من ٢٣٤٠ إلى ٢٧٠٠ دورة في الدقيقة، ويضمن السلامة بفضل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي بعد ساعتين من الاستخدام. تصل درجة حرارة جهاز التدليك إلى ٤٢ درجة مئوية، مما يوفر دفءًا لطيفًا لمزيد من استرخاء القدمين. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المنتج بخفة وزنه (١,٩٥ كجم) وحجمه الصغير، مما يسهل تخزينه واستخدامه في أي مكان.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير
الطاقة المُصنَّفة	٢٤ واط
سعة البطارية	٢٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	٤ ساعات
مدة التشغيل	ساعتان
درجة حرارة التسخين	٤٢ درجة مئوية
واجهة الشحن	USB-C
سرعة المحرك	من ٢٣٤٠ إلى ٢٧٠٠ دورة في الدقيقة
حجم المنتج	٣١,٨ × ٣,٤ × ٧,٥ سم
وزن المنتج	١,٩٥ كجم
رقم الموديل	PDLFSTZMF٠٢٦

١. تصميم مريح للقدم:
صُمم جهاز تدليك القدم ليتناسب بشكل مريح مع شكل قدميك الطبيعي، مما يضمن لك تجربة مريحة وعلاجية. يدعم شكله المريح القدمين في وضعية مثالية لتحقيق أقصى قدر من الراحة والفعالية أثناء الاستخدام.
٢. ثلاثة أوضاع مخصصة:
يوفر جهاز تدليك القدم هذا، من خلال ثلاثة أوضاع مميزة، تجربة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. سواء كنت تفضل تدليكًا خفيفًا للاسترخاء، أو تدليكًا أكثر قوة لتخفيف الألم بعمق، أو علاجًا حراريًا لطيفًا، يتيح لك الجهاز اختيار الوضع الأنسب لك.
٣. وظيفة التسخين:
يُزود جهاز التدليك بوظيفة تسخين، ويمكنه توليد حرارة تصل إلى ٤٢ درجة مئوية، مما يعزز الآثار العلاجية للتدليك. تساعد الحرارة على تحسين الدورة الدموية، واسترخاء العضلات، وتوفير إحساس مهدئ لتخفيف إرهاق القدم.
٤. مستويات شدة قابلة للتعديل:
مع سرعات محرك قابلة للتعديل تتراوح بين ٢٣٤٠ و ٢٧٠٠ دورة في الدقيقة، يمكنك التحكم في شدة التدليك. تتيح لك هذه المرونة تخصيص تجربة التدليك الخاصة بك، سواء كنت تفضل لمسة لطيفة ومهدئة أو تدليكًا أكثر كثافة وتجديدًا.
٥. مؤقت إيقاف تلقائي:
لضمان السلامة وكفاءة الطاقة، يتضمن جهاز تدليك القدمين مؤقت إيقاف تلقائي يُطفئ الجهاز بعد الاستخدام. هذه الميزة مثالية لمن يرغبون في الاسترخاء دون القلق بشأن تشغيل الجهاز لفترة طويلة.
٦. تشغيل لاسلكي:
يعمل جهاز التدليك ببطارية قابلة لإعادة الشحن، مما يوفر تجربة لاسلكية سهلة ومريحة. استمتع بتدليك مريح وسهل الحمل دون الحاجة إلى مقبس كهربائي، مما يسهل استخدامه في أي مكان في المنزل أو المكتب أو أثناء السفر.
٧. شحن USB-C:
لراحة عصرية، يُشحن جهاز التدليك عبر منفذ USB-C، مما يسمح بإعادة الشحن بسرعة وسهولة. بفضل وقت الشحن الذي يصل إلى 4 ساعات، يمكنك تجهيز جهاز تدليك القدمين بسرعة لجلسة الاسترخاء التالية.

٨. صغير الحجم وخفيف الوزن:

صُمم جهاز تدليك القدم ليكون صغير الحجم وسهل التخزين، بأبعاد ٣١.٨ × ٣٠.٤ × ٧.٥ سم ووزن ١.٩٥ كجم فقط. تصميمه خفيف الوزن يجعله سهل الحمل، مما يتيح لك الاستمتاع بتدليك القدم في أي وقت وفي أي مكان.

٩. هيكل عالي الجودة:

مصنوع من مواد متينة، صُمم جهاز تدليك القدم هذا ليدوم طويلًا، مما يوفر منتجًا موثوقًا به وطويل الأمد للاستخدام المستمر. تصميمه الأنيق والعصري يناسب بسلاسة أي منزل أو مكتب.


١٠. تشغيل سهل الاستخدام:

تضمن واجهة التحكم البسيطة إمكانية تشغيل جهاز تدليك القدم بسهولة. بفضل الأزرار البديهية لاختيار الوضع والتحكم في درجة الحرارة، يمكنك تخصيص تجربة التدليك بسرعة دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.

١١. سعة البطارية ووقت إعادة الشحن:

يتميز جهاز التدليك بسعة بطارية ٢٥٠٠ مللي أمبير/ساعة، مما يوفر استخدامًا ممتدًا بين كل شحنة وأخرى. يستغرق شحنه بالكامل حوالي ٤ ساعات، مما يضمن أنه سيكون جاهزًا دائمًا عند الحاجة إليه.

عرض تخطيطي للمنتج

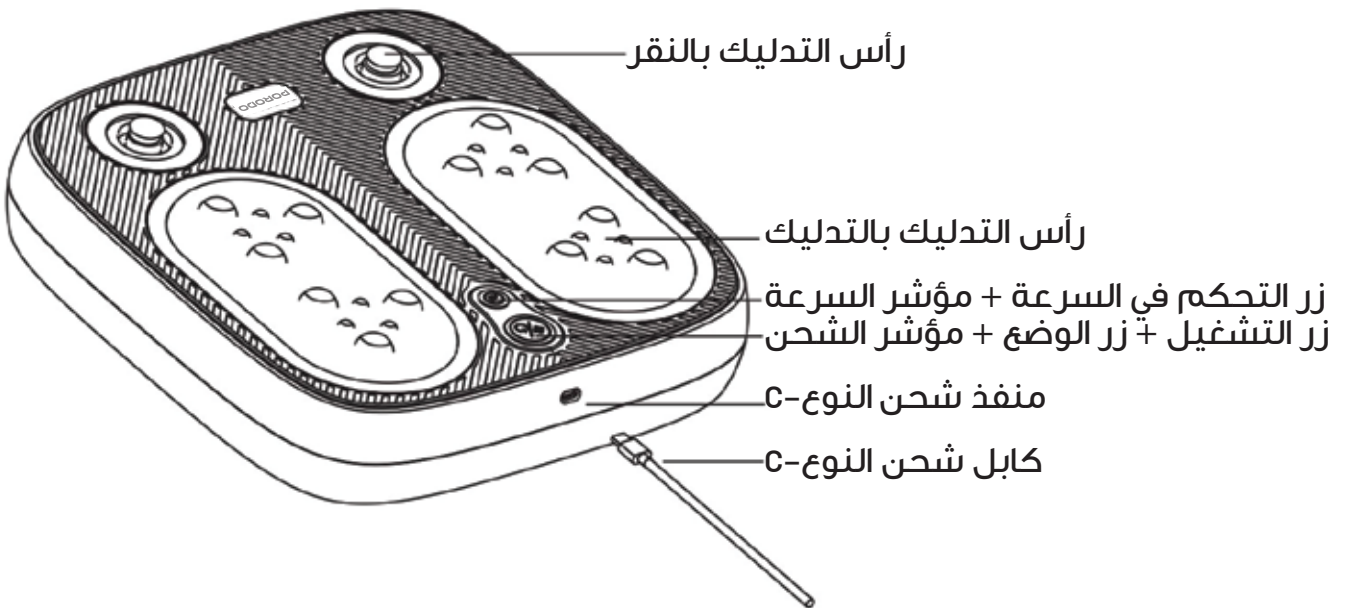

تعليمات التشغيل

١. زر التشغيل/الوضع:
- ١.١. التنشيط: اضغط مطولاً لتشغيل جهاز التدليك.
- ١.٢. تبديل الأوضاع: اضغط ضغطة قصيرة للتنقل بين الأوضاع. سيبقى مؤشر الضوء الأزرق مضاءً عند تنشيط الجهاز، والوضع ١ هو الإعداد الافتراضي. اضغط مرة واحدة للانتقال إلى الوضع ٢، ثم اضغط مرة أخرى للانتقال إلى الوضع ٣. تتكرر هذه الدورة مع كل ضغطة.
- ١.٣. الأوضاع:
- أ. الوضع ١: عجن + نقر (بدون تسخين)
- ب. الوضع ٢: عجن + نقر (مع تسخين)
- ج. الوضع ٣: عجن + نقر (إيقاع متقطع، بدون تسخين)
٢. زر السرعة:
- ٢.١. ضبط السرعة: بعد تشغيل الجهاز، اضغط لضبط سرعة العجن والنقر.
- ٢.٢. إعدادات السرعة:
- أ. السرعة ١ (الضوء الأزرق): السرعة الافتراضية
- ب. السرعة ٢ (ضوء برتقالي): سرعة متوسطة
- ج. السرعة ٣ (ضوء أحمر): سرعة عالية
- ٢.٣. سرعة دوران رأس التدليك:
- أ. L٢٤: ١ دورة في الدقيقة
- ب. L٢٧: ٢ دورة في الدقيقة
- ج. L٢٨: ٣ دورة في الدقيقة
- ٢.٤. سرعة النقر (المحرك):
- أ. L٢٣٤٠: ١ دورة في الدقيقة
- ب. L٢٥٢٠: ٢ دورة في الدقيقة
- ج. L٢٧٠٠: ٣ دورة في الدقيقة

٣. وظيفة التسخين: لتنشيط التسخين، انتقل إلى الوضع ٢ (ضوء أحمر). لن يعمل التسخين في الأوضاع الأخرى.

مؤشر الشحن وال ضوء

عند الشحن باستخدام كابل النوع C، يُظهر مؤشر زر وضع الطاقة ضوءًا أزرقًا خافتًا. بعد اكتمال الشحن، يُظهر المؤشر ضوءًا أزرقًا ثابتًا. إذا ومض مؤشر زر وضع الطاقة، فهذا يُشير إلى انخفاض مستوى شحن البطارية. يُرجى شحن المنتج فورًا.

المحظورات

١. غير مناسب لمرضى السرطان.
٢. لا يُستخدم مباشرةً على مناطق الكسور للمرضى الذين خضعوا لجراحة تثبيت العظام الداخلية بإبرة معدنية.
٣. لا يُنصح به لمرضى هشاشة العظام.
٤. لا يُنصح به لمرضى الجلطات الوريدية أو النبضية.
٥. غير مناسب لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
٦. يُمنع استخدام هذا المنتج من قبل النساء الحوامل.
٧. تجنب استخدامه لمرضى تمدد الأوعية الدموية.
٨. لا يُنصح به لمرضى الالتهاب الحاد.
٩. لا يُدلك على مناطق العظام.
١٠. تجنب استخدامه على مناطق ما بعد الجراحة.
١١. لا تُدلك المنطقة نفسها لأكثر من ٢٠ دقيقة.

احتياطات السلامة

١. حافظ على منطقة التدليك جافة ونظيفة. يُنصح بارتداء أغطية أحذية أو جوارب أثناء استخدام المنتج، والضغط عليه وتحريكه برفق.
٢. يجب استخدام إعدادات السرعة والضغط العالي فقط على مناطق الأنسجة الرخوة في القدمين، دون التسبب بالألم أو انزعاج. تجنب استخدامه على مناطق العظام.
٣. قد يؤدي الاستخدام المتكرر لإعدادات السرعة والضغط العالي على نفس المنطقة إلى حدوث خدوش أو ألم أو انزعاج. في حال حدوث ذلك، توقف عن الاستخدام فورًا.

٤. أبقِ أصابعك أو شعرك أو أي شعر من جسمك بعيدًا عن الأجزاء المتحركة لرأس التدليك لمنع الانضغاط والإصابة.
٥. لا تتخلص من هذا المنتج أو تُسيء استخدامه.
٦. لا تُعدّل المنتج دون إذن.
٧. لا تُشغّل المنتج أو تشحنه دون مراقبة.
٨. هذا المنتج مخصص للاستخدام من قبل البالغين فقط.
٩. إذا كانت لديك موانع أو أعراض مُحددة، استشر طبيبًا قبل استخدام هذا المنتج.
١٠. يحتوي الجهاز على سطح تسخين. توخّ الحذر إذا لم تكن حساسًا للحرارة.
١١. احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
١٢. تجنب وضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة، مثل المواقد أو السخانات، أو في بيئات حارة مثل السيارات.
١٣. خزن المنتج في مكان جاف.
١٤. لا تشحن البطارية أو تفرغها بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف خلاياها.
١٥. تجنب استخدام المنتج في بيئات ذات درجات حرارة عالية.

إشعارات مهمة

١. تأكد من عدم وجود أي عوائق أمام رأس التدليك قبل تشغيل المنتج. في حال وجود عوائق خارجية تعيق رأس التدليك، سيتوقف الجهاز مؤقتًا ويحاول إعادة تشغيله. أزل أي عوائق قبل استئناف الاستخدام.
٢. هذا المنتج ليس مقاومًا للماء. أبقه بعيدًا عن الماء أو أي سوائل أخرى لتجنب أي تلف محتمل.
٣. لا تحاول تفكيك المنتج. في حال حدوث تفكيك غير مقصود وتسببه في تشغيل غير طبيعي، يُرجى إعادته لإعادة المعايرة. يتحمل العميل أي تكاليف مرتبطة بهذه العملية.
٤. قد يؤدي التشغيل المستمر لفترات طويلة إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المحرك. توخّ الحذر أثناء الاستخدام لفترات طويلة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.
٥. قد يؤدي سقوط هذا المنتج أو تعريضه للصدمات إلى تلفه وتعطله. في حال سقوط المنتج أو تلفه، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء على الفور للحصول على المساعدة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me