

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

Smart Sonic

فرشاة أسنان كهربائية

SKU:PDLFSTETBWH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٢	الغرض المقصود
٣	العناية والتخزين
٣	تعليمات التشغيل
٤	محتويات العبوة
٥	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٦	التخلص
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تقدم فرشاة الأسنان الكهربائية Smart Sonic من بورودو لايفستايل رعاية فموية متقدمة بخمسة أوضاع تنظيف قابلة للتخصيص: تنظيف، تلميع، تبييض، لطيف، وتدليك. يضمن التصميم المقاوم للماء بمعيار IPX7 المتانة، بينما يساعد المؤقت الذكي في الحفاظ على الوقت المثالي للتفريش. مع إمكانية الاستخدام حتى ٤٠ يومًا بالشحنة الكاملة، تجمع هذه الفرشاة بين الراحة والموثوقية. كما يوفر المقبض المريح قبضة مريحة، ويسهل التوصيل المغناطيسي استبدال رأس الفرشاة، مما يجعلها حلًا عمليًا للحفاظ على صحة الفم والأسنان بفعالية.

المواصفات


المدخل	١ أمبير / ٥ فولت
سعة البطارية	٣٠٠mAh ٣٠٠ ملي أمبير
زمن إعادة الشحن	ساعتان
مدة التشغيل	حتى ٤٠ يومًا
مستوى مقاومة الماء	IPX7
المادة	هيكل ABS، شعيرات دوبونت
حجم المنتج	١٩ x ٢٣ x ٤٥ مم
رقم الطراز	PDLFSTETBWH

الغرض المقصود

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط في مجال نظافة الفم. ولا يُقصد به الاستخدام التجاري، مثل المؤسسات الطبية أو البيطرية. لضمان التشغيل الآمن، يرجى اتباع جميع التعليمات المقدمة.

العناية و التخزين

١. نظف الجهاز وفقًا للتعليمات المقدمة.
٢. خُزّن الجهاز في مكان جاف وجيد التهوية، بعيدًا عن الأطفال.
٣. احمِ الجهاز من الاهتزاز والصدمات أثناء التعامل معه.
٤. يعمل التوصيل المغناطيسي فقط في المكان المخصص على الفرشاة.

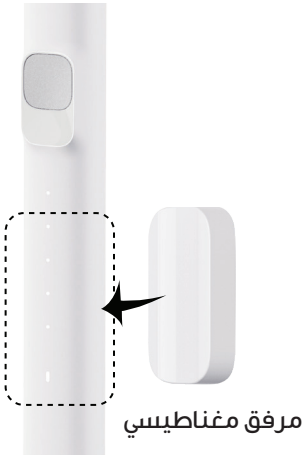

تعليمات التشغيل

١. الشحن
- أ. تأكد من أن الجهاز مغلق. (Power icon)
- ب. وصل كابل النوع C بالجهاز. (Type-C icon)
٥. ج. سيومض مؤشر LED ببطء أثناء الشحن. (LED icon)
- د. افصل الكابل عند اكتمال شحن البطارية، ويظهر ذلك من خلال ثبات ضوء LED. (Battery icon)
٢. تركيب / استبدال الرأس
- أ. تأكد من أن الجهاز مغلق.
- ب. أزل الرأس بسحبه للخارج.
- ج. ثبّت رأسًا جديدًا بدفعه وإحكامه.
٣. اختيار البرنامج
- أ. تنظيف - وضع التنظيف العادي (أعلى ضوء LED).
- ب. تلميع - لتفتيح وتلميع الأسنان (الضوء الثاني LED).
- ج. تبييض - يزيل التصبغات، يفتح ويلمع الأسنان (الضوء الثالث LED).
- د. لطيف - وضع لطيف للأسنان واللثة الحساسة (الضوء الرابع LED).
- هـ. تدليك - لتدليك اللثة بعد التفريش (أدنى ضوء LED).

٤. وضع التشغيل والمؤقت

أ. لتغيير وضع التشغيل، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف/التبديل بسرعة حتى يتم اختيار البرنامج المطلوب.

ب. تحتوي الفرشاة على مؤقت مدمج. بعد كل ٣٠ ثانية، تتوقف مؤقتًا للإشارة إلى مرور الوقت. تستمر جلسة التنظيف القياسية لمدة دقيقتين، وتتكون من ٤ فترات.

ج. اضغط على الزر لمدة ثانيتين لإيقاف التشغيل. سيتم حفظ آخر وضع استخدمته وسيتم استئنافه عند الاستخدام التالي.

٥. تعليمات التفريش

أ. بلّل رأس الفرشاة بالماء.

ب. ضع معجون الأسنان على الفرشاة.

ج. أدخل الفرشاة في فمك قبل تشغيل الجهاز لتجنب الرش.

د. شغل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

هـ. ابدأ التفريش من اللثة، وتحرك من اليسار إلى اليمين.

و. فرش جميع الأسنان بدءًا من منطقة اللثة.

ز. فرش الجوانب الداخلية للأسنان وكرر العملية.

ح. افرك أسطح المضغ بعناية.

ط. بعد التفريش، أوقف تشغيل الجهاز واشطف الرأس تحت الماء الجاري.

ملاحظات: قد تنزف لثتك قليلاً في البداية بسبب نوع التهيج الجديد، وهذا أمر طبيعي. ولكن إذا استمر النزيف لأكثر من أسبوع، استشر طبيب أسنانك.

محتويات العبوة

الكمية	العنصر
١	مقبض الفرشاة
٢	رؤوس الفرشاة
١	الحامل المغناطيسي
١	كابل USB
١	دليل المستخدم

افتح الصندوق وتحقق من وجود جميع العناصر والتأكد من سلامتها. إذا كانت أي أجزاء تالفة أو مفقودة، اتصل بالتاجر ولا تستخدم المنتج. احتفظ بالتغليف أو أعد تدويره وفقاً للوائح المحلية.

ملاحظة: أبق مواد التغليف (الأكياس البلاستيكية، الصناديق، الفوم، إلخ) بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الاختناق.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) يجب ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تلغي حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود المقررة للأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية.

يقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات الراديو ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات الراديوية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان لعدم حدوث التداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن التحقق منه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع أحد الإجراءات أو أكثر مما يلي:

إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك المتصلة بها وحدة الاستقبال. استشارة التاجر أو فني راديو/تلفاز ذو خبرة للمساعدة.

بيان تحذير التعرض للإشعاع RF:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للإشعاع RF. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل مثل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)