

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

SMART SONIC

فرشاة الأسنان الكهربائية المرئية

SKU: PDLFSTETCBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تصميم المنتج
٤	احتياطات السلامة
٤	تثبيت التطبيق
٥	توصيل التطبيق
٥	تعليمات الشحن
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	دليل الاستخدام
٧	الصيانة
٧	حماية البيئة
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

تُقدم فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية "Porodo Lifestyle" بتقنية الصوت المرئي حلًا متطورًا للعناية بالفم، مع مراقبة فورية عبر تطبيق مُتصل. تتميز بخمسة أوضاع تنظيف مُختلفة تُلبي احتياجات مُتنوعة، بينما تُتيح الشاشة المرئية للمستخدمين مُتابعة تقدم عملية تنظيف الأسنان. مُجهزة بمقاومة للماء IPX7، تُناسب هذه الفرشاة الاستخدام في البيئات الرطبة. تضمن تنظيفًا فعالًا بفضل تقنية الصوت المُتطورة ومؤقت تنظيف ذكي، مما يُساعد المستخدمين على تحقيق أداء مثالي في تنظيف الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر فرشاة الأسنان ما يصل إلى ٤٠ يومًا من الاستخدام بشحنة كاملة، مما يجعلها مُريحة للغاية للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى إعادة الشحن المُتكرر.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ه فولت / ١ أمبير
سعة البطارية	١٥٠٠ مللي أمبير / ساعة
مستوى مقاومة الماء	مقاوم للماء IPX7
مدة الشحن	٣ ساعات
واجهة الشحن	من النوع C
مدة التشغيل	٤٠ يومًا من الشحن الكامل
تردد الاهتزاز	٤٠٠٠٠ ضربة / دقيقة
البعد البؤري	٢٠ مم

المادة	شعيرات APET ABS, PP, Dupont
دقة الكاميرا	٦٤. × ٤٨. (٣٠. كلفن)
رقم الموديل	PDLFSTETC

تصميم المنتج



١. هذا المنتج مزود ببطارية مدمجة. لا تضعه في النار أو تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية.
٢. لا تستخدم هذا المنتج أثناء الشحن.
٣. استخدم المنتج فقط عندما يكون قابس USB مثبتًا بإحكام. المنتج مقاوم للماء فقط عند توصيل القابس بشكل صحيح.
٤. لا تضع مرآة الأسنان في بيئة رطبة أو في سائل لتجنب التلف الناتج عن الغمر. تأكد من إبقاء قابس مرآة الأسنان جافًا.
٥. عند استخدام مرآة الأسنان، تأكد من جفاف كل من المقبس والقابس قبل إدخال القابس. قد تؤدي الرطوبة إلى تلف الجهاز.
٦. لا تحاول تعديل أو إصلاح هذا المنتج بنفسك.
٧. عند استخدام التطبيق لالتقاط الصور للتشخيص والعلاج، تأكد من اختيار مؤسسة أسنان معتمدة.
٨. لا تسقط المنتج أو تضربه بقوة.
٩. لا تترك هذا المنتج قيد الشحن لأكثر من ١٢ ساعة متواصلة. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يُرجى شحنه كل ستة أشهر على الأقل.
١٠. لا تُفكّك المنتج أو تستبدل البطارية الداخلية بنفسك، في حال ملاحظة أي انتفاخ أو تسريب أو أي خلل آخر في البطارية الداخلية، توقّف عن استخدام المنتج فورًا واتصل بخدمة ما بعد البيع.

تثبيت التطبيق

١. يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه أو البحث عن "SL ylz" على Google Play أو App Store وتثبيته.



توصيل التطبيق

١. افتح منفذ USB، ثم وُصل مرآة الرؤية.
٢. اختر خيارات "Wireless LAN".
٣. انتقل إلى صفحة الشبكة المحلية اللاسلكية، وابحث عن DentalCam-XXXX، ثم اتصل به.
٤. انقر على الأيقونة لفتح التطبيق.
٥. ارجع إلى التطبيق، واختر "connected".
٦. ادخل إلى شاشة الكاميرا.

تعليمات الشحن

١. اضغط مع الاستمرار على الزر لإيقاف تشغيل فرشاة الأسنان ثم ابدأ بشحنها.
٢. يومض ضوء أحمر عند الشحن.
٣. عند اكتمال الشحن، يبقى الضوء الأخضر مضاءً.


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. الصورة عالقة.
- أ. مسافة نقل البيانات بعيدة جدًا. لا تبتعد عن الهاتف عند استخدام المنتج.
- ب. قد يؤدي نقص الطاقة أيضًا إلى توقف المنتج عن العمل. يُرجى التأكد من شحن المنتج بالكامل.
٢. لا يمكن إرسال إشارة الواي فاي/تفقد بشكل متقطع.
- أ. كلما انخفضت الطاقة، ضعفت إشارة الواي فاي. تأكد من شحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام.
- ب. إذا كنت خارج نطاق نقل إشارة الواي فاي، فحاول إبقاء المنتج أقرب إلى الهاتف.
- ج. قد يتداخل وجود إشارات واي فاي كثيرة جدًا مع إشارة المنتج. حاول استخدام المنتج في منطقة بها إشارات واي فاي متنافسة أقل.
٣. لا تظهر الصورة

- أ. تحقق من اتصال هاتفك بشبكة واي فاي الصحيحة للمنتج.
ب. بعد تأكيد الاتصال، إذا استمر عدم ظهور الصورة، فأغلق التطبيق والمنتج. ثم افتحهما مرة أخرى وأعد الاتصال.

دليل الاستخدام

١. بلّل شعيرات فرشاة الأسنان وضع عليها القليل من معجون الأسنان.
٢. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل فرشاة الأسنان.
٣. اضغط برفق أثناء تنظيف أسنانك للحصول على أفضل النتائج.
٤. حرك فرشاة الأسنان ببطء بزاوية ٤٥ درجة بين الشعيرات واللثة.

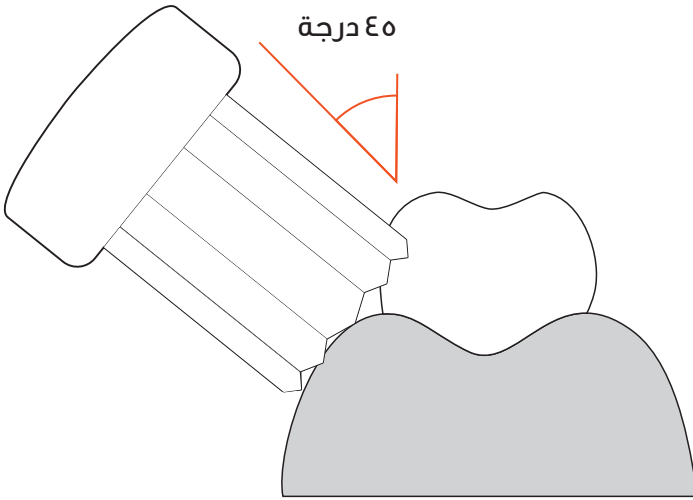

٥. أثناء تنظيف أسنانك، اضغط على الزر للتبديل بين أوضاع التنظيف حسب الحاجة.
- ملاحظة: مدة التنظيف الموصى بها دقيقتان.
٦. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من ٥ ثوانٍ.
٧. بعد تنظيف أسنانك، نظف رأس فرشاة الأسنان بالماء (تأكد من تغطية الجزء السفلي للشحن عند الشحن).

١. اغسل رأس الفرشاة والشعيرات بعد كل استخدام واتركها تجف في الهواء بشكل طبيعي. يُرجى عدم سحب الشعيرات، فقد يؤدي ذلك إلى تشوهها وتساقطها.
٢. امسح مقبض الفرشاة بقطعة قماش جافة بعد كل استخدام واتركه يجف في الهواء بشكل طبيعي.
٣. لا تستخدم ماءً ساخناً أكثر من ٤٠ درجة مئوية أو محاليل تنظيف حمضية لتنظيف مقبض الفرشاة أو كابل الشحن أو سلك الطاقة أو المحول. يجب عدم غمر المحول في الماء أبداً.
٤. قبل تنظيف جهاز الشحن، تأكد من فصل المحول عن المقبس لتجنب خطر الصق الكهربائي.
٥. يُنصح باستبدال رأس الفرشاة كل ثلاثة أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت الشعيرات ملتوية أو مشوهة.

حماية البيئة

عند التخلص من المنتجات، لا تضعها مع النفايات المنزلية. تحتوي البطاريات القابلة لإعادة الشحن المدمجة على مواد قد تضر بالبيئة. عند التخلص من المنتجات، لا ترمها بلا مبالاة. يُرجى التأكد من التخلص منها في محطة إعادة تدوير معتمدة من الحكومة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - (٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
٢. قد تُلغى التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن

الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز. ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يُركَّب ويُستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُعيّن. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُشجّع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

وصّل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للحصول على المساعدة.
تحذير من الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**