

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

**جهاز تدليك كهربائي للوجه  
عصا تدليك العين**

SKU: PDXL008SLWH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تصميم المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٥	مجالات الاستخدام
٥	احتياطات السلامة
٦	تعليمات الشحن
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

عصا تدليك العين الكهربائية هي جهاز تجميل متعدد الاستخدامات، مصمم لتوفير علاج متطور للوجه في المنزل. يجمع الجهاز بين العديد من الميزات العلاجية، بما في ذلك العلاج بالضوء الأحمر والأزرق، الذي يساعد على تقليل الالتهاب وتحسين تجديد البشرة، والعلاج بالكمادات الساخنة لتهدئة وتخفيف التوتر، والتدليك بالاهتزازات الصوتية لتحسين الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ، وتحفيز التيارات الدقيقة لشد البشرة ورفعها. مصنوع من سبائك الزنك ومادة ABS، ويحتوي على منفذ شحن من النوع C وبطارية بسعة ٢٠٠ مللي أمبير/ساعة توفر ما يصل إلى ٩٠ دقيقة من الاستخدام. يستغرق شحنه بالكامل ساعتين فقط، ويوزن ٤٥ غرامًا فقط. حجمه الصغير (٢١ × ٥٧ × ١٦٧ مم) يجعله سهل الاستخدام ومثاليًا للاستخدام أثناء التنقل.

## المواصفات

الإدخال	ه فولت/١ أمبير
المادة	سبائك الزنك + ABS
واجهة الشحن	نوع C
سعة البطارية	٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
وقت التشغيل	٩٠ دقيقة
وقت إعادة الشحن	ساعتان
وزن المنتج	٤٥ غرام

حجم المنتج	٢١ x ٥٧ x ١٦٧ مم
رقم الموديل	PDXL٠٨

## مميزات المنتج

١. العلاج بالضوء الأحمر والأزرق: يُقلل الانتفاخ، ويُعزز تجديد البشرة، ويُعزز إنتاج الكولاجين.
٢. العلاج بالكمادات الساخنة: يُهدئ البشرة ويُريحها، ويُحسّن راحتها العامة.
٣. التدليك بالاهتزازات الصوتية: يُحفز الدورة الدموية، مما يُساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين لون البشرة.
٤. التحفيز بالتيار الكهربائي الدقيق: يُشد البشرة ويرفعها من خلال استهداف الطبقات العميقة للحصول على مظهر شبابي.
٥. واجهة شحن من النوع C: تضمن شحنًا سريعًا ومريحًا.
٦. بطارية تدوم طويلًا: ساعة ٢٠ ملي أمبير/ساعة تُوفر ما يصل إلى ٩٠ دقيقة من الاستخدام المتواصل.
٧. وقت إعادة الشحن: يُشحن بالكامل في ساعتين.
٨. تصميم خفيف الوزن: يزن ٤٥ غرامًا فقط لسهولة الحمل والاستخدام.
٩. حجم صغير: أبعاده ٢١ x ٥٧ x ١٦٧ مم، مثالي للاستخدام أثناء التنقل.







## تعليمات الاستخدام

١. نظفي وجهك جيدًا لإزالة أي زيوت، لضمان تجربة استخدام أفضل.
٢. ينشط الجهاز عند ملامسة رأس الإدخال للبشرة أثناء حمله. ويتوقف تلقائيًا بمجرد مغادرته لها، بفضل رقاقة ومستشعر لمس إلكترونيين ذكيين.
٣. عند الاستخدام، يُنشط الجهاز الكهربائي الدقيقة الحيوية، وجمال البشرة البصري، والاهتزاز الصوتي في آن واحد. ستتوقف جميع الوظائف بمجرد ابتعاد الجهاز عن البشرة.
٤. لضمان تجربة سلسلة، اختبري الجهاز أولًا على يدك قبل وضعه على منطقة العين. إذا لم تشعري بأي انزعاج، فاستخدميها حول العينين.
٥. قد تشعرين برمش خفيف عند فتح العينين أو إغلاقهما. هذا ناتج عن وظيفة الكهربائي الدقيقة الحيوية، وهو أمر طبيعي تمامًا.
٦. الاستخدام المنتظم يمكن أن يساعد على تحسين ملمس البشرة، وتقليل التجاعيد، وتعزيز تماسكها، مما يترك البشرة ناعمة ومتجددة.


١. منطقة العين: يُعدّ الجهاز مثاليًا لتخفيف الخطوط الدقيقة والهالات السوداء وانتفاخات العين.
٢. الوجه والرقبة: كما أنه فعال في تنعيم خطوط الأنف الشفوية وخطوط الرقبة، وشد البشرة.
٣. للحصول على أفضل النتائج، غير زاوية الجهاز حسب منطقة الوجه أو الرقبة التي تُعالجها.
٤. استخدم دائمًا حركة تصاعدية لتأثيرات الرفع.

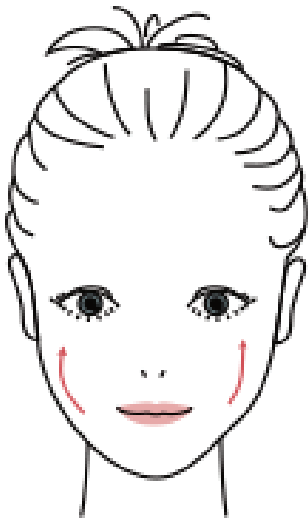

الوجه

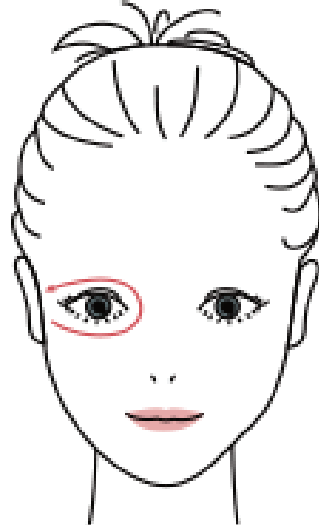

منطقة العين

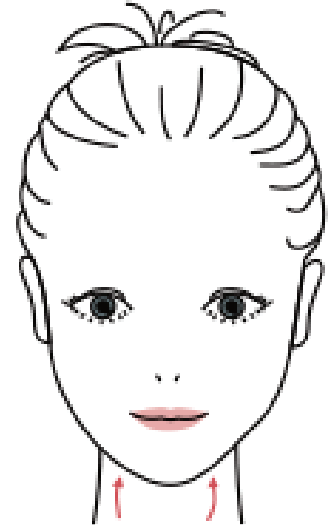

الرقبة

## احتياطات السلامة

١. لا تُفكّك المنتج أو تُعدّله دون إذن.
٢. تأكد من عدم وضع رأس التوجيه في الاتجاه المعاكس أثناء الاستخدام.
٣. الشعور بوميض خفيف حول العينين أمر طبيعي، وهو ناتج عن التأثير الكهربائي الدقيق البيولوجي. لا داعي للقلق.
٤. نظرًا لاختلافات المقاومة الفردية، قد يُعاني بعض المستخدمين من صدمة كهربائية أقوى. اضبط الاستخدام بناءً على تحملهم الشخصي. في حال الشعور بأي انزعاج، توقف عن استخدام الجهاز فورًا.

٥. بعد الاستخدام، امسح الجهاز بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية مبللة.
٦. إذا لاحظت اهتزازات غير طبيعية أثناء الاستخدام، فتأكد من أن البطارية ضعيفة أو أن الجهاز قد توقف عن العمل.
٧. عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، أوقف تشغيل الجهاز وخرّنه في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
٨. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. فهو ليس لعبة، ويجب عدم استخدامه على هذا النحو.

## تعليمات الشحن

١. منفذ الشحن: يقع أسفل الجهاز. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، واصل كابل الشحن المرفق في العبوة بمنفذ الشحن لإعادة شحن الجهاز.
٢. زر التشغيل: اضغط عليه باستمرار لتشغيل الجهاز.
٣. رأس التدليك: يمكن تدوير رأس التدليك حتى ٢٧٠ درجة لمرونة الاستخدام.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)