

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مسدس تدليك لاسلكي صغير

SKU: PDLFSTH35BG

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	احتياطات السلامة
٤	عرض تخطيطي للمنتج
٥	رؤوس التدليك
٥	تعليمات التشغيل
٦	تعليمات الشحن
٦	الأسئلة الشائعة
٧	الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	حماية البيئة
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

مسدس التدليك اللاسلكي الصغير من بورودو هو جهاز صحي شخصي صغير الحجم ومتعدد الاستخدامات، مصمم لتوفير راحة عضلية فعالة. يتميز بخمسة مستويات سرعة قابلة للتعديل، مما يتيح للمستخدمين تخصيص تجربة التدليك الخاصة بهم لتحقيق أقصى درجات الراحة والفعالية. مع أربعة رؤوس قابلة للتبديل، يوفر الجهاز مرونة لاستهداف مجموعات عضلية مختلفة. يوفر مسدس التدليك ما يصل إلى ٤ ساعات من الاستخدام المتواصل عند الشحن الكامل، مما يضمن أداءً يدوم طويلاً. وهو مزود بشحن سريع من النوع C للشحن السريع، بينما تضمن ميزة الإغلاق التلقائي الآمن تشغيلاً آمناً. سواء كان الجهاز مخصصاً للتعافي بعد التمرين أو لتخفيف التوتر، يوفر مسدس التدليك الصغير من بورودو حلاً محمولاً وفعالاً لاسترخاء العضلات أثناء التنقل.

المواصفات

سعة البطارية	تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير
الطاقة المقدرة	١٣٠٠ مللي أمبير/ساعة
سرعة المحرك	٣٠ واط
المدخلات	١٨٠٠-٣٠٠٠ دورة في الدقيقة
مدة الشحن	٣,٥ ساعة
مدة العمل	٤ ساعات
مدة التدليك	٦ مم
واجهة الشحن	من النوع C
الوزن الصافي	٣٩٥ غراماً
حجم المنتج	١٥٤ × ١٢٠ × ٦١ مم
رقم الموديل	PDLFSTH٣٥

١. خمسة مستويات سرعة: اختر من بين خمسة إعدادات شدة مختلفة لتخصيص تجربة التدليك الخاصة بك لتحقيق الراحة والاسترخاء.
٢. أربعة رؤوس قابلة للتبديل: يأتي مع أربعة ملحقات رأس مختلفة لاستهداف مجموعات عضلية مختلفة وتوفير تدليك متعدد الاستخدامات.
٣. أربع ساعات من وقت العمل: استمتع بما يصل إلى أربع ساعات من الاستخدام المتواصل بشحنة كاملة، مثالية لجلسات التدليك الطويلة.
٤. شدة تدليك قابلة للتعديل: يتميز مسدس التدليك بشدة قابلة للتعديل، مما يسمح لك بالتحكم في الضغط حسب تفضيلاتك.
٥. شحن سريع من النوع C: مزود بشحن سريع من النوع C لإعادة شحن سريعة وفعالة، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف.
٦. إيقاف تشغيل تلقائي آمن: إيقاف تشغيل تلقائي مدمج للسلامة، حيث يتم إيقاف تشغيل الجهاز بعد فترة محددة من عدم الاستخدام لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو الإفراط في الاستخدام.

احتياطات السلامة

١. غير مناسب للقاصرين: هذا المنتج ليس لعبة. يُمنع منعا باتا استخدامه من قبل القاصرين.
- يرجى التأكد من إبعاده عن متناول الأطفال.
٢. التعرض للماء: في حال ملامسة المنتج للماء عن طريق الخطأ، لا تحاول استخدامه. يُرجى فحص المنتج قبل استخدامه مجدداً.
٣. يُحفظ بعيداً عن النار: لا تُعرض هذا المنتج أبداً للنار أو أي مصدر حرارة آخر. يُمنع منعا باتا رميه في النار، فقد يُسبب أضراراً جسيمة أو يُشكّل خطر حريق.
٤. تجنب المناطق الحساسة: لا تستخدم المنتج حول المناطق الحساسة مثل الرأس أو الرقبة أو القلب أو الأعضاء التناسلية. صُمم مسدس التدليك للاستخدام على أجزاء أخرى من الجسم، باستثناء هذه المناطق.
٥. للاستخدام على الأنسجة الرخوة فقط: هذا الجهاز مخصص للاستخدام على الأنسجة الرخوة في الجسم فقط، مثل العضلات. لا يُنصح باستخدامه على العظام أو المفاصل لتجنب الإصابة أو الشعور بعدم الراحة.

٦. استخدم الشواحن الأصلية فقط: استخدم دائماً الشاحن الأصلي المرفق مع المنتج. قد يؤدي استخدام شواحن من جهات خارجية أو غير أصلية إلى تلف الجهاز أو نشوب حريق.
٧. تجنب إسقاط المنتج: يُمنع منعاً باتاً إسقاط المنتج عمداً أو بغير قصد. قد يؤدي ارتطام المنتج بالسقوط إلى إتلاف المكونات الداخلية والتأثير على أداء الجهاز.
٨. لا تُفكّكه: لا تحاول أبداً فتحه أو تفكيكه. قد يؤدي إزالة البراغي أو العبث بالجهاز إلى إبطال الضمان، وقد يُسبب أعطالاً أو مخاطر على السلامة.
٩. غير مخصص للعلاج الطبي: هذا المنتج ليس بديلاً عن المعدات الطبية أو العلاج. استشر دائماً أخصائي رعاية صحية قبل استخدام الجهاز، خاصةً إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية سابقة.
١٠. تجنب ملامسة الجسم للأجزاء المتحركة: لا تضع أصابعك أو شعرك أو أي أجزاء أخرى من جسمك بالقرب من العمود المتحرك أو الجزء الخلفي من رأس التدليك أثناء التشغيل. قد يؤدي ذلك إلى إصابة، مثل الوخز أو التشابك.
١١. الغرض الرئيسي من هذا المنتج هو المساعدة في تخفيف آلام العضلات، وتعزيز الدورة الدموية، وتخفيف تصلب الرقبة.




لا تلمس هذه المنطقة عند تشغيل الجهاز دون تثبيت رأس التدليك.



لا تلمس هذا الجزء عند تركيب رأس التدليك وبدء تشغيل الجهاز.

عرض تخطيطي للمنتج

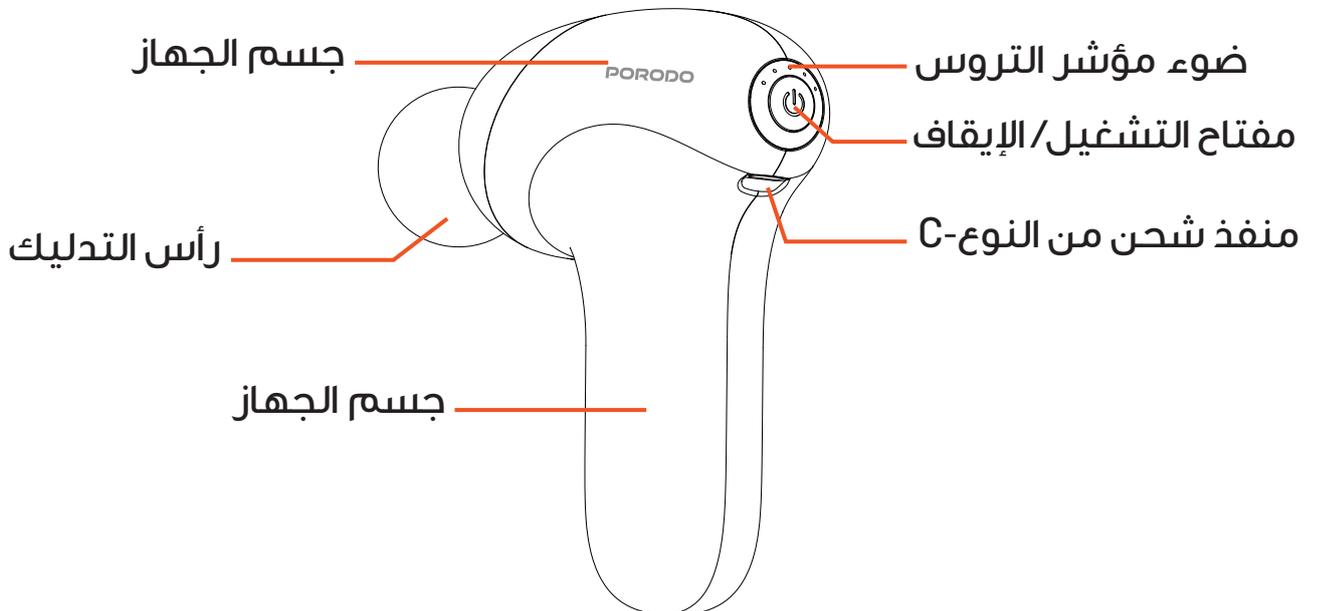


رؤوس التدليك

١. رأس على شكل حرف U: مثالي لتدليك العمود الفقري، ويوفر تحفيزاً عالي الكثافة.
٢. رأس دائري: مثالي لاسترخاء عضلات الجسم بالكامل وتخفيف التوتر.
٣. رأس على شكل حرف T: مصمم لاستهداف مجموعات العضلات الكبيرة، ويوفر تحفيزاً عميقاً وقوياً.
٤. رأس رصاصي: يركز على استرخاء المفاصل العميق، مما يساعد على تخفيف الشد وتعزيز التعافي.



ملاحظة: لاستبدال رأس التدليك، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. أدخل رأس التدليك برفق في فوهة البندقية، مع محاذاة العلامة الحمراء على الرأس مع العلامة الحمراء المقابلة على

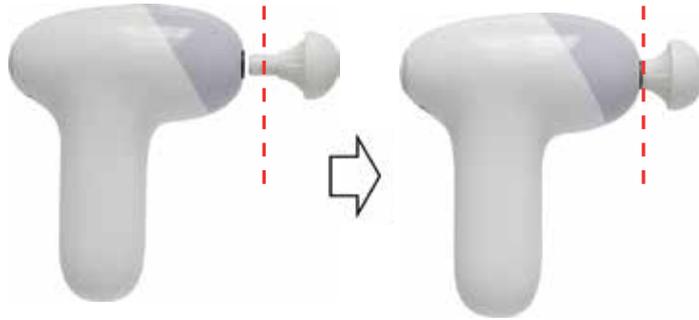

تعليمات التشغيل

١. التشغيل وتبديل التروس: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لأكثر من ثانية واحدة لتشغيل الجهاز. سيبدأ الجهاز بالترس الأول، وسيضيء مؤشر التروس المقابل. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل لتبديل التروس، مع زيادة شدة الاهتزاز مع كل ضغطة. يحتوي الجهاز على ٥ تروس متغيرة، وسيشير مؤشر التروس إلى الترس النشط.

٢. إيقاف التشغيل: أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس لأكثر من ثانية واحدة لإيقاف تشغيل الجهاز.
٣. مؤشر البطارية: عندما تكون البطارية منخفضة، ستومض مصابيح التروس الخمسة بسرعة ٥ مرات قبل إيقاف تشغيل الجهاز، للإشارة إلى الحاجة إلى إعادة الشحن.
٤. وظيفة التوقيت: سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ١٠ دقائق من الاستخدام المتواصل.
٥. حماية الدوار المقفل: إذا كان الجهاز متوقفًا وتوقف لأكثر من ثانيتين، فسيدخل وضع الحماية. ستومض مصابيح التروس الخمسة ببطء كتذكير. لإعادة التشغيل، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل خلال ٥ ثوانٍ. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

تعليمات الشحن

١. التشغيل وتبديل التروس: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لأكثر من ثانية واحدة لتشغيل الجهاز. سيبدأ الجهاز بالترس الأول، مع ضوء مؤشر التروس المقابل. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل لتبديل التروس، مع زيادة شدة الاهتزاز مع كل ضغطة. يحتوي الجهاز على ٥ تروس متغيرة، وسيشير ضوء المؤشر إلى الترس النشط.
٢. إيقاف التشغيل: أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس لأكثر من ثانية واحدة لإيقاف تشغيل الجهاز.
٣. مؤشر البطارية: عندما تكون البطارية منخفضة، ستومض أضواء التروس الخمسة بسرعة ٥ مرات قبل إيقاف تشغيل الجهاز، للإشارة إلى الحاجة إلى إعادة الشحن.
٤. وظيفة التوقيت: سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ١٠ دقائق من الاستخدام المتواصل.
٥. حماية الدوار المقفل: إذا تم قفل الجهاز وتوقف لأكثر من ثانيتين، فسيدخل في وضع الحماية. ستومض أضواء التروس الخمسة ببطء كتذكير. لإعادة التشغيل، اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل لمدة ٥ ثوانٍ. في حال عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

الأسئلة الشائعة

١. انخفاض درجة الحرارة:
الجهاز لا يعمل.
قد يؤدي التعرض لدرجات حرارة أقل من ٠ درجة مئوية لفترة طويلة إلى انخفاض أداء البطارية، مما يمنع الجهاز من التشغيل بشكل صحيح. قد لا يعمل الجهاز بشكل صحيح أثناء تشغيله.

٢. نقص طاقة البطارية

في حال تُركت البطارية دون شحن لفترة طويلة، فقد تدخل في حالة انخفاض الطاقة وتدخل في وضع حماية مستوى الصوت، مما يؤدي إلى تعطل مسدس اللفافة.
الحل: تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام لاستعادة وظائفها الطبيعية.

الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. إذا لم يعمل المنتج، فتأكد من أن مصدر الطاقة كافٍ.
٢. إذا لم يضيء ضوء اللوحة، فتأكد من أن مصدر الطاقة يعمل.
٣. إذا أصدر الجهاز الجديد صوتًا غير طبيعي، فلاحظ أن هذه ظاهرة طبيعية.
٤. إذا تعذر شحن البطارية، فقد تكون قديمة. يُرجى استبدال البطارية.
٥. عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، اشحن البطارية إلى أقصى سعة، وأطفئ مفتاح التشغيل، وخرّنها في مكان آمن وجاف وجيد التهوية وبارد.
٦. إذا لم يُستخدم المنتج لفترة طويلة، فاشحنه كل ستة أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.
٧. للصيانة اليومية، استخدم منظفًا محايدًا وقطعة قماش ناعمة لمسح المنتج. تجنب استخدام الزيوت أو المذيبات العضوية أو غيرها من مواد التنظيف الكيميائية التي يجب ألا تتلامس مع الماء.
٨. افصل دائمًا مفتاح التشغيل قبل تنظيف المنتج.
٩. قم بتأمين المنتج أثناء النقل لمنعه من التساقط أو السقوط.

حماية البيئة

عند انتهاء عمر المنتج، تخلص منه في صناديق إعادة التدوير المخصصة من قبل الحكومة لضمان التخلص منه بطريقة مسؤولة بيئيًا.

المواد أو العناصر السامة والخطرة						
اسم المكون	الرصاص	الكادميوم	الزئبق	الكروم السداسي	ثنائيات البربروليوم البيسفينولية	ثنائيات البروبيل إيثرات ثنائي الفينيل
الغلاف	○	○	○	○	○	○
الشريحة	×	○	○	○	○	○
الأجزاء المعدنية	×	○	○	○	○	○
كابل البيانات	○	○	○	○	○	○

أعد هذا النموذج وفقًا لأحكام SJ/T 11376.

0: محتوى المواد السامة والضارة أقل من الحد المحدد في GB/T 27672.

X: محتوى المواد السامة والخطرة يتجاوز الحد المحدد في GB/T 27672.

2. وصف فترة الاستخدام لحماية البيئة

يحتوي هذا المنتج الإلكتروني، عند استخدامه وفقًا للشروط الموضحة في الدليل، على مواد أو عناصر سامة وضارة لا تتسرب، أو تُسبب تلوثًا بيئيًا، أو تُلحق ضررًا جسيمًا بالأشخاص أو الممتلكات لمدة 10 سنوات.

تشير الأرقام الموجودة على هذه العلامة إلى أن مدة الاستخدام الصديقة للبيئة للمنتج في الظروف العادية هي 10 سنوات. قد تحمل بعض المكونات أيضًا علامات خاصة بها تُشير إلى مدة الاستخدام الصديقة للبيئة، والتي يجب تفسيرها بناءً على الأرقام المُقدمة.



بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

1. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروط التاليين:
 - (1) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛
 - (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
 2. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية.
- يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعها، وإذا لم يُركب ويُستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُعيّن. إذا تسبّب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُشجّع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختصًا للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me